



GEBRAUCHSANWEISUNG

INHALTSVERZEICHNIS

I. Abkürzungen.....	4
II. Zweckbestimmung	4
III. Zusammenfassung und Erklärung.....	5
III.1 Betrieb	6
III.1.1 Betrieb On-Premise	7
IV. Verfahrensprinzip	8
V. Glossar der Symbole.....	9
VI. Sicherheitshinweise	10
VI.1 Qualifikation des Bedieners	10
VI.2 Datensicherung.....	10
VI.3 Warnungen und Vorsichtsmassnahmen.....	10
VII. Anweisungen	11
VII.1 RAPTOR SERVER Software Einrichtung.....	11
VII.1.1 Anmelden.....	11
VII.1.2 Persönliche Einstellungen	14
VII.1.3 Tenant Admin.....	14
VII.1.4 Benutzer anlegen	17
VII.1.5 Herunterladen der Agent Software	21
VII.1.6 Update der Agent Software	24
VII.1.7 Bilderfassung, QR-Code-Einlesen und Rasterausrichtung	25
VII.1.8 Bildbearbeitungsmodus.....	29
VII.1.9 Übersicht der Messungen	39
VII.1.10 Genehmigung und Exportieren von Messungen.....	41
VII.2 Bericht	46



VII.2.1	Erstellen eines benutzerdefinierten Report Templates (2025 template).....	46
VII.2.2	Erstellen eines benutzerdefinierten Report Templates (Legacy template)	50
VII.2.3	Interpretationshilfe anfragen.....	61
VII.2.4	Multiplex on Demand	65
VII.3	Messungen von Qualitätskontrollproben	70
VII.4	Trendanalyse	72
VII.5	Löschen von Messungen	73
VII.6	Importieren von Patienteninformationen aus einer Datei.....	75
VII.7	Einen User zum Ärzteportal hinzufügen und eine Messung teilen.....	76
VII.8	Abmelden	78
VII.9	Ärzteportal	78
VII.10	Technische Unterstützung	80
VII.11	Technische Daten	80
VII.12	Fehlerbehebung.....	80
VIII.	Änderungshistorie	83



HAFTUNGSAUSCHLUSS

MacroArray Diagnostics hat die zur Verfügung gestellten Anweisungen, Reagenzien, das Gerät, die Software und die anpassbaren Funktionen für dieses Analysegerät validiert, um die Produktleistung zu optimieren und die Produktspezifikationen zu erfüllen. Benutzerdefinierte Änderungen werden von MacroArray Diagnostics nicht unterstützt, da sie die Leistung des Analysegerätes und die Testergebnisse beeinträchtigen können. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die von MacroArray Diagnostics vorgenommenen Änderungen an dieser Anleitung, an Geräten, Reagenzien oder Software zu überprüfen.

Bitte lesen Sie die entsprechende Gebrauchsanweisung bevor Sie Tests prozessieren!

Die folgenden Produkte fallen in den Anwendungsbereich dieses Dokuments und werden im Folgenden als „Tests“ oder „Testkits“ bezeichnet:

Produktname	REF-Nummer	CE-Zeichen
ALEX ²	02-2001-01, REF 02-5001-01	
ALEX Air	06-5001-01	
ALEX Food	07-5001-01	
ALEX ³	03-2001-01, REF 03-5001-01	
FOX	80-2001-01, REF 80-5001-01, REF, 80-0001-01	

HAFTUNGSERKLÄRUNG

Dieses Handbuch wurde auf ihre Richtigkeit geprüft. Die Anweisungen und Beschreibungen für die RAPTOR SERVER Analysis Software waren zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Handbuchs korrekt. Spätere Änderungen im Handbuch können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden; MacroArray Diagnostics übernimmt jedoch keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt durch Fehler in der Anleitung verursacht werden. Der ImageXplorer und der RAPTOR SERVER sind in-vitro-Diagnosegeräte, die nur von geschultem Laborpersonal verwendet werden dürfen.

Dieses Handbuch und die beschriebene Software sind urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieses Handbuchs oder der beschriebenen Software darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der MacroArray Diagnostics vervielfältigt, reproduziert oder auf ein elektronisches Medium oder ein maschinenlesbares Format kopiert werden.



I. ABKÜRZUNGEN

DPA	Datenschutzvereinbarung
GD	Orientierungspunkte (Guide dots)
IFU	Gebrauchsanweisung (Instructions for Use)
IgE	Immunoglobulin E
IgG	Immunoglobulin G
IVD	In-vitro Diagnose
MOD	Multiplex On Demand
QC	Qualitätskontrolle (Quality Control)
RUO	Nur für Forschungszwecke (Research use only)
ToS	Geschäftsbedingungen (Terms of Service)

II. ZWECKBESTIMMUNG

Die RAPTOR SERVER Analysis Software steuert und beeinflusst MADx Hardwaresysteme in Kombination mit auf ALEX-Technologie-basierten Produkten. Die Software analysiert den Output von ALEX-Technologie-basierten Arrays und wird von geschultem Laborpersonal und medizinischem Fachpersonal in einem medizinischen Labor verwendet.

Diese Gebrauchsanweisung ist für folgendes Produkt anwendbar:

Basis UDI-DI	REF	Produkt
91201229222JW	22-0000-01	RAPTOR SERVER Analysis Software



III. ZUSAMMENFASSUNG UND ERKLÄRUNG

Die RAPTOR SERVER Analysis Software ist eine cloud-basierte Anwendung und wird über den Browser (Google Chrome) betrieben. Die RAPTOR SERVER Analysis Software erfasst und analysiert Bilder, die mit dem ImageXplorer oder einem MAX Gerät (MAX 45k und MAX 9k) von prozessierten Test Arrays, aufgenommen wurden. Der RAPTOR SERVER übernimmt die Speicherung von Daten und die Erstellung von Berichten der diagnostischen Laborergebnisse übernimmt.

Die Software besteht aus:

- einer web-basierten Server-Software, die die Steuerung der grafischen Benutzeroberfläche über den Web-Browser des Benutzers ermöglicht. Diese Server-Software wird allgemein als RAPTOR SERVER bezeichnet.
- einer eigenständigen Anwendung zur Datenübertragung zwischen dem ImageXplorer und der Server-Software. Diese Anwendung wird allgemein als "AGENT" bezeichnet.

Die Software wurde speziell für die Analyse und Berichterstattung von Ergebnissen von Test Arrays entwickelt.

Weitere Informationen zu den Gebrauchsanweisungen (IFU), den Leistungsmerkmalen und der Zusammenfassung der Sicherheit und Leistung der Tests finden Sie auf der MADx-Website: <https://www.madx.com/de/extras>.



III.1 BETRIEB

Idealerweise sollte der Betrieb des RAPTOR SERVER zentralisiert werden, in Form einer Cloud-basierten SaaS-Anwendung (Software as a Service). Aber auch ein rein lokaler Betrieb auf einem einzelnen PC oder der Betrieb innerhalb eines kundeneigenen Rechenzentrums (RAPTOR SERVER "on-premise") ist möglich allerdings mit stark eingeschränkter Unterstützung und Funktionen.

Um eine Analyse mit dem RAPTOR SERVER durchzuführen, sind ein Test und ein Gerät erforderlich:

Für die Analyse	
ALEX ²	REF 02-2001-01, REF 02-5001-01
ALEX Air	REF 06-5001-01
ALEX Food	REF 07-5001-01
ALEX ³	REF 03-2001-01, REF 03-5001-01
FOX– nicht durch eine Benannte Stelle zertifiziert	REF 80-2001-01, REF 80-5001-01, REF 80-0001-01

Für die Bildgebung	
ImageXplorer	REF 11-0000-01
MAX 9k	REF 17-0000-01
MAX 45k	REF 16-0000-01

Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die IFUs der Testkits oder Geräte:

<https://www.madx.com/de/extras>.

WICHTIGE BENUTZERINFORMATIONEN:

Für den korrekten Gebrauch des ImageXplorer und/oder der MAX Geräte mit der RAPTOR SERVER Analysis Software ist es notwendig, dass der Benutzer diese Gebrauchsanweisung sorgfältig liest und befolgt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eine Verwendung dieses Testsystems, die nicht in diesem Dokument beschrieben ist, oder für Änderungen durch den Benutzer des Testsystems.



III.1.1 BETRIEB ON-PREMISE

Hardware- und Software-Anforderungen:

Aufgrund der bereitgestellten Anwendungscontainer (Docker-Images) kann RAPTOR SERVER auf jedem Linux- oder Windows-Server betrieben werden. Einzige Softwarevoraussetzung auf dem Server ist neben dem (vom Kunden bereitgestellten und gepflegten) Betriebssystem eine aktuelle Docker-Installation. Die Anwendungscontainer werden dort (über Standard-Docker-Befehle) installiert, können direkt starten und bringen alle weiteren Abhängigkeiten in ihren jeweiligen Containern mit. Die konkreten Hardware-Anforderungen hängen von der Anzahl der Messungen (Daten) ab, die auf der RAPTOR SERVER -Installation verarbeitet werden, aber in der Regel sind Standard-Small-Business-Server mehr als ausreichend (2 CPU-Kerne, 16 GB Speicher, 100 GB Festplattenplatz). Nach dem Start der Anwendungscontainer kann RAPTOR SERVER entweder direkt über den Browser auf dem Server genutzt werden, oder der Kunde kann den Server in das lokale Netzwerk einbinden, um RAPTOR SERVER auf anderen mit dem Server verbundenen Computern (wiederum über den Browser) verfügbar zu machen.

Da die On-Premise-Variante dieselben Anwendungscontainer verwendet wie die Cloud-basierte Variante, sind dieselben Schutzmechanismen gegen unbefugten Zugriff auf die Software (Benutzername, starkes Passwort, MFA usw.) vorhanden. Der unberechtigte Zugriff auf die Server-Hardware selbst und das Betriebssystem liegt in der Verantwortung des Kunden und der dortigen Systemadministratoren. Eine Hauptmaßnahme gegen unbefugten Zugriff in On-Premise-Szenarien ist die Trennung vom Internet (nur Zugriff vom lokalen Server oder Netzwerk).

Installations- und Aktualisierungsprozess für On-Premise-Installationen:

Alle Anwendungscontainer (Docker-Images) sind in einer von MADx bereitgestellten öffentlichen Docker-Registry verfügbar. Sowohl die Cloud-basierte Installation als auch die On-Premise-Installationen können dort die neueste validierte Release-Version der Anwendungscontainer mit Standard-Docker-Funktionalität und -Befehlen herunterladen. Der Zugriff auf die Container Registry ist über das Internet möglich, aber durch ein Passwort geschützt. Sobald eine neue Version (entweder ein neues geplantes Release oder eine Hotfix-Version) von MADx validiert und freigegeben wird, ist sie in dieser Docker-Registry verfügbar. Sie wird dann automatisch auf die Cloud-basierte Installation aufgespielt. On-Premise-Kunden werden entweder per E-Mail oder durch ihre Distributoren über neue Releases informiert.



IV. VERFAHRENSPRINZIP

Die tests sind Festphasen-Immunoassays. Allergen- / Antigenextrakte oder molekulare Allergene / Antigene, die an Nanopartikel gekoppelt sind, werden in systematischer Weise auf eine Festphase aufgebracht und bilden ein makroskopisches Array.

Zunächst reagieren die partikelgebundenen Allergene mit spezifischen Antikörpern, die in der Patientenprobe vorhanden sind. Nach der Inkubation werden unspezifische Bindungen abgewaschen. Das Verfahren wird durch Zugabe eines enzymmarkierten antihumanen Detektionsantikörpers fortgesetzt, der mit dem partikelgebundenen spezifischen Antikörpern einen Komplex bildet. Nach einem zweiten Waschschrift wird Substrat zugegeben, das durch das antikörpergebundene Enzym in ein unlösliches, gefärbtes Präzipitat umgewandelt wird. Schließlich wird die Enzym-Substrat-Reaktion durch Zugabe eines Stopreagenzes gestoppt. Die Menge des Präzipitats ist proportional zur Konzentration des spezifischen IgE in der Patientenprobe.

Nach dem Labortestverfahren erfolgt die Bildaufnahme und -analyse mit dem ImageXplorer oder einem der MAX Geräte. Die Testergebnisse werden mit der MADx RAPTOR SERVER Analysis Software analysiert. Testergebnisse werden in allergenspezifischen IgE-Einheiten (kU_A/l), die Gesamt-IgE-Ergebnisse in IgE-Einheiten (kU/l) angegeben. Je nach benutztem Test werden die Ergebnisse auch in IgG-Einheiten ($\mu\text{g}/\text{ml}$) angegeben. Quantitative Einheiten (kU_A/l) werden durch lineare Regression aus willkürlichen Intensitätseinheiten berechnet. Die Kurvenparameter für die mathematische Transformation werden aus dem jeweiligen Test abgeleitet und von der RAPTOR SERVER Analysis Software bereitgestellt.



V. GLOSSAR DER SYMBOLE

	In vitro Diagnostikum
	CE-Zeichen
	CE-Zeichen (Benannte Stelle 2962: QMD Services GmbH, Zelinkagasse 10/3, 1010 Vienna, Austria)
	Hersteller
	Achtung
	MacroArray Diagnostics (MADx)



VI. SICHERHEITSHINWEISE

Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt ist MADx und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

VI.1 QUALIFIKATION DES BEDIENERS

Die RAPTOR SERVER Analysis Software sollten von oder unter Aufsicht eines Technikers oder Benutzers betrieben werden, der für Laborarbeiten ausreichend qualifiziert ist. Vor der Bedienung der RAPTOR SERVER Analysis Software sollte der Benutzer die folgenden Punkte beachten:

- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch
- Seien Sie mit allen relevanten Laborverfahren vertraut
- Beachten Sie alle relevanten Sicherheitsvorschriften und -regelungen

VI.2 DATENSICHERUNG

Bei der Verwendung von RAPTOR SERVER werden alle analytischen und personenbezogenen Daten gemäß den MADx Terms of Service Agreement im Microsoft Azure Online Portal gespeichert. Bitte beachten Sie auch die Online Services Terms (OST) von Microsoft, die unter <https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products> verfügbar sind. Für die RAPTOR SERVER on-premise Version, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen IT-Administrator.

VI.3 WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Die Ergebnisse und Daten müssen von einer qualifizierten Person manuell genehmigt werden. Die RAPTOR SERVER Analysis Software schlägt optimale Einstellungen (z. B. Gittereinstellungen) vor, die gegebenenfalls manuell überprüft und optimiert werden müssen.
- Die Genehmigung dieses Berichts stellt nicht automatisch eine Diagnose dar. Dieser Bericht muss zusammen mit anderen klinischen Befunden betrachtet und von einem Allergologen oder Arzt interpretiert werden. Wenden Sie sich für eine genaue Diagnose und Behandlungsempfehlungen immer an einen qualifizierten Arzt.
- Die RAPTOR SERVER Analysis Software, einschließlich der API, wurde von MADx vollständig validiert. Die Interaktion zwischen externer Software und der API sowie die externe Software selbst sind nicht Gegenstand der von MADx durchgeführten Validierung.
- Die Standardmaßnahmen zum Datenschutz, zur Datenintegrität und zur Datensicherheit müssen eingehalten werden. Dazu gehören unter anderem:
 - die Verwendung starker, eindeutiger Passwörter,
 - die Verwendung einer mehrstufigen Authentifizierung,
 - Beschränkung des Zugriffs auf die Software und die Daten auf autorisiertes Personal,
 - keine Weitergabe sensibler Informationen (z. B. API-Schlüssel, Kennwörter usw.).



VII. ANWEISUNGEN

VII.1 RAPTOR SERVER SOFTWARE EINRICHTUNG

Google Chrome wird als Browser für die Verwendung der RAPTOR SERVER-Software empfohlen. Auf die RAPTOR SERVER Analysis Software kann über die Website zugegriffen werden: <https://www.raptor-server.com>

Die RAPTOR SERVER-Instanz ist für den SaaS-Betrieb ausgelegt und unterstützt daher mehrere unabhängige Tenants. Jeder Tenant ist von allen anderen Tenants getrennt und ein Datenaustausch zwischen Tenants ist in keiner Weise möglich.

VII.1.1 ANMELDEN

Ein Tenant ist die Online-Einheit für ein einzelnes Labor innerhalb des RAPTOR SERVERs. Tenants werden von MADx erstellt und der Zugang wird von Ihrem lokalen Distributor bereitgestellt.

Mehrere Benutzer können sich bei einer Tenant-Plattform anmelden. Der Zugang zu einem Tenant auf dem RAPTOR SERVER ist nur für Benutzer mit einem gültigen Benutzernamen und Passwort möglich, die von MADx oder einem externen Verzeichnisdienst (Office 365 / Azure Active Directory) festgelegt wurden. Die Benutzerkonten werden vom Tenant-Administrator (lokaler Distributor oder MADx) erstellt. Falls das Passwort vergessen wurde, kann es auf der Loginseite zurückgesetzt werden.



Welcome to RAPTOR SERVER Analysis Software, the analysis software for the [ALEX multiplex test](#).
Please log in below to continue.

Log in with Azure AD / Office 365	Log in with Username & password
If your organization integrates the software into its Microsoft Azure/Office 365 user directory (single-sign-on) click the button below. You will be redirected to the Microsoft login screen.  Log in	Please enter your username and password. Your username Your password   Log in Forgot your password? No problem, you can request a new one.




Durch einen Klick auf das Augenicon kann das Passwort sichtbar gemacht werden.

Mit Benutzernamen und Passwort anmelden

Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort an.



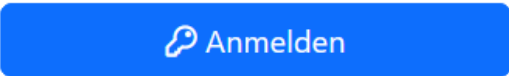

Sie haben Ihr Passwort vergessen? Kein Problem, Sie können [ein neues anfordern](#).

Nach der erfolgreichen Anmeldung muss der User bestätigen die angeführten Dokumente gelesen und dem Inhalt zugestimmt zu haben, bevor der RAPTOR SERVER vollumfänglich genutzt werden kann. Falls es zu Updates der Gebrauchsanweisung, der Benutzerbedingungen (Terms of Service) oder anderen Dokumenten kommt, wird der User über das Pop-Up, dass nach dem Login aufscheint, informiert.


Vertragszustimmung benötigt

Bitte lesen Sie die folgenden Dokumente. Um Raptor Server nutzen zu können, müssen Sie alle Dokumente gelesen und akzeptiert haben.

☐ [Bitte lesen](#) (zuletzt aktualisiert 23.11.2023 18:00)

☐ [RAPTOR SERVER IFU](#) (zuletzt aktualisiert 04.12.2023 11:05)

☐ [Terms of Service](#) (zuletzt aktualisiert 22.11.2023 01:00)

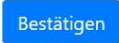

Durch Klicken des Buttons bestätige ich, dass ich diese Dokumente gelesen habe und damit einverstanden bin.

Nachdem der User zugestimmt hat. Hat er Zugang zu seinem Tenant und sieht das Dashboard. Auf der linken Seite findet er die letzten neuen und freigegebenen Messungen.



New Measurements					Last 7 days
QC	Product type / Source	QR-Code	Sample Code	Analysis Date	
❌ Failed	Research MAX 45k	99AFG0F7	NK FOX	30/03/2023 20:50	Details Report
❌ Failed	Research MAX 45k	99AFG0F8	N.G.	30/03/2023 20:50	Details Report
❌ Failed	Research MAX 45k	99AFG0F9	E18735	30/03/2023 20:50	Details Report
❌ Failed	Research MAX 45k	99AFG0FA	20220325w56	30/03/2023 20:50	Details Report
❌ Failed	Research MAX 45k	99AFG0EE	HM100038	30/03/2023 20:50	Details Report
❌ Failed	Research MAX 45k	99AFG04D	786118	30/03/2023 20:37	Details Report
❌ Failed	Research MAX 45k	99AFG016	HM100225	30/03/2023 20:37	Details Report
❌ Failed	Research MAX 45k	99AFG0CA	E17685_M	30/03/2023 20:37	Details Report
❌ Failed	Research MAX 45k	99AFG0CC	E17685_M	30/03/2023 20:37	Details Report
❌ Failed	Research MAX 45k	99AFG015	E17685_F	30/03/2023 20:37	Details Report

In total there are 270 new measurements in the selected time period.


[View all new measurements](#)

Approved Measurements					
QR-Code	Product type / Source	Sample Code	Analysis Date		
02AVJ227	ALEX2	Anna LMacey	28/03/2023 21:17	Details	Report
02ARA379	ALEX2 IX	SM_28032023	28/03/2023 14:29	Details	Report
02ARA393	ALEX2 IX	RG_28032023	28/03/2023 14:26	Details	Report
02AVA31F	ALEX2 MAX 45k	PR_Mar2023_11	21/03/2023 15:05	Details	Report
02AVI3B9	ALEX2 MAX 45k	KF	17/03/2023 14:46	Details	Report
02AYT337	ALEX2 MAX 45k	2B46B46+CCD	14/03/2023 19:06	Details	Report
02ATL349	ALEX2 IX		22/02/2023 14:21	Details	Report
02AVE383	ALEX2 MAX 45k	AO	03/02/2023 09:41	Details	Report
02AXI29A	ALEX2 MAX 5k	OW	19/01/2023 19:12	Details	Report
02AUY3AE	ALEX2 MAX 45k	BSZ_Okt2022_8	18/10/2022 18:12	Details	Report

[View all approved measurements](#)

Auf der rechten Seite des Bildschirmfensters werden die aktuell verbundenen Geräte und das Datum des zuletzt durchgeführten ConfigXplorer Scans und/oder der monatlichen Wartung (nur für MAX Geräte) angezeigt. Über das Dashboard können Messungen, ein ConfigXplorer Scan sowie die monatliche Wartung (MAX Geräte) direkt gestartet werden. Zusätzlich findet man die Verknüpfungen zu den allgemeinen Einstellungen der Geräte („Configure“) sowie zu den Aufzeichnungen der QC-Messungen („QC-History“) am Dashboard.

Connected Devices

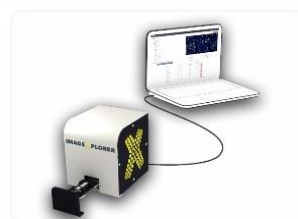


IX Test

Standby

[Start Measurement](#) Start new ConfigXplorer scan

Last ConfigXplorer scan: never

[Start QC sample scan](#) [QC History](#) [Configure](#)

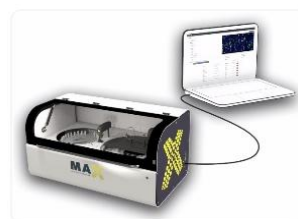

9K-Test-Instrument

Not initialized

[Initialize](#) [Shutdown](#) [Monthly Maintenance](#)

Last ConfigXplorer scan: 12.04.2023 14:08

Last monthly maintenance: 01.12.2022 15:39

[QC History](#) [Configure](#)

[View all MAX devices](#)

[View all ImageXplorers](#)



VII.1.2 PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN

Unter "Persönliche Einstellungen" können Sie die Benutzersprache, die Kultur (z.B. Englisch (UK)) und die Zeitzone auswählen. Um die RUO-Spots sichtbar zu machen, kann der Benutzer im Dropdown-Menü "Forschungssspots anzeigen" auswählen. Darüber hinaus kann die Anzeigesprache ausgewählt werden, sobald die Übersetzung verfügbar ist.

RAPTOR SERVER unterstützt die Mehrfaktor-Authentifizierung (MFA) von Benutzern mit einem bestimmten Benutzernamen und Passwort. Sie kann in den persönlichen Einstellungen eingerichtet werden, indem eine Authentifizierungs-App (Google oder Microsoft) auf dem Smartphone des Benutzers installiert wird. Wenn der Benutzer auf der Seite Persönliche Einstellungen auf MFA verwalten klickt, wird er zur Einrichtung der MFA geführt.

Persönliche Einstellungen

Name: Test User

E-Mail Adresse: test.user@mail.com

Sprache: Deutsch (de)

Die Sprache dient zur Bestimmung der Anzeigesprache.

Kultur: Deutsch (de)


Die Kultur wird zur Formatierung von Zahlen und Daten verwendet.

Zeitzone: None (use UTC time)

Konfigurieren Sie Ihre Zeitzone, um Datum und Uhrzeit in Ihrer Ortszeit statt in UTC anzuzeigen.

VII.1.3 TENANT ADMIN

Wenn Sie auf das Menüsymbol  in der oberen rechten Ecke klicken und Tenant Admin wählen, werden Sie zum Bereich Tenant Admin weitergeleitet, wo Sie die Einstellungen für Ihren Tenant festlegen können.

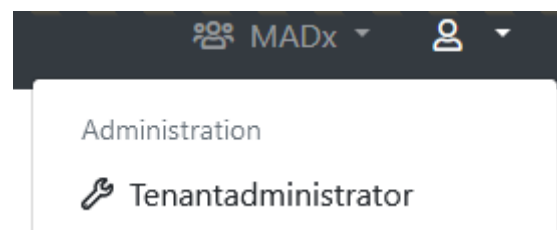

Rufen Sie zunächst die Seite Tenant Konfiguration auf und füllen Sie die Unternehmensdaten entsprechend aus. Vergewissern Sie sich, dass es sich bei den Unternehmensangaben um offizielle Daten handelt. MFA ist standardmäßig für alle neu erstellten Tenants aktiviert. Administratoren mit der Zugriffsberechtigung „Can manage basic tenant configuration“ können bei Bedarf die Einstellung für alle Benutzer innerhalb eines Tenants deaktivieren. Nach Aktivierung von „Force MFA“ werden Benutzer bei ihrer nächsten Anmeldung aufgefordert, die MFA-Einrichtung abzuschließen.



Configure "MADx"

General configuration	
* Name:	MADx
Default timezone:	(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, R...
Configure a timezone to see date and times in (instead of UTC). Please note that users can choose to use a different timezone.	
Default report template (ALEX2):	ALEX2
Default report template (ALEX3, ALEX Air, ALEX Food):	check 1.21
Default report template (FOX):	FOX (2025)
Default report template (PAX):	PAX
Default report language:	English (en)
Default ALEX MOD:	< No MOD >
Default FOX MOD:	< No MOD >
Default PAX MOD:	< No MOD >
Force MOD:	False
Requires a measurement to always have an MOD assigned. If this setting is enabled, a measurement cannot be approved without an MOD assigned.	
Hide Global MOD:	False
If this setting is enabled, only the tenant-specific MOD will be available to select, and the global system-wide MOD will be hidden.	
Display MOD Excluded Spots As Research Use Only:	False
If this setting is enabled, spots excluded by an MOD will not be hidden from the measurement image, but displayed as a "RUO spot".	
MFA:	☐ Force MFA
If this setting is enabled, users are forced to set up an MFA on sign-in, in case they haven't yet.	

MAX device default settings	
* Default Minimum RunId:	10
When a new MAX device is created, this value will be used for its Minimum Run Id	

Tenant-specific batch releases	
Restrict this tenant to only allow the following batches to be scanned or to restrict certain batches. Enter one per line.	
Use:	
☒ Whitelist	
☐ Blacklist	
Whitelisted Batches:	
Enter one batch code including product identifier per line, for example "02AAA"	
Blacklisted Batches:	
Enter one batch code including product identifier per line, for example "02AAA"	

Company Details

* Legal Entity Name:	MacroArray Diagnostics
* Street and Number:	Street 4
* Zip Code:	1230
* City:	New York
* Country:	United States of America
* Phone:	+4318652573
* E-Mail:	office@macroarraydx.com
* Legal Representative:	Dr. Christian Harwanegg
Website:	
Vat Number:	
Company Register Number:	



VII.1.3.1 BLACKLISTING UND WHITELISTING VON BATCHES

Einzelne Batches können von einem Benutzer mit dem Zugriffsrecht „Can manage basic tenant configuration“ pro Tenant auf eine Black- oder Whitelist gesetzt werden. Um einen Batch auf die Black- oder Whitelist zu setzen, kann zwischen „Whitelist“ und „Blacklist“ umgeschaltet und den/die Batchcode/s eingegeben werden, die auf die Black- oder Whitelist gesetzt werden soll/en.

Tenant-specific batch releases
Restrict this tenant to only allow the following batches to be scanned or to restrict certain batches. Enter one per line.
Use:
☒ **Whitelist**
☐ **Blacklist**

Whitelisted Batches:

02AAA
02ABC
02BAA

Blacklisted Batches:

Wenn ein Batch auf der Blacklist steht, kann er nicht mehr gescannt werden und RAPTOR SERVER gibt einen Fehler zurück.

You requested a new measurement from ImageExplorer "IX Trainingsraum". Please wait until the measurement is completed ...

Invalid batch detected! The measurement can't be processed because its batch is blocked.

Wenn ein Batch auf der Whitelist steht, lässt RAPTOR SERVER nur Batches mit diesem Code zum Scannen zu.




Weitere wichtige Seiten des Tenant-Admin-Bereichs sind:


- ImageXplorers und MAX Gerät: Verwenden Sie dies, um vorhandene ImageExplorer / MAX Geräte zu konfigurieren oder neue hinzuzufügen. Jeder/s ImageExplorer / MAX Gerät muss beim RAPTOR SERVER registriert werden, sonst ist eine Verbindung nicht möglich.
- Report Templates: Verwenden Sie diese Funktion, um Berichtsvorlagen für diesen Tenant zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen. Jede Vorlage kann ihr spezifisches Aussehen und ihre spezifische Konfiguration haben.
- Measurement data completion: Verwalten vordefinierter Patienten-Informationen, die einer Messung zugeordnet werden können.
- Result Sharing Portal: Hier können Sie Benutzer im Portal zur gemeinsamen Nutzung von Ergebnissen für diesen Mandanten erstellen, bearbeiten oder löschen. Messungen können für Benutzer des Portals zur gemeinsamen Nutzung von Ergebnissen freigegeben werden, und Benutzer können das Portal zur gemeinsamen Nutzung von Ergebnissen verwenden, um auf diese Messungen zuzugreifen.

VII.1.4 BENUTZER ANLEGEN

Im Tenant-Admin-Bereich können außerdem die Benutzer für jeden Tenant erstellt und bearbeitet werden. Dazu auf „Manage Users“ klicken.

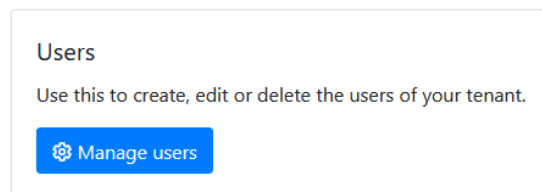

Man sieht eine Liste aller Benutzer des aktuellen Tenants. Über „Configure“ können die Rechte eines bestehenden Benutzers angepasst werden. Die Schaltfläche „Add new user“ am Anfang der Seite fügt einen neuen Benutzer zu dem Tenant hinzu. Ein bereits angelegter Benutzer in einem anderen Tenant kann über die Option „Add user from another tenant“ zu dem aktuellen Tenant hinzugefügt werden.

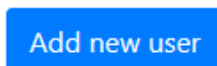

Für jeden Benutzer kann, nachdem „Add new user“ geklickt wurde, der Name, die E-Mail Adresse und die Anmeldeinformationen hinterlegt werden. Ein Benutzer kann sich über Username und Passwort authentifizieren, oder über einen Microsoft Account, welcher anhand der Information im Feld „Azure AD UPN“ definiert wird.



Über die vordefinierten Benutzergruppen können dem Benutzer Rechte einer bestimmten Gruppe (z.B.: Labormitarbeiter, Support, etc.) zugewiesen werden. Zusätzlich können für jeden Benutzer die Rechte individuell angepasst werden.

Add New User

General Information

Name:

Status:

E-Mail address:

Login Credentials

Type:

Please select if the user should be validated against Azure AD (Office 365), or if you want to specify username and password yourself. It is recommended to use Azure AD whenever possible. This allows for increased security by supporting two-factor authentication. Also, it is more convenient for the user, because he or she does not have to remember a new username and password (single-sign-on).

Username:

It is a good idea to use the users e-mail-address as his username, because the username needs to be unique across the entire system.

Password:

Access Rights

Preconfigured groups

Use these pre-configured groups to automatically assign a set of access rights to this user. You can still add or remove specific access rights.

[Reset](#) [Lab User](#) [Super Lab User](#) [Support/Distributor User](#) [System Administrator](#)

Mit

der Funktion am unteren Ende der Seite kann ein Benutzer durch Klick auf das Auswahlfeld „Add user to all tenants shown below“ mehreren Tenants gleichzeitig hinzugefügt werden.

☐ Add user to all tenants shown below

☐ MADx
☐ MadX_Training
☐ New Tenant

Sie können den jeweiligen Benutzer nur jenen Tenants zuweisen, in denen sie als Benutzer bereits verbunden sind. Am unteren Ende sehen Sie die Liste der Tenants, denen dieser Benutzer bereits zugewiesen wurde, inkl. der entsprechenden Benutzerrechte, und darunter eine Liste weiterer Tenants, denen dieser Benutzer noch zugewiesen werden kann.



Tenants

This user is connected to the following tenants and has the following access rights:

☐ Tenants	Can share measurements	Can edit measurements	Can edit personal data	Can approve measurements	Can manage basic tenant configuration	Can manage API keys	Can manage ImageXplorers	Can manage MAX devices	Can view agent connections	Can manage users	Can manage users of Result Sharing Portal	Can manage report templates	Can manage measurement data completion	System Administration	Can unapprove measurements	Can use a custom calibration string	Can manage Run Configuration	Can skip
☐ Another MADx Tenant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
☐ MADx Tenant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Additionally this user can be added to the following tenants by checking the tenant name and hitting save afterwards. User rights w applied from current open tenant user.

Start typing a tenant name ...

☐ Test
☐ Test Tenant

Um den Benutzer einem weiteren Tenant zuzuordnen, markieren Sie diesen Tenant (Sie können auch die Suchleiste verwenden, um nach einem Tenant zu suchen), und klicken Sie auf Speichern. Die Rechte des aktuell geöffneten Benutzers werden automatisch auf den neuen Benutzer angewendet. Nachdem der Benutzer so angelegt wurde, erhält er eine E-Mail-Benachrichtigung. Über diese E-Mail kann sich der Benutzer nun beim RAPTOR SERVER anmelden.

Additionally this user can be added to the following tenants by checking the tenant name and hitting save afterwards. User right applied from current open tenant user.

Start typing a tenant name ...

☐ Test
☐ Test Tenant
☐ TOS Tenant
☒ Val 11,1

Mithilfe der tabellarischen Übersicht der Benutzerrechte können Sie die Rechte des Benutzers für mehrere Tenants bearbeiten. Markieren Sie die Tenants, für die Sie diese bestimmten Benutzerrechte festlegen möchten. Nach der Auswahl erscheint oben eine Schaltfläche zum Bearbeiten der Rechte für alle ausgewählten Tenants. Durch Anklicken des Buttons gelangen



Sie zur gewohnten Bearbeitungsseite für Benutzerrechte. Die von Ihnen vorgenommenen Anpassungen wirken sich auf alle zuvor von Ihnen ausgewählten Tenants aus.

Tenants

This user is connected to the following tenants and has the following access rights:

 Edit selected tenants rights

☐	Tenants	Can share measurements	Can edit measurements	Can edit personal data	Can approve measurements	Can manage basic tenant configuration	Can manage API keys	Can manage Image
☒	Another MADx Tenant	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Nachdem am Ende der Seite „Save“ geklickt wurde, bekommt der neue Benutzer eine Willkommensmail. Über dieses Mail kann er sich nun in den RAPTOR SERVER einloggen.



VII.1.5 HERUNTERLADEN DER AGENT SOFTWARE

Um ein Gerät (in diesem Beispiel einen ImageXplorer) für Ihren Tenant einzurichten, gehen Sie in den Tenant-Admin-Bereich und klicken Sie auf "Manage ImageXplorers". Um einen neuen ImageXplorer hinzuzufügen, wählen Sie bitte "Add new ImageXplorer" und geben Sie diesem einen Namen. Ein ImageXplorer-Schlüssel wird automatisch generiert.

ImageXplorers

Use this to configure ImageXplorers, or add new ones. Every ImageXplorer needs to be known to Raptor Server, otherwise it won't be able to connect.

Manage ImageXplorers

Add new ImageXplorer

General information

Name:

Key:

This key is required when installing an Agent.

ImageXplorer Serialnumber:

Serialnumber of connected ImageXplorer.

Notes:

Internal Notes:

For internal use only.

Disabled:

QR-Code image configuration

QR-Code Exposure:

Calibration configuration

Mode:

Array image configuration

Array Offset X:

Array Offset Y:

Array Width:

Array Height:

Array Exposure:

Save

Nach einem Klick auf "Save" gelangen Sie zurück zur Übersichtsseite des jeweiligen ImageXplorers. Hier müssen Sie die ImageXplorer Agent Software herunterladen.



ImageXplorers for "MADx"

Add new ImageXplorer


Download ImageXplorer Agent Software


Führen Sie die Installation des ImageXplorer-Agenten wie einen regulären Installationsprozess durch.

HINWEIS: Die Verwendung des ImageXplorer erfordert das Vorhandensein der Software "Pylon Runtime 6.1.1", von Basler. Wenn Sie die "Voll"-Version des ImageXplorer Agent installieren, ist die Software enthalten. Wenn Sie diese Software bereits besitzen, genügt es, die "Slim"-Version der Software zu installieren.

HINWEIS: Es wird empfohlen, vor der Installation des ImageXplorer Agent jede andere Pylon-Software vom PC zu entfernen, z. B. frühere Versionen der Pylon Runtime.

Um den Agenten zu aktivieren und ihn mit dem ImageXplorer und dem RAPTOR SERVER zu verbinden, gehen Sie bitte zu Einstellungen und geben Sie die RAPTOR SERVER URL: <https://www.raptor-server.com> und Ihren ImageXplorer Schlüssel ein und klicken Sie auf "Continue".

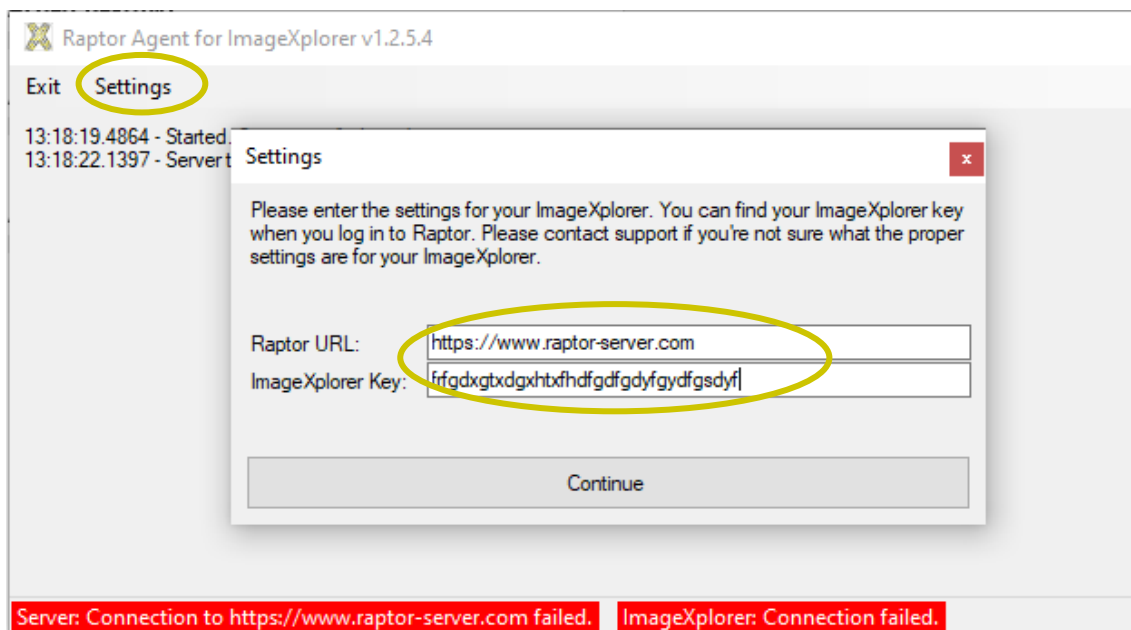

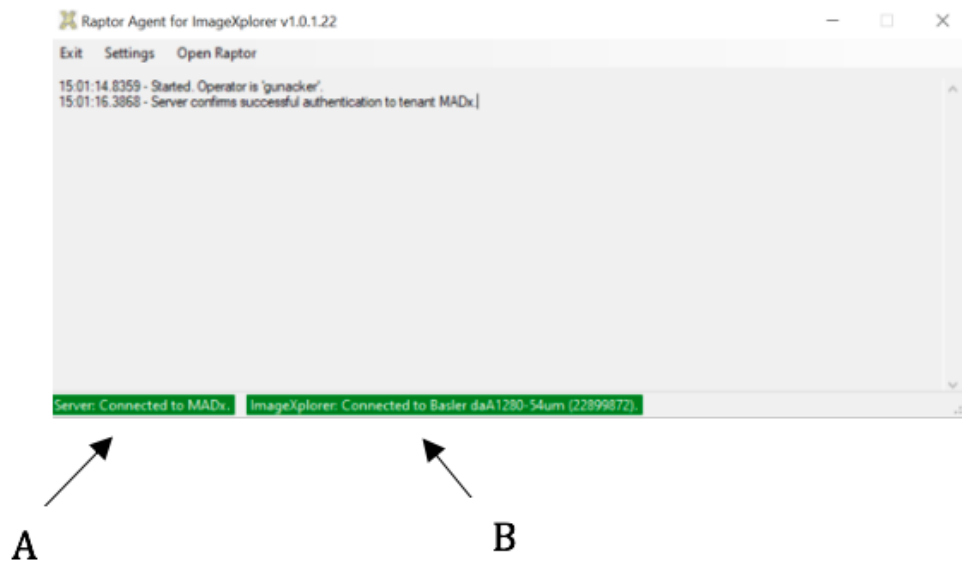

A: Verbindung zum RAPTOR SERVER

B: Verbindung zum ImageXplorer

Wenn eine Verbindung sowohl zum RAPTOR SERVER als auch zum ImageXplorer hergestellt ist, werden beide Felder grün hervorgehoben. Wenn eine Verbindung fehlschlägt, finden Sie weitere Anweisungen im Abschnitt zur Fehlerbehebung (später in diesem Dokument).


Weitere Informationen zum Anpassen der Einstellungen eines Geräts finden Sie in der Gebrauchsanweisung des ImageXplorer- bzw. der MAX Geräte.




VII.1.6 UPDATE DER AGENT SOFTWARE

Wenn ein Update verfügbar ist, bekommt der Anwender eine Pop-Up Benachrichtigung im Agent. Klicken Sie „OK“, und dann „Ja“, um das Update auszuführen.


Bitte beachten Sie, dass die Unterstützung des lokalen IT-Verantwortlichen eventuell dazu nötig ist, da eine Software-Installation Administrator-Rechte benötigt!

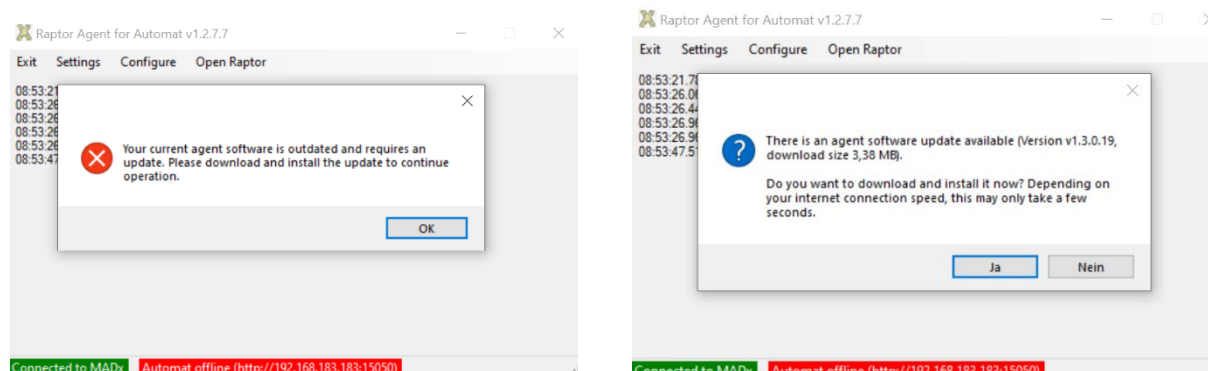

Wenn Sie das Pop-Up verpasst haben, ist die Durchführung jederzeit möglich. Klicken Sie auf „Install Update“.

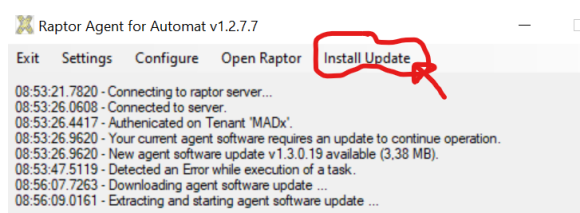

Windows unterbricht eventuell die Ausführung, und fragt, ob man „Änderungen erlaubt“.

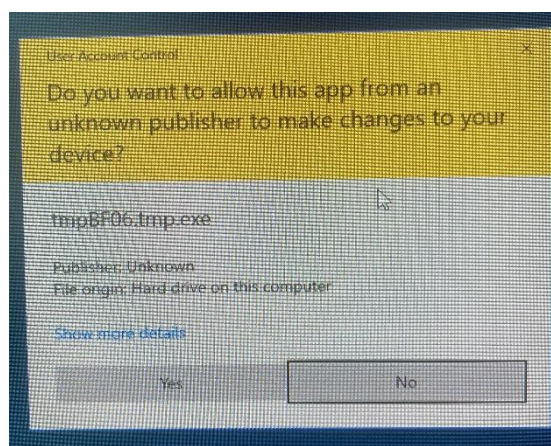


Klicken Sie „Ja“ um fortzufahren. Es wird weiters eine gewöhnliche Software-Installation ausgeführt, ähnlich zu anderer Software.



VII.1.7 BILDERFASSUNG, QR-CODE-EINLESEN UND RASTERAUSRICHTUNG

Auf der Übersichtsseite finden Sie ein Register "Neue Messungen", ein Register "Freigegebene Messungen", eine Schaltfläche für "Messung starten mit ImageXplorer" und eine Schaltfläche für MAX Geräte. Das Register "Neue Messungen" enthält alle neuen und nicht genehmigten Messungen, das Register "Freigegebene Messungen" enthält alle bisher genehmigten Messungen.

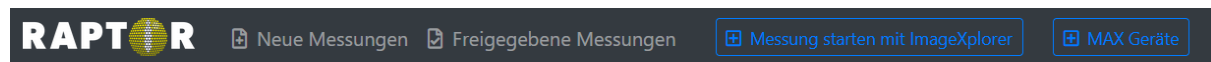

Der QR-Code auf jeder Kassette enthält die folgenden Informationen:

- Art des Testarrays
- Die Verteilung der einzelnen Allergene auf dem Array
- QC-Informationen
- Lot-Nummer der Kassette

Nach der Bilderfassung und Analyse wird eine detaillierte Übersicht der Messung mit den Patienteninformationsfeldern und Probeninformationsfeldern auf der linken Seite, einem analytischen Bild des Arrays auf der rechten Seite und einer detaillierten Ergebnisansicht der Allergene darunter angezeigt.

A: Felder für Patienten- und Probeninformationen

Barcode: 02AE3488

Proben Code:

Anforderungscode:

Datum der Probenahme: TT.MM.JJJJ

Test Datum: 30.11.2021

Patienten Code:

Patienten Name:

Geburtsdatum: TT.MM.JJJJ

Info:

Arzt Info:

Wählen Sie einen Arzt aus ...

Kennzeichen:

MOD: < Kein MOD >

Berichtsvorlage: Version 2 (ALEX2 only) - English (United Kingdom) (en-gb)

B: Analytisches Bild

Empfangen: 04.10.2021 16:23
ImageXplorer: 22124137

Analysis: 30.11.2021 11:00
Automatische QI: ☒ OK

C: Ergebnis-Ansicht

Name	Code	Biochemisch	Gewebe & Exposition	E/M	Funktion	kUA/L
Acarus siro	d70		Milben Inhalation	E	Aca s	< 0.10
Akazie	t19		Pollen Inhalation	E	Aca m	< 0.10
Alternaria alternata	m229	Alt a 1-Familie	Mikroorganismen & Pilzsporen Inhalation	M	Alt a 1	2.51

A: Felder für Patienten- und Probeninformationen

B: Analytisches Bild

C: Ergebnis-Ansicht



Zusätzlich werden Analysedatum, Seriennummer des ImageExplorer, QC und eventuell auch ein Fehlerprotokoll unterhalb des Analysebildes angezeigt.

Zusätzliche Proben- und Patienteninformationen können manuell hinzugefügt werden:

- Proben-Code
- Anforderungscode
- Datum der Probenahme
- Messungsdatum
- Patienten-Code
- Name des Patienten
- Geburtsdatum
- zusätzliche Informationen (Info)
- Name des überweisenden Arztes (Doctor Info) Tag
- MOD Panel

Die Einträge in „Info“ und „Arztinfo“ können so formatiert werden, dass sie fett, kursiv und/oder unterstrichen erscheinen. Dies geschieht wie folgt:

- _Info_ wird unterstrichen dargestellt
- *Info* wird *kursiv* dargestellt
- **Info** wird **fett** dargestellt



Details

Barcode: 02AEJ408

Proben Code:

Anforderungscode:

Datum der Probenahme:

Test Datum:

Patienten Code:

Patienten Name:

Geburtsdatum:

Info:

Arzt Info:

Wählen Sie einen Arzt aus ...

Kennzeichen:

MOD:

Berichtsvorlage: Version 2 (ALEX2 only) - English (United Kingdom) (en-gb)

Wenn Sie auf "Speichern" klicken, werden die eingegebenen Informationen gespeichert.

Der Array der Messung mit Raster wird im analytischen Bildbereich angezeigt. Die Software identifiziert automatisch die Position des Arrays in den Bilddaten anhand der Guide Dots. Mehr Informationen zu den Guide Dots finden Sie in den produktspezifischen IFUs.

Nach der Verarbeitung müssen die Guide Dots mit dem bloßen Auge gut sichtbar sein. Bitte überprüfen Sie auch ihre korrekte Ausrichtung. Wenn sie nicht sichtbar sind, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Distributor oder den MADX-Support. Falls die Guide Dots sichtbar sind, kann der Array weiter analysiert werden.

Während der Bildaufnahme wertet der RAPTOR SERVER das Signal aller Orientierungspunkte sowie das Hintergrundsignal der Membranoberfläche aus. Wenn alle Qualitätskriterien erfüllt sind, wird das Feld "automatische QC" unter dem Bild auf "OK" gesetzt.

Um den Einfluss von Artefakten bei der automatischen Bildanalyse auszuschließen (Satellitenflecken, Probenkontaminationen, Staub, verschmierte Flecken, ...), müssen die



Bilder vor der Freigabe der Ergebnisse von einem geschulten Benutzer überprüft werden, um falsche Ergebnisse auszuschließen. Bei Unstimmigkeiten zwischen dem verarbeiteten Array und dem vom RAPTOR SERVER aufgenommenen Bild wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Distributor oder den MADX-Support.



VII.1.8 BILDBEARBEITUNGSMODUS

Um in den Bildbearbeitungsmodus zu gelangen, klicken Sie auf das Bild.

Details

QR-Code: 82ARD081

Proben Code:

Anforderungscode:

Datum der Probenahme:

Test Datum: 28.04.2022

Patienten Code:

Patienten Name:

Geburtsdatum:

Info:

Arzt Info:

Wählen Sie einen Arzt aus ...

Kennzeichen:

MOD: < Kein MOD >

Berichtsvorlage: Version 2 (ALEX2 only) - Deutsch (de)

← Vorherige

Nächste →

Empfangen: 28.04.2022 09:16


Analyse: 28.04.2022 09:22


ImageXplorer: 23167844

Automatische QK: ☒ OK



Wenn die automatische Positionsbestimmung fehlschlägt, wird der Benutzer gewarnt und die Qualitätskontrolle der Messung (QC) auf FAIL gesetzt. In diesem Fall kann der Benutzer versuchen, den Array manuell zu positionieren, indem er das Raster durch Drücken von "R" zurücksetzt oder zu "Manuelle Analyse – Alles zurücksetzen" geht. Nach dem Zurücksetzen können Sie das gesamte Raster mit der Maus verschieben, indem Sie zusätzlich "Shift" drücken oder ein Häkchen bei "Gesamtes Raster bearbeiten" setzen. Beachten Sie, dass Sie das Raster nur innerhalb bestimmter Grenzen verschieben können.

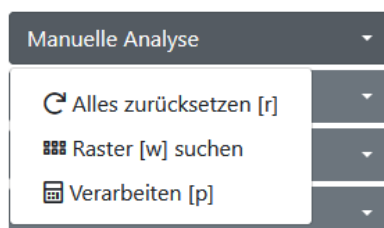


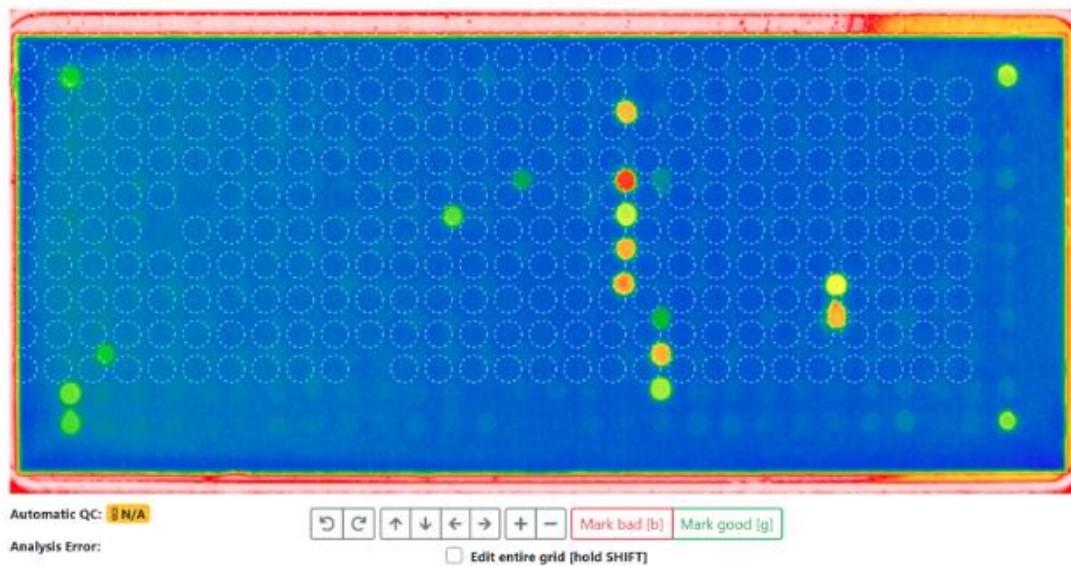

Drücken Sie "R" oder „Manuelle Analyse – Alles zurücksetzen“, dann können Sie den gesamten Raster verschieben.


Nachdem Sie das Raster ungefähr auf die richtige Position ausgerichtet haben (verwenden Sie zwei der Spots in der Ecke zur Ausrichtung), klicken Sie "Manuelle Analyse --> "Raster suchen" oder drücken Sie "W", um das Raster automatisch an die richtige Position zu schieben.

Wenn das Raster immer noch nicht korrekt ausgerichtet ist, verschieben Sie das Raster wiederholt manuell und verwenden Sie „Raster suchen“. Das Raster kann im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden in dem die Schaltflächen „A“ oder „B“, siehe Screenshot weiter oben, geklickt werden.

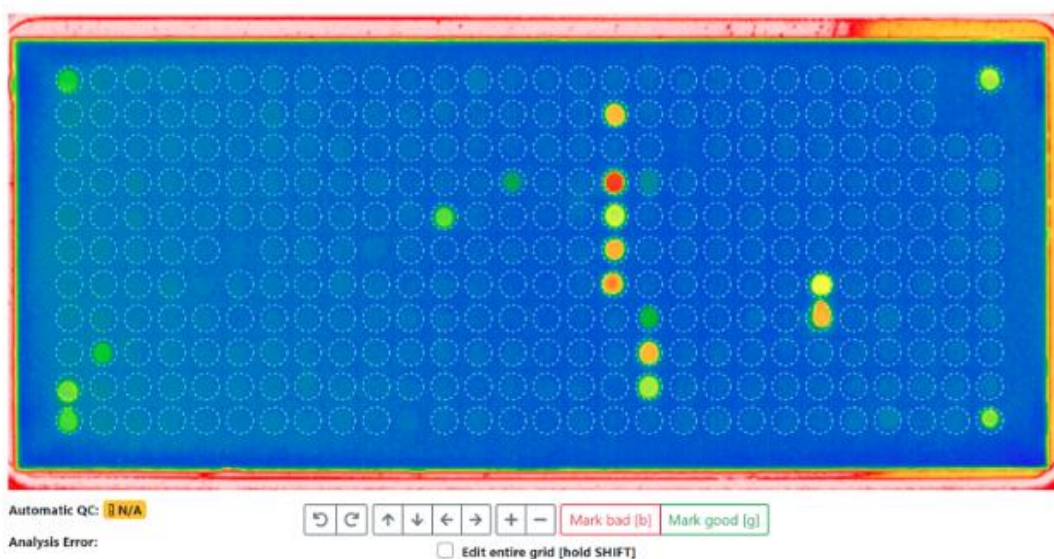




Finalisieren Sie die Suche und Analyse des Rasters durch Klicken von „P“ oder „Manuelle Analyse“ -> „Verarbeiten“.

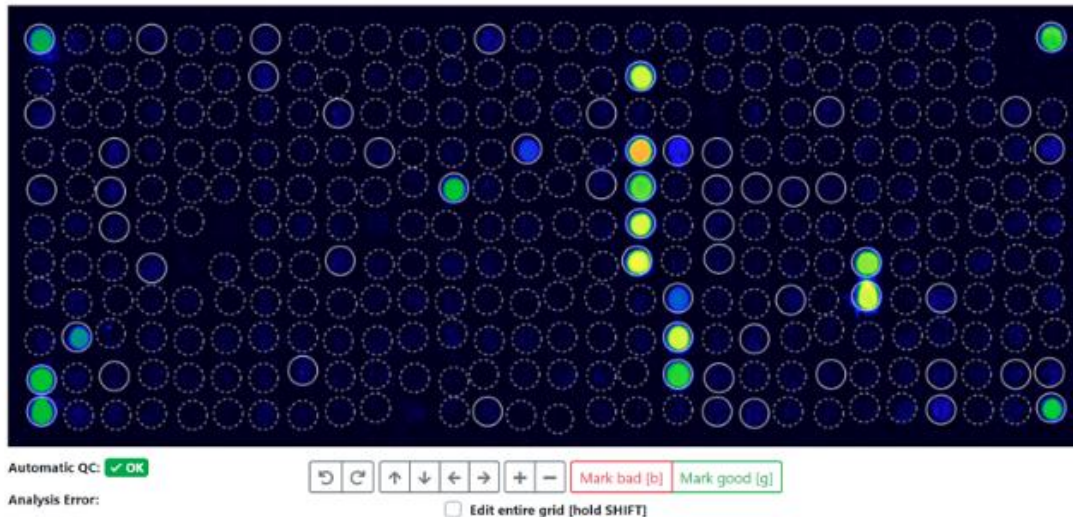

Drücken Sie "P" oder "Manuelle Analyse - Verarbeiten".

Alle verarbeiteten Messungen haben Informationen zur Bildanalyse unter "Analyse- und QK-Protokolle anzeigen"

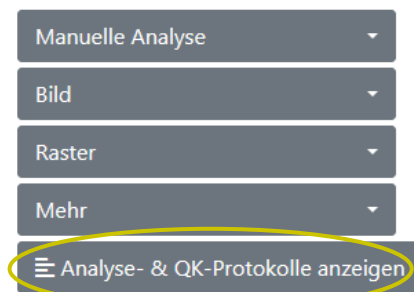

Alles zurücksetzen und neu verarbeiten

Dadurch werden alle Änderungen am Array verworfen und der komplette Analyseprozess wird mit den ursprünglichen Bilddaten neu gestartet. Bitte beachten Sie, dass alle manuellen Änderungen unwiderruflich verloren gehen.

Zurück zur Messung

Wenn diese Schaltfläche gedrückt wird, öffnet sich ein Bereich mit der Erläuterung über den Bildhintergrund, die QK-Werte sowie die angewandten Referenzwerte. Dies ist besonders



nützlich, wenn Sie herausfinden möchten, warum eine Messung die Qualitätskontrolle nicht bestanden hat. Wenn eine Qualitätskontrolle fehlschlägt, wird das entsprechende MAX-Laufprotokoll (Run Log) zur einfacheren Fehlerbehebung direkt aus dem QK-Protokoll der Messung verlinkt. Damit die Qualitätskontrolle OK ist, muss der Hintergrund innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen und alle Orientierungspunkte müssen einen bestimmten Wert erreichen. Wenn diese QC-Kriterien nach der manuellen Anpassung der Spots auf dem Bild immer noch nicht erfüllt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Distributor oder MADx Support.

Analysis Log

```
'PreProcessedPixels' took 128ms.
Using definition '02_ALEXII_IVD_v1.6.0'.
'ApplyArrayDefinition' took 74ms.
Parsing calibration string ...
'ApplyDefinitions' took 75ms.
'FindGrid' took 1ms.
'AlignFeatures' took 862ms.
'CropImage' took 1ms.
'QuantifyFeatures' took 231ms.
'SubtractBackground' took 601ms.
Parsing calibration string ...
Using calibrators from QR-Code.
Total IgG (tIgG) normalized by calculating  $8,330999755859375E-07x^4 + 0,05697999954223633x - 30,69269921875$ 
( $x=8515$ ), which results in 515.
'ReQuantify' took 57ms.
```

QC Log

These are the values used for QC (ALEX v2): Curve Correction=0,9997370867894242, tIgE=8515, GD1=28085 (SNR=105.38), GD2=29369 (SNR=185.28), GD3=28569 (SNR=147.53), GD4=28305 (SNR=128.1).
Reference values are as follows: Guide Dots must have a value above 5000; each Guide Dot spot must exist and be unique; Guide Dot spot must not be set to bad. Average background must be between 4000 and 16000.
QC (ALEX v2) succeeded.


Background Log

Calculated background statistics for 164 pixels (from a total of 182, skipped smallest 9, and highest 9 pixels). The average is 9.419, the minimum 7973 and the maximum 11792 (minimum and maximum is calculated including skipped pixels). This results in an average difference of 628, which is an SD of 49,17 and a CV of 0,52%.
For comparison, there is an overall total of 282944 pixels. The overall average is 14.871, the minimum 6.012 and the maximum 64.965.




VII.1.8.1 BILDANALYSE

Das analytische Bild des ausgewählten Arrays wird in einem Falschfarbencode angezeigt, um eine klare Visualisierung zu ermöglichen. Die Falschfarbenintensität kann in drei Stufen eingestellt werden. Gehen Sie auf "Bild" und wählen Sie eine der 3 Stufen (niedrige Farbkorrektur, mittlere Farbkorrektur oder hohe Farbkorrektur).

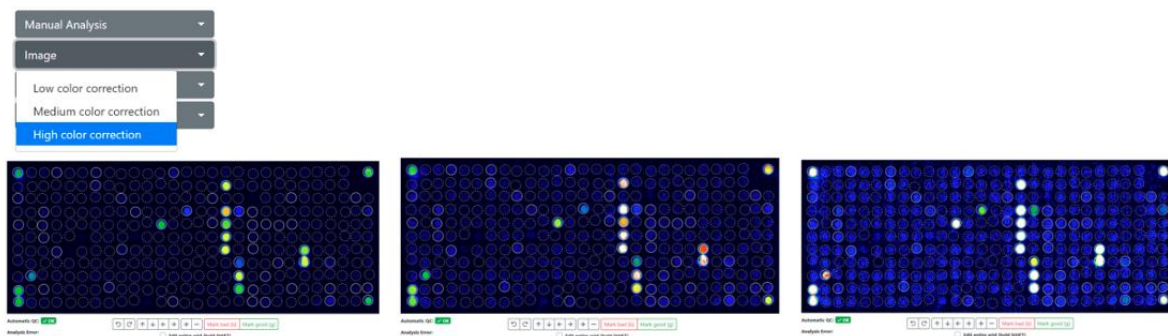

Bilder oben von links nach rechts: Hohe Farbkorrektur (Standard) - Mittlere Farbkorrektur - Niedrige Farbkorrektur. Durch Klicken innerhalb eines Spots werden Name, x- und y-Koordinaten des Bildes, Roh- und Ergebniswert des Spots und das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) angezeigt.

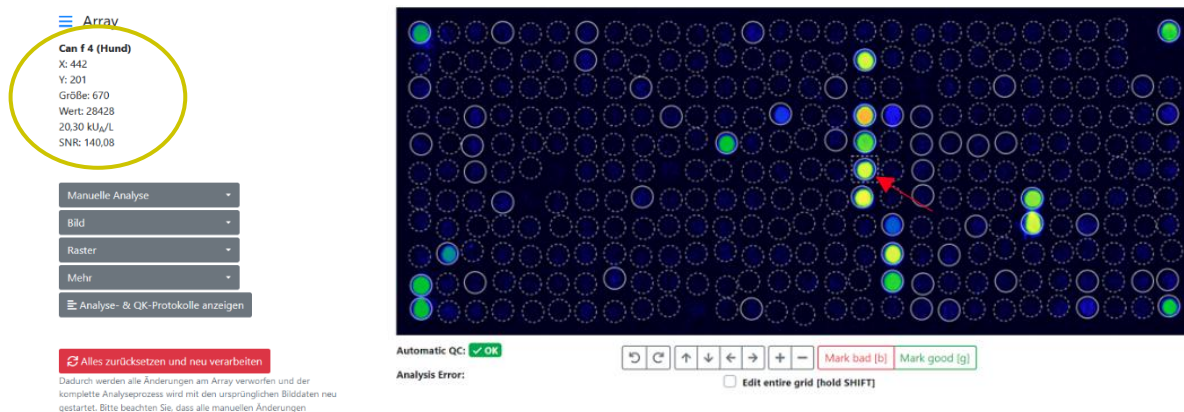

Jedes Allergen ist von einem Kreis umgeben. Die grafische Darstellung des Kreises stellt die automatische Interpretation durch die Software bzw. die Modifikation durch den Benutzer dar:

1. Kreis mit gepunkteter Linie: noch nicht analysiert oder unter dem Cut-off
2. Kreis mit einer durchgehenden dünnen Linie: positiver Spot, automatisch gefunden
3. Kreis mit durchgehender dicker Linie: Spot vom Benutzer auf gut gesetzt
4. Kreis mit einer durchgezogenen dünnen Linie und einem X in der Mitte: vom Benutzer auf schlecht gesetzter Spot




5. Kreis mit einer dicken orangefarbenen Linie: Vom Benutzer zu untersuchender Spot mit schlechtem Signal-Rausch-Verhältnis, aber einem quantitativen Ergebnis oberhalb der Systemgrenze. Diese Spots sollten vom Benutzer auf "gut" oder "schlecht" gesetzt werden.
6. Research Use Only Spots (RUO) sind mit einem "R" innerhalb des Kreises gekennzeichnet und werden nicht im PDF-Bericht angezeigt, sondern in die CSV-, EXCEL- oder ASTM-Datei exportiert. Die RUO-Spots können durch Änderungen in den persönlichen Einstellungen angezeigt werden.



Die Spots können vom Benutzer bearbeitet werden:

- Ein einzelner Spot wird durch Klicken auf einen Spot ausgewählt.
- Wenn Sie gleichzeitig "SHIFT" drücken oder "edit entire grid" wählen, werden alle Spots ausgewählt.
- Mehrere einzelne Spots können durch halten der Taste "CTRL" oder durch Auswahl von "edit multiple features" ausgewählt werden.
- Ausgewählte Spots können mit den Pfeiltasten (links, rechts, oben, unten) oder mit der Maus verschoben werden.
- Ausgewählte Spots können durch Drücken von "G" auf Gut gesetzt werden
- Ausgewählte Spots können durch Drücken von "B" auf "Schlecht" gesetzt werden.
- Durch Klicken auf "H" kann der Raster aus- und wieder eingeblendet werden.
- Durch Klicken auf "N" werden alle Spots mit Anmerkungen versehen, und der Kurzname jedes Allergens wird angezeigt. Dies kann durch erneutes Klicken auf "N" rückgängig gemacht werden.

Die letzten beiden Funktionen können auch durch Auswahl von "Raster" --> "Raster anzeigen" oder „Raster ausblenden“ und "Name anzeigen oder ausblenden“ verwendet werden.

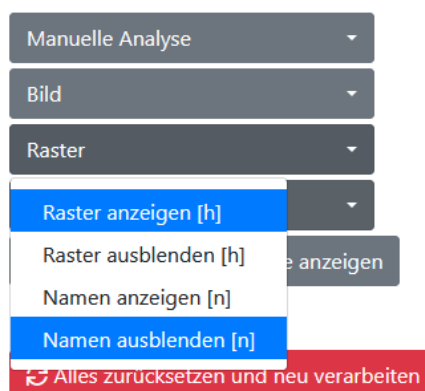



VII.1.8.2 ZUSAMMENFASSUNG VON SHORTCUTS

Short Cut	Ausführung
R	Analyse zurücksetzen
W	Raster finden
P	Prozessieren
G	Merkmal auf GUT setzen
B	Merkmal auf SCHLECHT setzen
N	Allergenmerkmale kommentieren
H	Raster ausblenden/einblenden
SHIFT	Alle Messungen auswählen

Orange markierte Spots müssen überprüft und vom Benutzer auf Gut oder Schlecht gesetzt werden. Andernfalls werden sie im Bericht durch ein orangefarbenes Dreieck mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet. Wenn der Spot auf "gut" oder "schlecht" gesetzt wurde, wird dies nicht angezeigt.

Milk				
Cow, milk	Bos d 4	M	α -Lactalbumin	0,38
Cow, milk	Bos d 5	M	β -Lactoglobulin	0,90
Cow, milk	Bos d 8	M	Casein	6,04
Cow, milk	Bos d_milk	E		3,40

Es ist auch möglich, ein Bild des QR-Codes, ein Bild des unverarbeiteten oder des verarbeiteten Arrays zu öffnen. Gehen Sie dazu auf "Mehr" und wählen Sie das gewünschte Bild aus. Ein kompletter Reset ist auch möglich, indem Sie den Knopf "Alles zurücksetzen und neu verarbeiten" drücken.



Änderungen übernehmen [ctrl+s]

Manuelle Analyse

Bild

Raster

Mehr

Analyse- & QK-Protokolle anzeigen

Alles zurücksetzen und neu verarbeiten

Dadurch werden alle Änderungen am Array verworfen und der komplette Analyseprozess wird mit den ursprünglichen Bilddaten neu gestartet. Bitte beachten Sie, dass alle manuellen Änderungen unwiderruflich verloren gehen.

Zurück zur Messung

Wenn der Benutzer die Position oder die Interpretation des Spots oder des gesamten Rasters ändert, werden die Analysedaten gelöscht und die QC auf NA gesetzt. Drücken Sie nach der Analyse auf "Änderungen übernehmen", um die Änderungen zu speichern.

Änderungen übernehmen [ctrl+s]

Manuelle Analyse

Bild

Raster


Mehr

Analyse- & QK-Protokolle anzeigen

Alles zurücksetzen und neu verarbeiten

Dadurch werden alle Änderungen am Array verworfen und der komplette Analyseprozess wird mit den ursprünglichen Bilddaten neu gestartet. Bitte beachten Sie, dass alle manuellen Änderungen unwiderruflich verloren gehen.

Zurück zur Messung

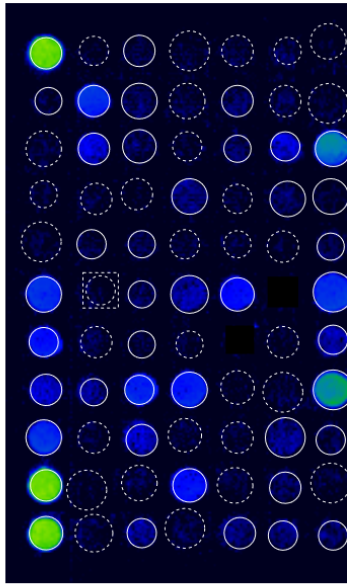

QR-Code: 02ARD001


Probencode:

Automatische QK: ✓ OK

Um zur Detailseite der Messung zurückzukehren, drücken Sie "Zurück zur Messung". Sie können auch auf „Vorherige/Nächste“ klicken, um zur Bearbeitungsseite des folgenden Bildes zu gelangen. Wenn auf der Übersichtsseite ein Filter z.B. für ein bestimmtes Produkt (z.B. ALEX²) gesetzt wurde, werden bei der Navigation durch die Messungen über die Schaltflächen



„Vorherige“ und „Nächste“ nur die Messungen angezeigt, die den bereits in der Liste angewendeten Filterkriterien entsprechen.

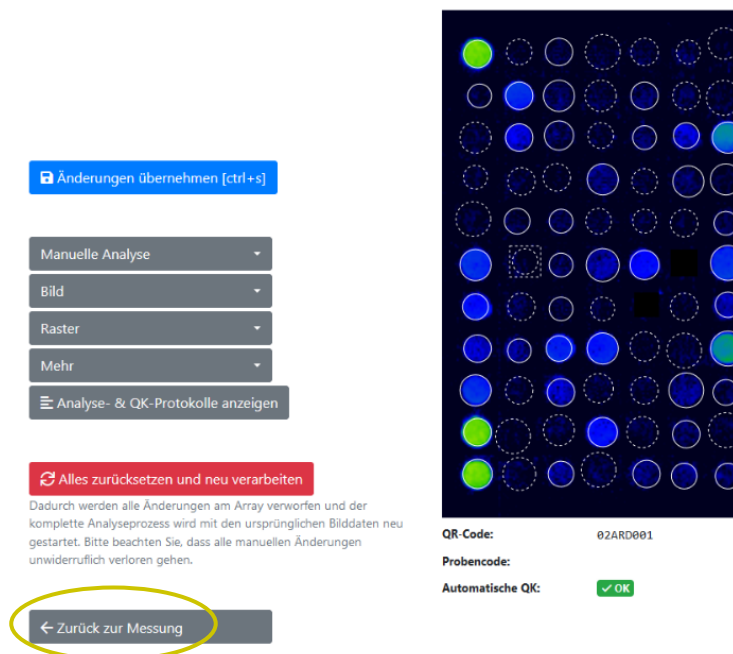

VII.1.8.3 ANALYTISCHE ERGEBNISSE

In der detaillierten Ergebnisliste werden unterhalb der Patienteninformation und des Analysebildes die Ergebnisse der ausgewählten Messung angezeigt. Das Analyseergebnis zeigt eine Liste mit den folgenden Informationen an:


- Name und Art des Allergens
- Allergen-Code
- Biochemische Funktion
- Gewebe und Expositionsweg
- Allergenextrakt oder molekulares Allergen
- Name des Merkmals
- IgE Wert ausgedrückt als kU_A/l (farbkodiert)
- IgG Wert ausgedrückt als µg/ml (farbkodiert)




Alle Allergene

1½ Name	Code	Biochemisch	Gewebe & Exposition	E/M	Funktion	kUA/L
Acarus siro <i>Acarus siro</i>	d70		Milben Inhalation	E	Aca s	0.40
Akazie <i>Acacia mimosa</i>	t19		Pollen Inhalation	E	Aca m	< 0.10
Alternaria alternata <i>Alternaria alternata</i>	m229	Alt a 1-Familie	Mikroorganismen & Pilzsporen Inhalation	M	Alt a 1	12.70
Alternaria alternata <i>Alternaria alternata</i>	m230	Enolase	Mikroorganismen & Pilzsporen Inhalation	M	Alt a 6	< 0.10
Amarant <i>Amaranthus retroflexus</i>	w14		Pollen Inhalation	E	Ama r	< 0.10
Amerikanische Hausstaubmilbe <i>Dermatophagoides farinae</i>	d100	Zystein Protease	Milben Inhalation	M	Der f 1	2.94
Amerikanische Hausstaubmilbe <i>Dermatophagoides farinae</i>	d101	NPC2 Familie	Milben Inhalation	M	Der f 2	7.95

Durch Anklicken des Dropdown-Menüs "Alle Allergene/Nur positive Allergene" können die Informationen ausgewählt werden, die im Fenster mit den Analysenergebnissen angezeigt werden sollen. Dies ist unabhängig von den Ergebnissen, die im PDF-Bericht angezeigt werden.

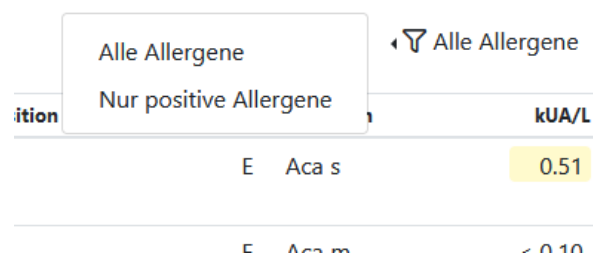


Wenn Sie auf den Namen eines oder mehrerer Allergene in der Liste der Allergenergebnisse klicken, werden die entsprechenden Punkte auf dem Array-Bild durch einen roten rechteckigen Kasten hervorgehoben.

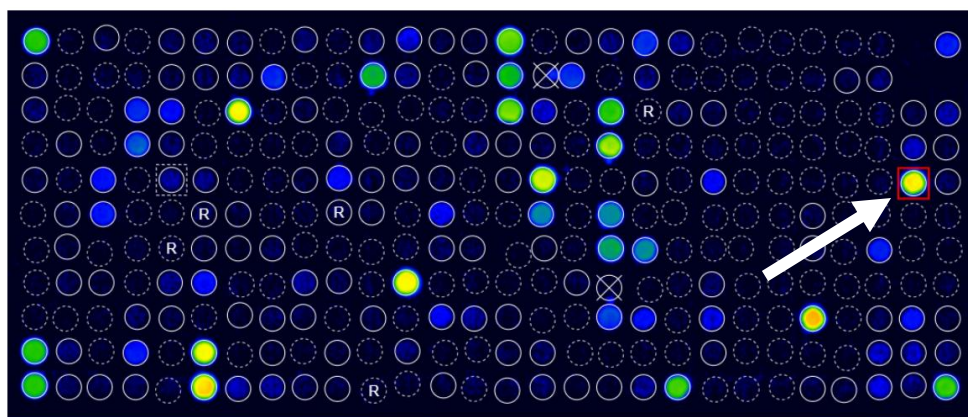



VII.1.9 ÜBERSICHT DER MESSUNGEN

Neue und nicht genehmigte Messungen können in der Übersicht "Neue Messungen" angezeigt werden. Mit Hilfe eines kleinen Dropdown-Menü am unteren Ende der Seite kann die Anzahl der angezeigten Messungen eingestellt werden (25, 50, 100 oder 250 Messungen).

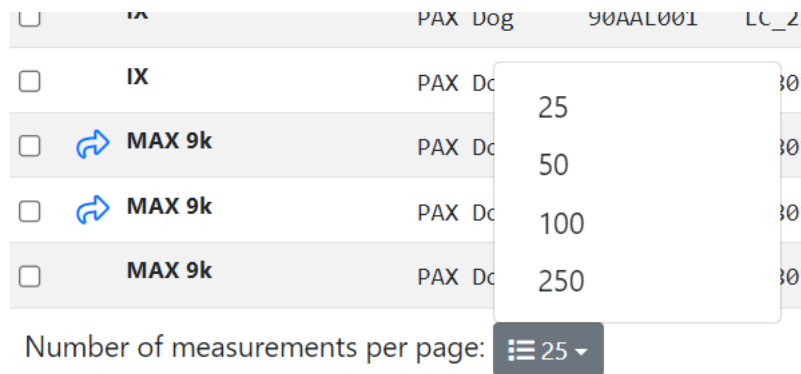

Die Übersicht zeigt außerdem die folgenden Informationen an:

- Quelle der Messung
- QC-Status
- Tags
- Produkttyp
- QR-Code
- Probencode
- Patientencode
- Patientenname
- Analysedatum

Neue Messungen

Suche nach QR-Code, Patient, Probe, Kennzeichen, Analysedatum, Freigabedatum ...									
☐	Quelle	QK	Kennzeichen	Produkttyp	QR-Code	Probencode	Patientencode	Name des Patienten	Analyse Datum
☐	IX	✓ OK		ALEX2	02ALM002	Sample Code	Patienten Code	Patienten Name	23.11.2021 09:47
☐	⚠ IX	✓ OK		ALEX2	02ALM001				24.09.2021 10:48
☐	⚠ IX	✓ OK		ALEX2	02ALM001				23.09.2021 15:16
☐	IX	✓ OK		ALEX2	02ALI012				15.09.2021 14:13
☐	⚠ IX	✓ OK		ALEX2	02ALI010				15.09.2021 14:10

Durch Klicken auf den QR-Code oder das Analysedatum gelangen Sie zum Detailbereich der Messung. Patienteninformationen, Probencode und Tags können auch auf der Übersichtsseite eingegeben werden. Klicken Sie dazu einfach in das entsprechende Feld der Messung und fügen Sie es ein. Mit der Taste "Tab" wird automatisch das nächste Feld aufgerufen und Ihre Eingabe gespeichert.



Neue Messungen

Suche nach QR-Code, Patient, Probe, Kennzeichen, Analysedatum, Freigabedatum ...									
☐	Quelle	QK	Kennzeichen	Produkttyp	QR-Code	Probencode	Patientencode	Name des Patienten	Analyse Datum
☐	IX	✓ OK		ALEX2	02ALM002	Sample Code	Patienten Code	Patienten Name	23.11.2021 09:47
☐	IX	✓ OK		ALEX2	02ALM001				24.09.2021 10:48

Tags können zu mehreren Messungen gleichzeitig hinzugefügt und gelöscht werden in dem die Option „Kennzeichen bearbeiten“ im Dropdown -Menü ausgewählt wird.

Neue Messungen

Suche nach QR-Code, Patient, Probe, Kennzeichen, Analyse

Ausgewählte Messungen

☐	Quelle	QK	Kennzeichen
☒	IX	✓ OK	
☒	IX	✓ OK	
☐	IX	✓ OK	
☒	IX	✓ OK	

Ausgewählte Messungen

CSV Format herunterladen

Excel Format herunterladen

Freigeben

Interpretation aktualisieren

Berichtsvorlage wählen

Kennzeichen bearbeiten

>> Verschieben

Löschen

Um mehrere Messungen gleichzeitig erneut zu verarbeiten, müssen die gewünschten Messungen ausgewählt werden. Über das Dropdown „Erneut verarbeiten“ erfolgt die gemeinsame Verarbeitung.

Neue Messungen

Suche nach QR-Code, Patient,

Ausgewählte Messungen

CSV Format herunterladen

Excel Format herunterladen

Freigeben

Interpretation aktualisieren

Berichtsvorlage wählen

Kennzeichen bearbeiten

Erneut verarbeiten

>> Verschieben

Löschen

Messungen nachbearbeiten

Sie sind dabei, die folgenden Messungen neu zu verarbeiten beachten Sie, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht

QR-Code	Probencode
02APK3C8	Dummy8
02APK258	Dummy1
02APK07F	Dummy13

Diese Messungen nachbearbeiten

Abbrechen



Im Suchfeld können Messungen nach Tag, Produkttyp, QR-Code, Probencode, Patientencode oder Patientenname gesucht werden.

Neue Messungen

Es ist möglich, den QR-Code und die Messdaten in der Datenablage zu duplizieren, wenn die Kassette mehrmals erfasst wird. Dies wird jedoch während der Messung durch ein Dreieck mit einem Ausrufezeichen angezeigt.

☐	 IX	✓ OK	PEX	90AAB05F
☐	 IX	✓ OK	FOX	80AB0010
☐	 IX	✓ OK	FOX	80AB0010
☐	 IX	✓ OK	PEX	90AAE024

VII.1.10 GENEHMIGUNG UND EXPORTIEREN VON MESSUNGEN

Nach Analyse und sorgfältiger Überprüfung der Ergebnisse können die Messungen auf zwei Arten genehmigt werden. Bevor eine Messung genehmigt werden kann, sollte darauf geachtet werden auch unklare Spots entweder auf „good“ oder „bad“ zu setzen, siehe auch VII.1.8.1:

1. Eine oder mehrere Messungen können durch Ankreuzen ausgewählt und dann im Dropdown-Menü gebündelt genehmigt werden:

Neue Messungen

✓ Ausgewählte Messungen

☐	Quelle	QK	Kennzeichen	Produkttyp	QR-Code
☒	IX	✓ OK		ALEX2	02ALM002
☒	 IX	✓ OK		ALEX2	02ALM001
☒	 IX	✓ OK		ALEX2	02ALM001

✓ Ausgewählte Messungen

-  CSV Format herunterladen
-  Excel Format herunterladen
-  Freigeben
-  Interpretation aktualisieren
-  Berichtsvorlage wählen
-  Erneut verarbeiten
-  » Verschieben
-  Löschen

Nicht genehmigte Messungen können auch als CSV oder EXCEL heruntergeladen werden.



2. Eine Messung kann auch auf der Detailseite der Messung genehmigt werden. Klicken Sie einfach auf "Speichern und freigeben".

☰ Details

QR-Code: 02ALM002

Proben Code:

Anforderungscode:

Datum der Probenahme:

Test Datum:

Patienten Code:

Patienten Name:

Geburtsdatum:

Info:

Arzt Info:

Wählen Sie einen Arzt aus ...

Kennzeichen:

MOD:

Berichtsvorlage: Version 2 (ALEX2 only) - Deutsch (de)

Wenn die QC einer Messung "OK" ist, wird die Messung einfach auf die Registerkarte "Freigegebene Messungen" verschoben. Wenn die QC einer Messung fehlgeschlagen ("Failed") ist, erhält der Benutzer eine Benachrichtigung, "Measurement QC is not OK". Darüber hinaus wird auf dem Bericht auch angegeben, dass die interne QC (Plausibilitätsprüfung für Orientierungspunkte und Hintergrundsignal) nicht erfolgreich war.

Messungen freigeben

Sie sind dabei, die folgenden Messungen freizugeben.

QR-Code	Probencode	Analysedatum
02ALM002	Sample Code	23.11.2021 09:47

☒ Diese Messungen freigeben

Genehmigte Messungen werden in der Registerkarte "Freigegebene Messungen" gespeichert. Auch hier kann die Anzahl der angezeigten Messungen angepasst und am Ende der Seite zwischen 25, 50, 100 und 250 Messungen gewählt werden. Es können keine Patienteninformationen geändert oder hinzugefügt werden. Die Details/Ergebnisse einer Messung können durch Klicken auf eine Messung angezeigt werden. Die Merkmale des Bildes können ebenfalls angezeigt werden, lassen sich aber nicht mehr abändern.



Bestimmte Angaben (z. B. der Name des Patienten) können weiterhin aktualisiert werden, sofern der Benutzer über die Berechtigung „Edit measurements“ verfügt.

Freigegebene Messungen

Suche nach QR-Code, Patient, Probe, Kennzeichen, Analysedatum ...										
☐	Quelle	Kennzeichen	Produkttyp	QR-Code	Probencode	Patientencode	Patientenname	Geburtsdatum	Analysedatum	Freigabedatum
☐	IX		FOX	88AAH848	Ton1	Stark	Avengers	11.10.1988	01.07.2021 15:10	01.07.2021 15:12
☐	IX		ALEX2	02A15310	klanda	Vision	Avengers	07.05.1983	01.07.2021 15:06	01.07.2021 15:12
☐	IX		FOX	88AAH848	Ton1	Stark	Avengers	11.10.1988	01.07.2021 15:01	01.07.2021 15:12

Die Ergebnisse ausgewählter Messungen der genehmigten Messungen können als PDF-Bericht, als EXCEL-, CSV- oder ASTM-Datei heruntergeladen werden. Werte unter 0.1 kU_A werden als < 0.1 und Werte über 50 kU_A als >50 anstelle des absoluten Wertes angezeigt.

Freigegebene Messungen

Suche nach QR-Code, Patient, Probe, Kennzeichen, Analysedatum ...

Ausgewählte Messungen herunterladen

☐	Quelle	Kennzeichen	Produkttyp	QR-Code
☒	IX		FOX	80AAH848
☒	IX		ALEX2	02A15310
☒	IX		FOX	80AAH848

Ausgewählte Messungen herunterladen

- Bericht (PDF Format)
- CSV Format
- Excel Format
- ASTM Format
- Interpretation aktualisieren
- Berichtsvorlage wählen
- Teilen
- Verschieben
- Freigabe zurücksetzen

Wenn eine größere Datenmenge exportiert werden soll, z.B. mehrere PDF-Berichte, wird in einem separaten Fenster ein Download-Link für den Export generiert. Der Exportvorgang läuft dann im Hintergrund ab und kann durch Anklicken des Menüs in der oberen rechten Ecke angezeigt werden. Ein fertiger Export kann durch Anklicken von "Download" heruntergeladen werden.

Exportiert

Bestimmte Arten von Datenexporten (z. B. der Export vieler PDF-Berichte auf einmal) benötigen einige Minuten, um für den Download vorbereitet zu werden. Hier können Sie Ihre gewünschten Exporte überwachen und herunterladen. Bitte beachten Sie, dass Sie weiterarbeiten können, alle Exporte werden im Hintergrund durchgeführt und Sie können sie hier herunterladen, sobald sie abgeschlossen sind.

Exportieren angefordert	# der Messungen enthalten	Export abgeschlossen
06.07.2022 08:52	3	0 / 3



Um einen Export mehrerer Messungen zu initiieren, können Sie auf "Exporte" und dann auf "Export Multiple Measurements" klicken.

The screenshot shows the MADx Tenant interface. On the left, a sidebar menu has 'Exporte' highlighted with a yellow circle. The main area is titled 'Exportiert' and contains a description: 'Bestimmte Arten von Datenexporten (z. B. der Export vieler PD Sie Ihre gewünschten Exporte überwachen und herunterladen. können sie hier herunterladen, sobald sie abgeschlossen sind.' Below this, a blue button labeled 'Mehrere Messungen exportieren' is also highlighted with a yellow circle. At the bottom, a table shows export requests.

Exportieren angefordert	# der Messung
06.07.2022 08:52	3

Nach Auswahl der entsprechenden Filter und Anklicken von "Search Measurements" wird die Anzahl der gefundenen Messungen angezeigt. Nach einem Klick auf "Export starten" wird der Benutzer zurück zur Seite "Exporte" geleitet und sieht den angeforderten Export zum Herunterladen. Wenn der Benutzer die Filter ändern möchte, kann er auf die Schaltfläche "Zurück" klicken; RAPTOR SERVER speichert die zuvor eingestellten Filter.

Export multiple measurements

Please note that **Report PDF** and **ASTM** export is only a

QR-Code/Product/Batch Sa

02ABC

Analysis Date (from) Analysis Date (to)

TT . MM . JJJJ TT . MM . JJJJ

Tag Status

All

☐ Export CSV ☐ Export Excel

🔍 Search Measurements ✕ Cancel



Export multiple measurements

Please note that **Report PDF** and **ASTM** export is only

QR-Code/Product/Batch

02aaa

Analysis Date (from)

TT . MM . JJJJ

Analysis Date (to)

TT . MM . JJJJ

Tag

Status

All

☐ Export CSV

☐ Export Excel

 Start export ...


← Back

66 Measurements found that match your criteria



VII.2 BERICHT

Berichte können angepasst werden, indem Sie auf „Tenantadministrator“ → „Manage report templates“ und dann auf „Add new report template“ klicken.

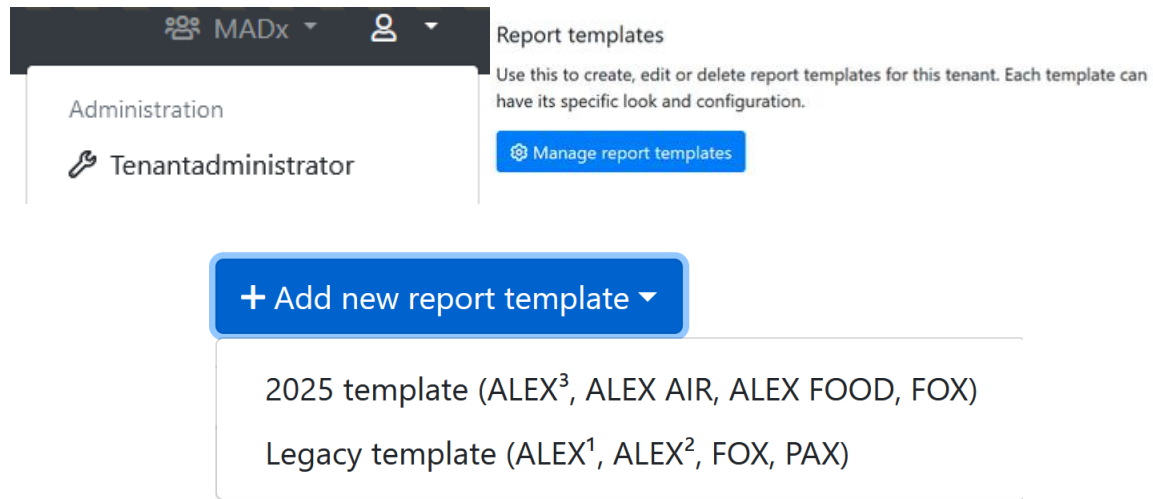

Es gibt zwei Arten von Vorlagen: die Legacy-Vorlage (Legacy template) für Produkte wie ALEX, ALEX² und FOX und die 2025-Vorlage (2025 template) für die neueren Produkte wie ALEX³, ALEX Air, ALEX Food und auch FOX.

VII.2.1 ERSTELLEN EINES BENUTZERDEFINIERTEN REPORT TEMPLATES (2025 TEMPLATE)

Der Report Template Konfigurator besteht aus sechs Karten, die zur Anpassung eines Report Templates verwendet werden können: Allgemeine Konfiguration, Kopfzeilenlayout, Inhalt, PDF-Dateiname, Branding und Signaturen.

VII.2.1.1 ALLGEMEINE KONFIGURATION FÜR BENUTZERDEFINIERTER REPORT TEMPLATES (2025 TEMPLATE)

In der Karte „General configuration“ können die folgenden Einstellungen gewählt werden:

- Name der Berichtsvorlage
- Standardsprache (die Sprache kann für jeden Bericht einzeln geändert werden)
- Unterstützte Produkte
- PDF-Größe



VII.2.1.2 HEADER LAYOUT FÜR BENUTZERDEFINIERTER REPORT TEMPLATES (2025 TEMPLATE)

In der Karte „Header layout“ kann der Inhalt und die Reihenfolge der Kopfzeile konfiguriert werden. Die folgenden Informationen können über Dropdowns hinzugefügt werden:

- Empty
- Sample Date
- Assay Date
- Analysis Date
- Approval Date
- Print Date
- Patient Code
- Sample Code
- Patient Name
- Date of Birth
- QR-Code
- Allergens/Antigens
- Test method
- Doctor information
- Quality Control Text
- Additional Info Text
- Requisition Code
- Approved By
- Tested By
- Device Information

Wenn die Dropdown-Liste auf „None“ steht, wird an dieser Position kein Text angezeigt.

VII.2.1.3 CONTENT FÜR BENUTZERDEFINIERTER REPORT TEMPLATES (2025 TEMPLATE)

In der Karte „Content“ können die folgenden Einstellungen ausgewählt werden:

- Ergebnisfilter #1 bis #3: es kann festgelegt werden, welche Allergene im Bericht angezeigt werden (nur positive Ergebnisse, nur negative Ergebnisse, positive und negative Ergebnisse innerhalb der Grenzen, alle Ergebnisse, Versteckt) und die Abschnitte je nach Bedarf angeordnet und sortiert werden. Zum Beispiel: konfigurieren einen Abschnitt für „Nur positive Ergebnisse“, gefolgt von einem Abschnitt für „Nur negative Ergebnisse“.
- Sortierung der Allergene: die Allergendetails im Bericht (in einer Allergengruppe) können auf drei verschiedene Arten sortiert werden:
 - Alphabetische Reihenfolge nach Allergencodes
 - Absteigend vom höchsten zum niedrigsten Wert
 - Alphabetisch sortiert nach Allergennamen (Common Name)



- QR-Code für Patientenportal: Für den Zugriff auf das Patientenportal kann ein QR-Code auf den Bericht gedruckt werden:
 - Keiner
 - Oben und Unten
 - Oben
 - Unten
- Das gesamt-IgE kann mit drei Optionen einbezogen werden:
 - Keine
 - Oben
 - Unten
- Interpretation einbeziehen (RAVEN)
Siehe entsprechendes Kapitel. Hier kann ausgewählt werden, ob eine Interpretation automatisch in den Bericht aufgenommen werden soll, nur auf Anfrage oder gar nicht.
- Kreuzreaktionsinformationen:
 - Nicht inkludieren
 - Text inkludieren
 - Text und positive Allergene inkludieren
 - Text und alle Allergene inkludieren

Wenn "include cross-reactive information" gewählt wird, werden am Ende des Berichts erläuternde Sätze hinzugefügt, die die Allergenfamilien beschreiben, die auf der ersten Seite positiv sind. (siehe „include cross-reactive information“).

VII.2.1.4 PDF DATEINAME FÜR BENUTZERDEFINIERTER REPORT TEMPLATES (2025 TEMPLATE)

In der Karte „PDF file name“ können folgende Einstellungen für den Dateinamen gewählt werden:

- QR-Code der Messung anführen
- Patientencode anführen
- Patientename anführen
- Probencode anführen
- Datum und Uhrzeit anführen

Es kann auch eine manuelle Benennung definiert werden, in diesem Fall werden alle anderen Einstellungen ignoriert.



VII.2.1.5 BRANDING FÜR BENUTZERDEFINIERTER REPORT TEMPLATES (2025 TEMPLATE)

In der Karte „Branding“ können die folgenden Einstellungen gewählt werden:

- Benutzerdefinierte Farbe: die Farben der Kopfzeile können über die gesamte Farbpalette angepasst werden
- Logos: Zusätzlich zu den Logos auf beiden Seiten der Kopfzeile der Titelseite kann ein Miniaturlogo in die Kopfzeile aller Seiten eingefügt werden. Standardmäßig ist dies eine Miniaturausgabe des Logo der linken Kopfzeile.

VII.2.1.6 SIGNATURES FÜR BENUTZERDEFINIERTER REPORT TEMPLATES (2025 TEMPLATE)

In der Karte „Signatures“ können bis zu 3 Bilder in Form von Unterschriften in die Berichtsvorlage eingefügt werden.

Nach der Änderung kann die Berichtsvorlage durch Klicken auf die Schaltfläche „Save“ gespeichert werden.

Eine Berichtsvorlage kann mit der Schaltfläche „Duplicate“ unten auf der Seite dupliziert werden. Die aktuelle Berichtsvorlage wird dupliziert und das Duplikat wird automatisch geladen, was am Namen der Berichtsvorlage zu erkennen ist.

Edit report template

Your changes have been saved successfully.

General configuration

Name:

FOX new - Duplicate

Supported products:

FOX (2025)

Default language:

English (en)

PDF size:


A4



VII.2.2 ERSTELLEN EINES BENUTZERDEFINIERTEN REPORT TEMPLATES (LEGACY TEMPLATE)

Der Report Template Konfigurator für legacy templates besteht aus vier Tabs, die zur Individualisierung eines Report Templates verwendet werden können: General, Design, Header und Content.

Add a new report template

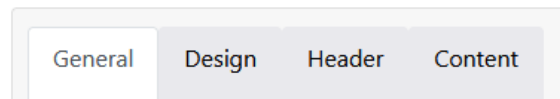

VII.2.2.1 GENERAL SETTINGS IN DEM REPORT TEMPLATE KONFIGURATOR (LEGACY TEMPLATE)

Die folgenden Einstellungen können in dem Tab „General“ ausgewählt werden:

- Name des Report Templates
- Berichtsvorlage
- Bevorzugte Sprache (Sie können die Sprache immer noch für jeden Bericht einzeln ändern.)

Configure report template "New report template"

The dialog box shows the 'General' tab with the following settings:

- Name:** New report template. This is the name of the template which shows up in the dropdown list while generating a report.
- Base Template:** Version 2 (ALEX2 only). A base template which specifies basic functionality must be chosen.
- Preferred language:** English (United States) (en-us). A default language can be specified which will be used if there isn't yet a language stored to a measurement's report.

- Name der PDF-Exportdatei:
 - Einstellungstyp: Automatisch --> wählen Sie aus den folgenden Optionen:
 - Patientencode
 - Patientenname
 - Probencode
 - QR-Code der Messung
 - Datum und Uhrzeit



- Einstellungstyp: Manuell --> wählen Sie die Optionen so, wie Sie es bevorzugen
Beispiel: Report_{PatientID}_{DateAndTime}
- Footer: Text kann zu den Fußnoten aller Seiten hinzugefügt werden

PDF naming

Setting Type: Manual

The filename of the report PDF can be customized. Either built automatically based on your selection below or manually adjusted in the order of your needs.

Name Pattern: Report_{PatientId}_{MeasurementQrCode}

Available Elements: {PatientId} ; {PatientName} ; {SampleId} ; {MeasurementQrCode} ; {DateAndTime}

PDF naming

Setting Type: Automatic

The filename of the report PDF can be customized. Either built automatically based on your selection below or manually adjusted in the order of your needs.

Include Patient ID: ☒

Include Patient Name: ☒

Include Sample ID: ☐

Include Measurement QR-Code: ☐

Include Date & Time: ☒

Footer

Footer text:

Will be printed in the footer if provided and rendered as HTML.

Save Cancel



VII.2.2.2 DESIGN EINSTELLUNGEN IN DEM CUSTOM REPORT KONFIGURATOR (LEGACY TEMPLATE)

Die folgenden Einstellungen können in dem Tab „Design“ ausgewählt werden:

- PDF Format
- Schriftart
- Background image: Es ist möglich, allen Seiten einen Wasserzeichen-Hintergrund hinzuzufügen.

Configure report template "New report template"

The screenshot shows the 'Design' tab of the 'Configure report template' dialog. It contains three main settings:

- PDF format:** Radio buttons for 'A4' (selected) and 'Letter'. A note states: 'Specifies the paper size of the output PDF.'
- Font:** A dropdown menu showing 'Arial'. A note states: 'The font family of the whole report texts can be adjusted.'
- Background image:** A text input field followed by a 'Browse' button. A note states: 'If set, this image is used as background on the first page of the PDF.' Below the input field, it says 'Maximum file size 1 MB'.

- Color palette: Die Grundfarben der Vorlage und der Ergebnisklassen können über die gesamte Farbpalette angepasst werden
- Logos: Zusätzlich zu den Logos auf beiden Seiten der Kopfzeile der Titelseite, kann ein Miniaturlogo in die Kopfzeile aller Seiten eingefügt werden. Standardmäßig ist dies eine Miniatur des Logos der linken Seite der Kopfzeile.
- Unterschrift: Zusätzlich kann ein Bild einer Unterschrift hochgeladen werden, das am Ende des Berichts eingefügt wird.
- Benutzerdefinierte Intensitätsanzeige (ein benutzerdefiniertes SVG zur Anzeige der Allergenintensität kann hinzugefügt werden)



Color settings

Color palette: Palette 1

Color 1:

Color 2:

Color 3:

Color 4:

First level headline color:

Second level headline color:

Third level headline color:

Logos

Logo (left): Browse
Maximum file size 1 MB
This logo will appear on the **top left corner** of the first page of the report.

Text (center):
This text will appear either on the left, right, or center of the top of the first page (depending on your configured logos). Supports the placeholders `{{ PATIENT_PORTAL_QRCODE }}` and `{{ PATIENT_PORTAL_URL }}` to dynamically insert measurement information.

Logo (right): Browse
Maximum file size 1 MB
This logo will appear on the **top right corner** of the first page of the report.

Small logo: Browse
Maximum file size 1 MB
This logo is used on all detail pages. If not set, the default logo is used.

Signatures

Left: Browse
Maximum file size 1 MB
This signature or image will appear on the last page, left aligned.

Center: Browse
Maximum file size 1 MB
This signature or image will appear on the last page, center aligned.

Right: Browse
Maximum file size 1 MB
This signature or image will appear on the last page, right aligned.

Indicators

Custom intensity indicator:
A custom SVG for displaying allergen intensity can be pasted here. Will be styled according to specified colors.

⚠ The SVG element must contain the attributes **width** and **height** with a minimum dimension of 16 for correct display in PDF.

🌿 SVGs paths which should be colored must require the **colorize** class as well as a fill defined in the **defs** segment of the SVG.



VII.2.2.3 HEADER SETTINGS FOR CUSTOM REPORT TEMPLATE (LEGACY TEMPLATE)

Der Inhalt und das Layout eines Headers kann über eine 8x2 Tabelle so eingestellt werden, dass die entsprechenden Informationen entweder links oder rechts im Header dargestellt werden. Folgenden Informationen und ihre Position können über das Dropdown eingefügt werden:

- Sample Date
- Assay Date
- Analysis Date
- Approval Date
- Print Date
- Patient ID
- SampleCode
- Patient Name
- Date of Birth
- QR-Code
- Amount of tested allergens
- Test method
- Doctor information
- Quality Control text
- Additional Info Text
- Requisition Code
- Approved by
- Tested by

Wird in dem Dropdown „None“ ausgewählt, wird kein Text an der entsprechenden Position dargestellt. Das gleiche tritt auf, wenn die entsprechende Position in den Details einer neuen Messung nicht ausgefüllt wird. Zusätzlich können individuelle Texte ergänzt werden. Bei

Configure report template "New report template"

Header content:		Left half	Right half
		Custom headline	Custom headline
Patient Name	☐	Doctor Information	☐
Patient Name	☒	None	☐
Custom headline			
Date of Birth	☐	None	☐
Sample ID	☐	None	☐
QR-Code	☐	Additional Info text	☐
Analysis Date	☐	None	☐
Amount of tested allergens	☐	None	☐
Test method	☐	Quality Control text	☐



Bedarf kann hier über die Checkbox direkt neben dem entsprechenden Textfeld ein individueller Text eingegeben werden.

VII.2.2.4 CONTENT SETTINGS IN DEM CUSTOM REPORT KONFIGURATOR (LEGACY TEMPLATE)

Die folgenden Einstellungen können in dem Tab „Content“ ausgewählt werden:

- Allergens to include: welche Allergene einbezogen werden sollen
- Sortierung der Allergene: Die Allergendetails im Bericht (in einer Allergengruppe) können auf drei verschiedene Arten sortiert werden:
 - Alphabetische Reihenfolge nach Allergencodes
 - Absteigend vom höchsten zum niedrigsten Wert
 - Alphabetisch geordnet nach Allergenname (gebräuchlicher Name)
- Allergenübersicht inkludieren
- Produkttyp inkludieren
- Total IgE inkludieren - mit drei unterschiedlichen Optionen:
 - Nicht inkludieren
 - Nach den spezifischen Allergenergebnissen anzeigen
 - Auf der Titelseite anzeigen
- Kreuzreaktive Informationen: Durch Auswahl von "include cross-reactive information" werden am Ende des Berichts erläuternde Sätze hinzugefügt, in denen die Allergenfamilien beschrieben werden, die auf der ersten Seite positiv sind (siehe "cross-reactive allergens"). Es ist möglich, die Information nur als Text oder die Information und eine Tabelle aller positiven Allergene einzufügen
- Interpretation einbeziehen (RAVEN): Siehe entsprechendes Kapitel. Hier kann ausgewählt werden, ob eine Interpretation automatisch in den Bericht aufgenommen werden soll, oder nur auf Anfrage.
- Zusätzliche auf dem Bericht angegebene Daten nach der Ergebnisliste:
 - Datum der Genehmigung
 - Datum der Durchführung des Assays
 - Doctor Information
 - Druckdatum
 - Report Info
 - Datum der Probe



General	Design	Header	Content
Allergens to include:	All allergens	Specifies which kind of allergens should be included in the report.	
Allergens sort order:	Alphabetically by allergen	Specifies the sort order of the allergens.	
Include Overview:	☒	Whether the allergen overview should be printed or not.	
Include product type in overview:	☒	Whether the product type should be printed in the header of allergen overview.	
Include Total IgE:	On the front page	Whether the information of total IgE should be included in the report and where.	
Cross-reactive information:	Include text	This section will be displayed underneath the allergen list itself.	
Include Interpretation:	Include manually	It can be specified if the Raven report interpretation information should be included in the report or not. This section is printed underneath the allergens overview.	

Additional information (below the list of results)		Those informations are integrated into the report in an extra section underneath the allergen list.
Approval date:	☐	
Assay date:	☐	
Doctor info:	☐	The information about the doctor which accompanied the measurement/patient.
Print date:	☒	When the report was generated.
Report info:	☐	The „additional info“ field belonging to the measurement.
Sample date:	☒	

Nach der Änderung kann die Berichtsvorlage durch Klicken auf die Schaltfläche "Save" gespeichert werden.


Eine Berichtsvorlage kann mit der Schaltfläche „Duplicate“ unten auf der Seite dupliziert werden. Die aktuelle Berichtsvorlage wird dupliziert und das Duplikat wird automatisch geladen, was am Namen der Berichtsvorlage zu erkennen ist.

Configure report template "New report template - Duplicate"

General	Design	Header	Content
Name:	New report template - Duplicate		
Support products:	ALEX ²		
Preferred language:	Deutsch (de)		



Um Ihre Standard-Vorlage („Default“ template) zu definieren, müssen Sie über die entsprechenden Benutzerrechte verfügen. Wenn Sie dann im Bereich Tenant Admin auf "Configure Tenant" gehen, können Sie Ihre Standardsprache und -vorlage auswählen.

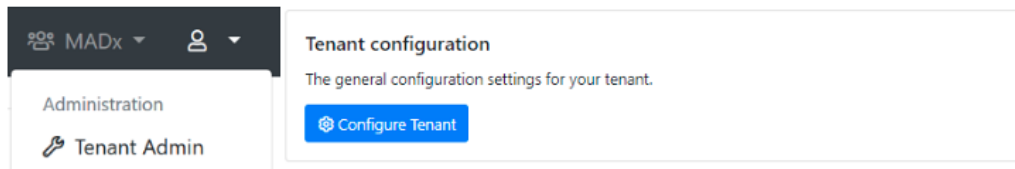

General configuration

* Name:	MADx
Default timezone:	(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Configure a timezone to see date and times in (instead of UTC). Please note that users can choose to use a different timezone.	
Default report template (ALEX 1):	Version 1 (ALEX1 & ALEX2)
Default report template (ALEX 2):	Version 2 (ALEX2 only)
Default report language:	English (United Kingdom) (en-gb)
Default MOD:	< No MOD >

Require ImageXplorer testarray scan: Warn after 60 days, enforce after 90 days.

Ein Bericht über eine nicht genehmigte Messung kann angezeigt werden, indem Sie auf eine Messung in der Registerkarte "Neue Messungen" klicken und "Bericht" wählen.



Details

QR-Code: 02AMX16E

Proben Code:

Anforderungscode:

Datum der Probenahme:

Test Datum:

Wiederaufnahmedatum: 28.04.2022 11:14

Patienten Code:

Patienten Name:

Geburtsdatum:

Info:

Arzt Info:

Wählen Sie einen Arzt aus ...

Kennzeichen: recaptured

MOD: < Kein MOD >

Berichtsvorlage: Version 2 (ALEX2 only) - Deutsch (de)

Dann sehen Sie eine Vorschau des Berichts, in der Sie eine Berichtsvorlage (Standard oder benutzerdefiniert) auswählen und die Standardsprache einstellen können. Es ist jedoch nicht möglich, diesen PDF-Bericht herunterzuladen. Dazu ist es notwendig, zuerst die Messung zu genehmigen.

Bericht

Vorlagen: Version 2 (ALEX2 only)

Sprache: Deutsch (de)

Normalerweise werden die Standardvorlage und -sprache des Tenants beim Teilen oder Exportieren von Messungen verwendet. Sie können die mit dieser Messung verbundene Vorlage und Sprache ändern, indem Sie Ihre aktuelle Konfiguration speichern.

Sie können diesen Bericht im PDF-Format herunterladen, sobald die Messung freigegeben wurde.

Sie haben Zugriff auf die Verwaltung der Berichtsvorlagen und Einstellungen über die Tenant-Administration. Bitte beachten Sie, dass sich Änderungen auf alle Benutzer auswirken.

MADX

PATIENTEN ID
NAME PATIENT
GEBURTSDATUM
PROBEN ID
QR CODE
ANALYSIERT AM
GETESTETE ALLERGENE
TESTMETHODE

ZUWEISENDER ARZT

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Die interne GC-Plausibilitätsprüfung für GCs lag im Akzeptanzbereich.

Laborbericht: Zusammenfassung der nachweisbaren Sensibilisierungen

POLLEN
Gräserpollen

MIKROORGANISMEN
Pilzsporen & Hefe



Genehmigte Messungen können entweder zusammen oder einzeln heruntergeladen werden. Um Messungen zusammen herunterzuladen, gehen Sie zunächst auf die Registerkarte "Freigegebene Messungen" und wählen Sie die Messungen aus, die Sie herunterladen möchten. Wählen Sie dann PDF-Bericht aus dem Dropdown-Menü und ein Zip-Ordner mit den PDF-Berichten wird lokal auf Ihrem Computer gespeichert.

Freigegebene Messungen

Ausgewählte Messungen herunterladen ▼

☐	Quelle	Kennzeichen	Produkttyp	QR-Code
☒	IX		FOX	80AAH848
☒	IX		ALEX2	02AIS310
☒	IX		FOX	80AAH848

Ausgewählte Messungen herunterladen ▼

Bericht (PDF Format)
 CSV Format
 Excel Format
 ASTM Format

Interpretation aktualisieren
 Berichtsvorlage wählen
 Teilen
 » Verschieben
 Freigabe zurücksetzen

Wenn Sie auf eine Messung klicken, gelangen Sie in den Detailbereich dieser Messung. Von dort aus können Sie sich auch eine Vorschau des Berichts anzeigen lassen und die Einstellungen für die Überschrift und die Sprache dieses Berichts ändern. Anschließend können Sie den Bericht direkt von dort herunterladen.



Details

QR-Code: 02APH00E

Probencode:

Anforderungscode:

Datum der Probenahme:

Assaydatum: 28.04.2022

Patientencode:

Patientenname:

Geburtsdatum:

Info:

Arztinfo:

Analyse: 28.04.2022 18:47

Freigegeben: 31.05.2022 17:54

ImageXplorer: 23167844

Kennzeichen:

MOD: test

Berichtsvorlage: Version 2 (ALEX2 only) - Deutsch (de)

[Herunterladen](#) [Bericht](#) [Speichern](#) [» Zu einem anderen Tenant verschieben](#)

Bericht

Vorlagen: Version 2 (ALEX2 only)

Sprache: Deutsch (de)

[Speichern](#) [Voreinstellungen verwenden](#)

Normalerweise werden die Standardvorlage und -sprache des Tenants beim Teilen oder Exportieren von Messungen verwendet. Sie können die mit dieser Messung verbundene Vorlage und Sprache ändern, indem Sie Ihre aktuelle Konfiguration speichern.

[Als PDF herunterladen](#)

[🔧 Berichtsvorlage und Einstellungen verwalten](#)

Sie haben Zugriff auf die Verwaltung der Berichtsvorlagen und Einstellungen über die Tenant-Administration. Bitte beachten Sie, dass sich Änderungen auf alle Benutzer auswirken.

MA
MACRO ARRAY DIAGNOSTICS

M
MACRO ARR

PATIENTE
👤
NAME PA
👤
GEBURT:
📅
PROBEN
🔬
QR-CODE
02A
ANALYSIS
28.04
GETESTE
29.05
TESTME!
ALE

Labor!

POLLEN
Gräserpollen
Dauerpollen




VII.2.3 INTERPRETATIONSHILFE ANFRAGEN

Ein spezielles Softwaremodul wurde implementiert, um die Interpretation der Ergebnisse zu unterstützen: RAVEN Interpretationshilfe.

Eine Interpretationsabfrage mit RAVEN ist sowohl für genehmigte als auch für nicht genehmigte Messungen möglich. Der Bericht kann aber nur für genehmigte Messungen heruntergeladen werden. Die Interpretation wird dem Bericht automatisch hinzugefügt, wenn eine Berichtsvorlage gewählt wird, für die die Option "Automatically include interpretation" festgelegt wurde.

Falls für Ihre Berichtsvorlage die Interpretationsoption "Include manually triggered interpretation" gewählt wurde, müssen Sie die Interpretation für eine Messung manuell auslösen, indem Sie auf die Detailseite einer Messung gehen, dann auf das Menüsymbol klicken und "Interpretation anzeigen" wählen.

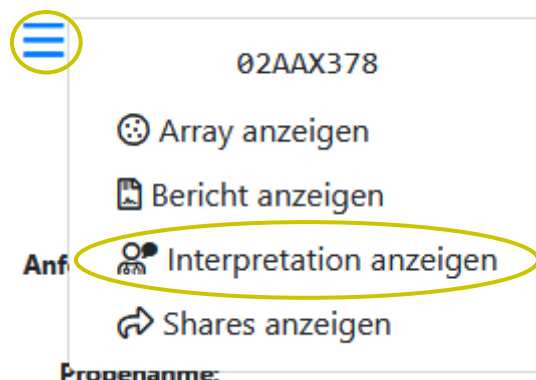


Es öffnet sich eine neue Seite, auf der der Regelsatz (Ruleset) ausgewählt werden kann, der zur Interpretation der Ergebnisse verwendet werden soll.

≡ Interpretation

Regelsatz

RAVEN Ruleset A for ALEX

Ein Regelsatz definiert den RAVEN oder RAVEN² Algorithmus der für die Interpretation von Resultaten verwendet wird.

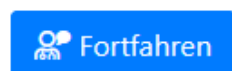

Für „RAVEN Ruleset A and B for ALEX“ wird eine neue Seite geöffnet in der die Einstellungen (Sprache) spezifische Patienteninformationen (wie Alter, Geschlecht und Umgebung) und Patientensymptome eingegeben werden können.



Patient symptoms

Asthma	None	⌵
Rhinitis	None	⌵
Conjunctivitis	None	⌵
Urticaria	None	⌵
Angioedema	None	⌵
Oral Allergy Syndrome	None	⌵
Eczema	None	⌵
Anaphylaxis	None	⌵
GastroentericSymptoms	None	⌵

☰ Interpretation

Einstellungen

Sprache:

Deutsch (de)

Patienten-Information

Geschlecht:

Bitte wählen sie das Geschlecht aus

Alter:

Jahre

Umgebung:

Bitte wählen sie die Umgebung

Interpretation anfordern

Für „RAVEN² for ALEX“ kann die Sprache und die Region ausgewählt werden, bevor man mit der Anamnese fortfährt, die als Fragebogen bereitgestellt wird.



☰ Interpretation

Interpretationseinstellungen

Sprache:

English (en)

Region:

Keine spezifische Region



Interpretation anfordern



Overview

Spring

Summer

Perennial

Food

Insects

AIT

Medication

MADx data declaration for smartRaven

☒ I accept to enter clinical data for using the full interpretation function of smartRAVEN

Patient has reported any symptoms

☐ Yes ☐ No

Additional information about the patient

☐ Atopic Dermatitis

☐ Allergen-specific immunotherapy (AIT) - ongoing, completed or discontinued

☐ Medication

Submit

Durch Klick auf „Interpretation anfordern“ im Falle von „RAVEN Rulesets A and B for ALEX“ oder „Submit“ im Falle von „RAVEN² for ALEX“ wird die Interpretation generiert.



Interpretation

Patienten-Information

Geschlecht: Male
Alter: 35 Jahre
Umgebung: Maritime
Asthma: None
Rhinitis: None
Conjunctivitis: None
Urticaria: None
Angioedema: None
Oral Allergy Syndrome: None
Eczema: None
Anaphylaxis: None
Gastroenteric Symptoms: None

Neue Interpretation anfordern

Interpretation löschen

Für diese Messung ist bereits eine Interpretation gespeichert. Normalerweise sollte es nicht notwendig sein, diese erneut anzufordern, aber es könnte notwendig sein, wenn sich die Patientendaten geändert haben.

Interpretation

Zusammenfassung der Raven Interpretation

Probeninformationen

Die Probe wurde auf ALEX² Barcode 02APH00F, Interpretationsda

Von den getesteten 295 Allergenen lagen 145 über dem Cut-off \ eine Allergie sein. Für alle positiven ALEX 2 Allergene sind nachfo

Gesamt IgE: 1472 kU/L

Das gemessene Gesamt IgE betrug 1472 kUA/L. Ein hohes Gesam

Kreuzreaktive Kohlenhydrat Determinanten (CCD-Marker

Der CCD-Marker (Hom s LF) war positiv. Dies deutet auf einen sig in der Serumprobe hin. Positive Ergebnisse bei Extrakten und gly interpretiert werden. CCDs sind Teil vieler pflanzlicher Allergene, l manchen Muschelarten. Aufgrund der konservierten Struktur von unabhängigen Allergenquellen weit verbreitet. Eine klinische Rele wird empfohlen, die Testung mit verlängerter CCD-Inhibitor gem wiederholen.

Kreuzreaktive Sensibilisierung detektiert

Sensibilisierung gegen Allergenmoleküle detektiert, welche als M verschiedenen Allergenquellen dienen.

Detektierte kreuzreaktive Sensibilisierungen:


Die Interpretation wird dann am Ende des Berichts eingefügt und auch in einem Vorschauenfenster angezeigt. Messungen, die bereits eine Interpretationsabfrage erhalten

haben, sind durch das folgende Symbol gekennzeichnet:



Nach dem Klicken auf das Symbol kann die Interpretation wie oben überprüft werden, mit der Möglichkeit, die vorhandene Interpretation zu aktualisieren (neu anzufordern) oder zu löschen.

Darüber hinaus können auch mehrere Abfragen gebündelt durchgeführt werden. Wenn Sie auf der Übersichtsseite mehrere Messungen markieren (sowohl von nicht genehmigten als auch von genehmigten Messungen) und mit der Maus auf die 3 Linien in der oberen linken Ecke klicken, können Sie "Interpretation aktualisieren" wählen, um die Abfrage gebündelt durchzuführen.

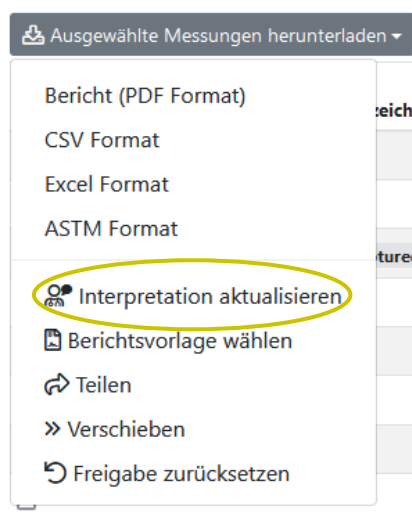



VII.2.4 MULTIPLEX ON DEMAND

Der Benutzer hat die Möglichkeit, eine bestimmte Gruppe von Allergenen auszuwählen, die für das Ergebnis berücksichtigt werden sollen. Im Detailfenster einer Messung kann ein vordefiniertes Panel ausgewählt werden. Wenn ein Panel ausgewählt wird, zeigt die Software nur die Allergenspots und Ergebnisse des ausgewählten Panels an. Um die Auswahl zurückzusetzen und alle Allergene anzuzeigen, wählen Sie "no MOD".

Details

QR-Code: 028JU3C0

Sample Code:

Requisition Code:

Sampling Date:

Assay Date:

Recapture Date: 14.03.2024 09:47

Patient Code:

Patient Name:

Date of Birth:

Info:


Doctor Info:

Choose a doctor...

Tags:

MOD:

Report Template: Version 2 (ALEX2 only) - English (United States) (en-us)

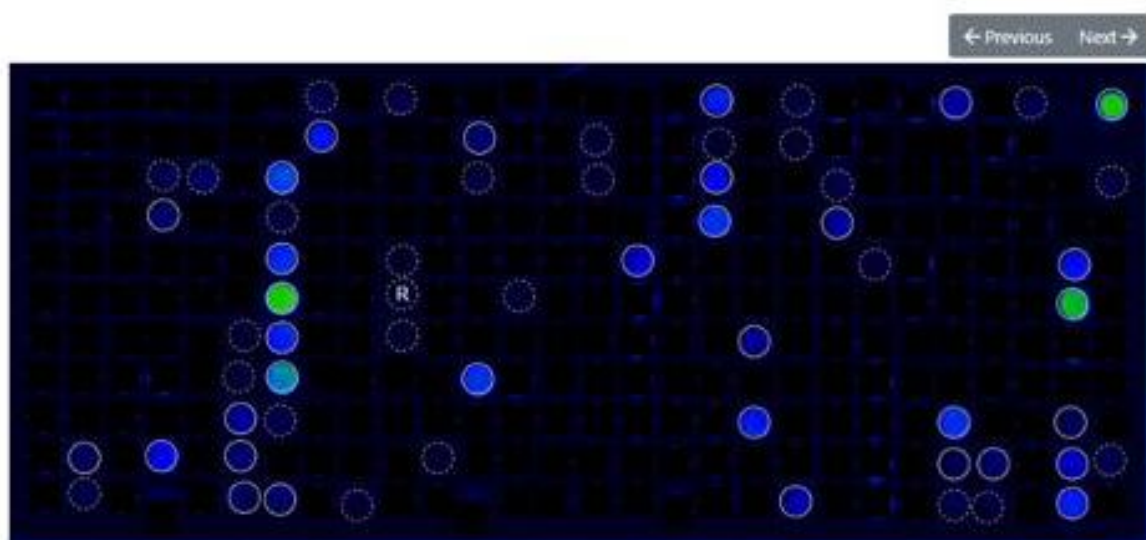

Received: 07.10.2020 14:44
ImageXplorer: 23156891

Analysis: 07.10.2020 14:44
Automatic QC: OK




ACHTUNG! Nach der Freigabe der Messung werden die Allergene, die nicht in das MOD aufgenommen wurden, sowohl aus dem Bild als auch aus den Daten gelöscht und werden daher auch im Bericht nicht angeführt.

Die folgenden Allergenpanele können als vordefinierte MODs ausgewählt werden:

- AIT-relevant
- ALEX² ohne Gifte
- Tierische Nahrungsmittel
- Schaben, Milben & Insekten
- Kontaktallergene
- Eier & Milch
- Nahrungsmittelallergene
- Obstallergene
- Tierhaarallergene
- Inhalative Allergene
- Hülsenfrüchte, Nüsse & Samen
- Molekulare Allergene
- Pflanzliche Nahrungsmittel
- Pollenallergene
- Giftallergene

Jeder Tenant kann seine eigenen MOD Panele definieren. Hierfür klicken Sie im "Tenant Admin" Bereich auf "Manage MODs", und erstellen Sie ein individuelles Tenant-spezifisches MOD Panel durch Klicken auf "Add new MOD". Für jeden Produkttyp kann ein eigenes MOD hinterlegt werden.

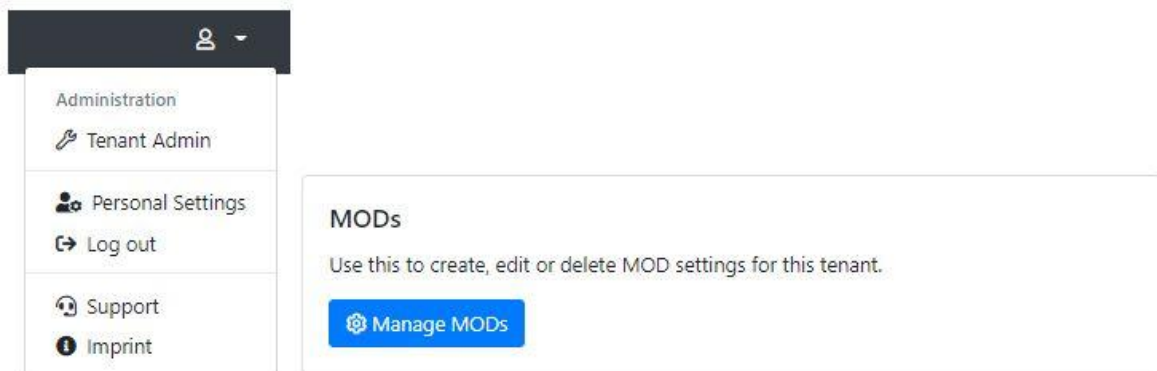

Geben Sie den Namen des Panels, den Typ (nur bestimmte Allergene oder alle Allergene außer den angegebenen) und die Allergene (nach ihrem Code) ein, die Sie in das Panel aufnehmen möchten.



Raptor [New measurements](#) [Approved measurements](#) [Start measurement](#) [Automats](#)

Create new MOD

Name:

Type:

Deactivated:

You cannot delete an MOD once it is in use. But you can deactivate it, so that it's not available for new measurements anymore.

Allergens:

Enter one allergen (2"

[Save](#) [Cancel](#)

Darüber hinaus sind in der Tenant configuration (Tenantadministrator → Configure Tenant) drei MOD-Einstellungen verfügbar

General configuration

*** Name:**

Default timezone:

Configure a timezone to see date and times in (instead of UTC). Please note that users can choose to use a different timezone.

Default report template (ALEX 1):

Default report template (ALEX 2):

Default report template (FOX):

Default report template (PAX):

Default report language:

Default ALEX2 MOD:

Default FOX MOD:

Default PAX MOD:

Force MOD:

Requires a measurement to always have an MOD assigned. If this setting is enabled, a measurement cannot be approved without an MOD assigned.

Hide Global MOD:

If this setting is enabled, only the tenant-specific MOD will be available to select, and the global system-wide MOD will be hidden.

Display MOD Excluded Spots As Research Use Only:

If this setting is enabled, spots excluded by an MOD will not be hidden from the measurement image, but displayed as a "RUO spot".

Require ImageXplorer ConfigXplorer scan:



- Force MOD: Wenn diese Einstellung auf „True“ gesetzt ist, muss beim Speichern oder Genehmigen einer Messung eine MOD ausgewählt werden.

Doctor Info:

Choose a doctor...

Tags:

MOD: < No MOD >

Report Template: ALEX2_v1.17 - Español (es)

- Hide Globale MOD: Wenn diese Einstellung auf „True“ gesetzt ist, werden globale MODs beim Bearbeiten einer Messung nicht in der MOD-Dropdown-Liste angezeigt.

MOD: < No MOD >

Report Template: < No MOD >
Global_MOD_ALEX_v1.17
MOD_ALEX_v1.17

Force MOD: True
Requires a measurement to always have an MOD assigned. If this setting is enabled, a measurement cannot be approved without an MOD assigned.

Hide Global MOD: True
If this setting is enabled, only the tenant-specific MOD will be available to select, and the global system-wide MOD will be hidden.

Display MOD Excluded Spots As Research Use Only: False
If this setting is enabled, spots excluded by an MOD will not be hidden from the measurement image, but displayed as a "RUO spot".

MOD: < No MOD >

Report Template: < No MOD >
MOD_ALEX_v1.17



- Display MOD Excluded Spots As Research Use Only: Wenn diese Einstellung auf „True“ gesetzt ist, werden die von der MOD ausgeblendeten Spots in der Detailansicht und der Arrayansicht der Messung als RUO angezeigt. (Auf der Seite "Persönliche Einstellungen" muss "Forschungssspots" auf "Forschungssspots anzeigen" eingestellt sein).

Force MOD:	False	Requires a measurement to always have an MOD assigned. If this setting is enabled, a measurement cannot be approved without an MOD assigned.
Hide Global MOD:	False	If this setting is enabled, only the tenant-specific MOD will be available to select, and the global system-wide MOD will be hidden.
Display MOD Excluded Spots As Research Use Only:	True	If this setting is enabled, spots excluded by an MOD will not be hidden from the measurement image, but displayed as a "RUO spot".

Konfiguration


Kalibrierungszeichenfolge:

Ermöglicht das Überschreiben der Kalibrierungsinformationen aus dem QR-Coc der Kassette zu verwenden (das übliche Verhalten).

Forschungssspots:

Forschungssspots anzeigen

Wenn diese Option aktiviert ist, werden in den Messungsdetails und auf Arrays keinen Einfluss auf das Exportverhalten oder die Berichte von Messungen.

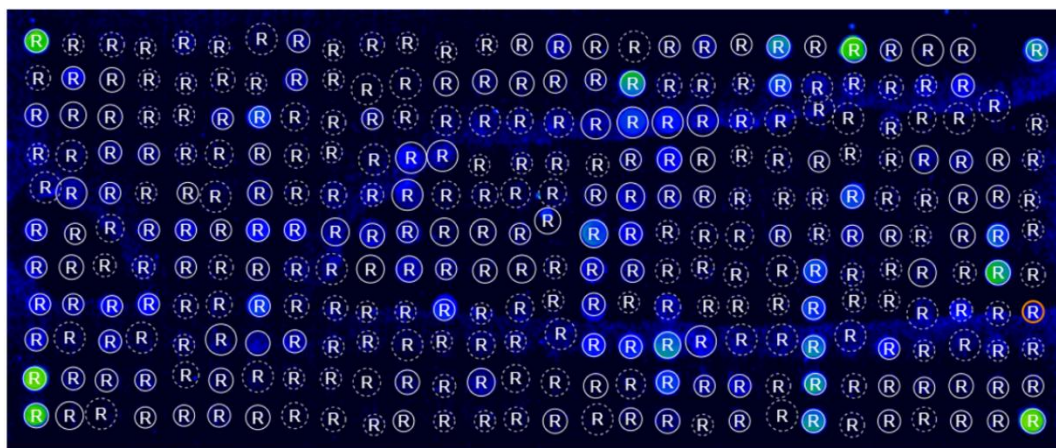





VII.3 MESSUNGEN VON QUALITÄTSKONTROLLPROBEN

Es ist auch möglich „Lyphocheck Allergen IgE, Panel A“ der Firma Bio-Rad Laboratories (REF 12000142, REF 12000144) als Qualitätsprobe zu verwenden. Akzeptanzkriterien von einigen Allergenen des jeweiligen Lyphocheck Lots (lot 22670, lot 22660, lot 22650, lot 22640) sind im RAPTOR SERVER hinterlegt.

Neue Messungen von Qualitätskontrollproben werden in der Übersicht „Neue Messungen“ angezeigt. Ist diese Messung in rot hinterlegt, liegen Messwerte einzelner Antikörper außerhalb der bestimmten Akzeptanzintervalle. Ist die Messung als grün markiert, wurden sämtliche Akzeptanzkriterien erfüllt.

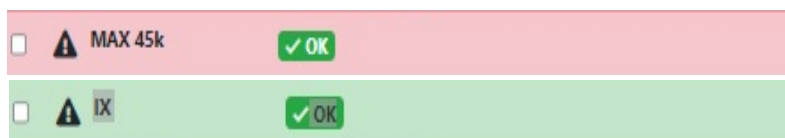

Die detaillierte Ergebnisansicht einer Messung zeigt das Analysebild mit allen Allergenen. Es werden in diesem Bild nur diese Allergene dargestellt und diese spezifische MOD kann nicht verändert werden. Zusätzlich wird das Analysebild auch noch als QC-Sample markiert.

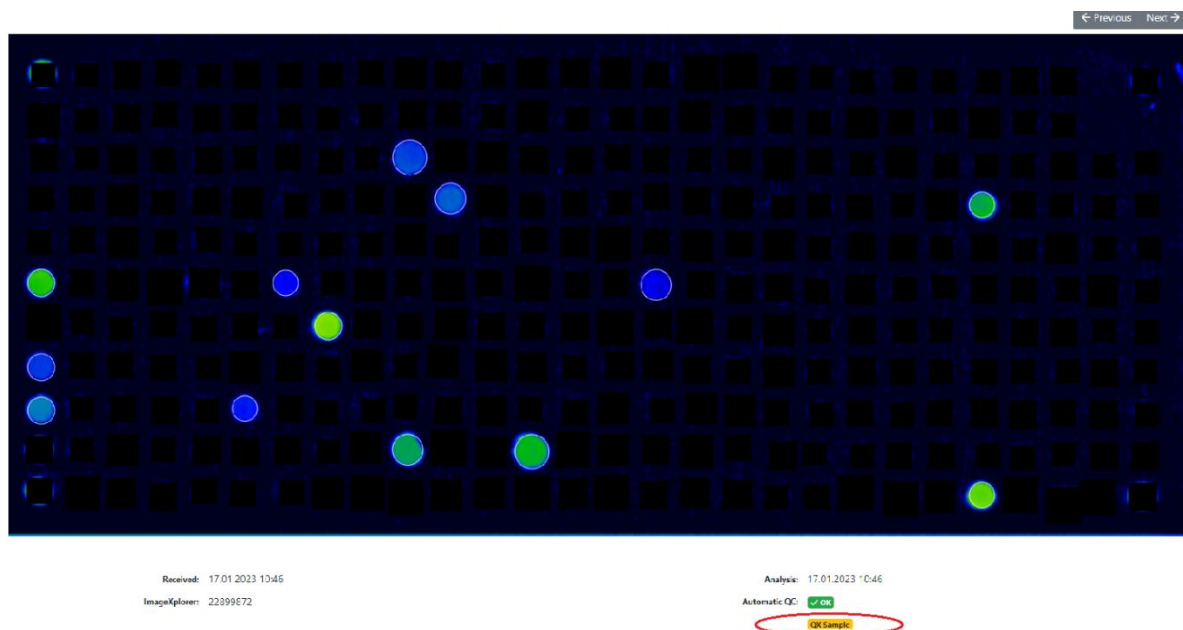

Die detaillierten Ergebnisse der Messungen können über das QC-Modul des Gerätes in tabellarischer oder graphischer Form abgerufen werden (Tenantadministrator > Manage ImageXplorers bzw. Manage MAX Devices). Falls das Gerät mit dem RAPTOR-SERVER verbunden ist, kann das QC-Modul auch direkt über das Dashboard angesteuert werden (siehe VII.1.1).




MAX devices for "MADx Tenant"

[Add new MAX device](#)
[Download MAX Agent Software](#)

Name	Type	Key	Serialnumber	Last connection	Last activity	
9k-TR03-PROD	Max9k	9Dgg8JMH64E03gagShDjjkNB16KVRB	22069993	vor 7 Monaten	vor 7 Monaten	QC Configure
AutomatWithKeyThatDidNotWorkBefore	Max45k	1q4DGwbYq1IOcPudmlyMwmx2B6G	19090008	vor einem Jahr	nie	List View
MAX 002	Max45k	d0bknHFKbJEa6eMMbLnN71JGTGL01V	19120002	vor einem Jahr	vor einem Jahr	Chart Trend View

Über die Option „List View“ und „View Results“ kann ein QC-Report einer Messung geladen werden.

Die Option „Chart Trend View“ zeigt sämtliche Akzeptanzkriterien für die Allergene in graphischer Form, wobei ab zumindest 2 Messungen die Akzeptanzkriterien auch farblich markiert sind. Um mehr Informationen für die Auswertung bereitzustellen, sind der CV, die Standardabweichung und der Mittelwert für jedes Allergen standardmäßig verfügbar. Es ist auch möglich, sie aus den Diagrammen zu auszublenzen, indem Sie sie in der Beschreibung unter dem Diagramm anklicken.

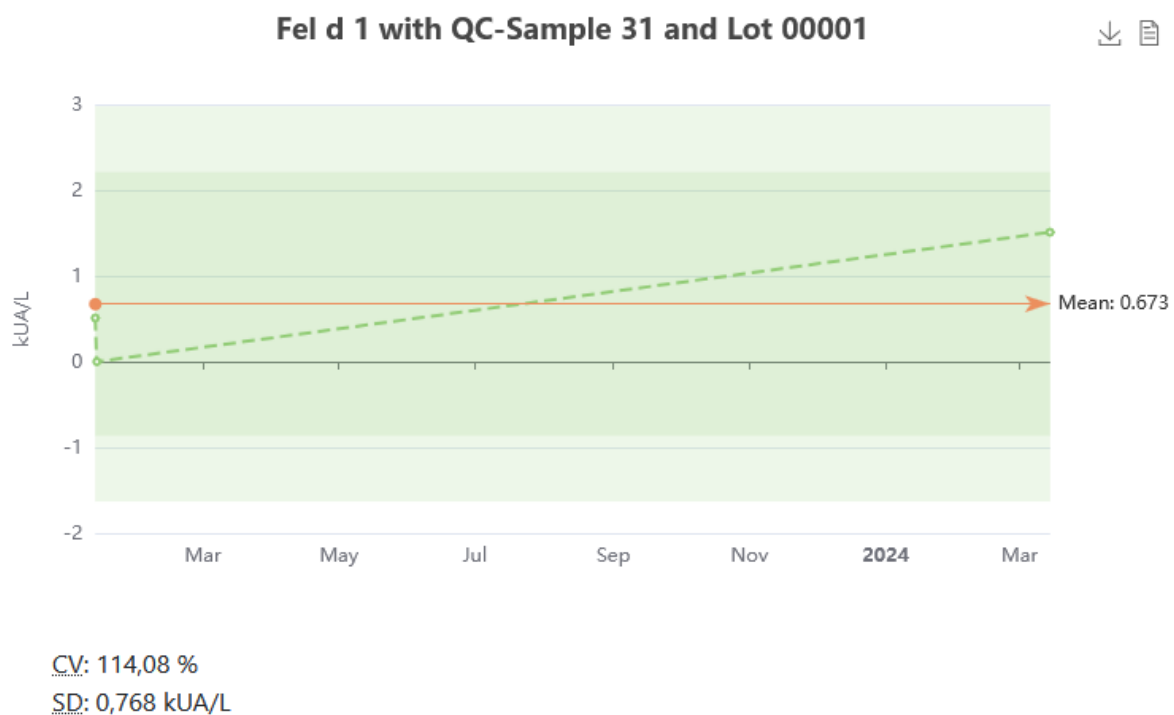


Nach einer minimalen Anzahl an Messungen (z.B.: 20 Messungen) können gerätespezifische Intervalle (2 und 3 Standardabweichungen) verfolgt werden. Auf diese Weise können die laborspezifischen Intervalle für jedes Lyphochek-Allergen genau bestimmt werden.



VII.4 TRENDANALYSE

Die Trendanalyse ermöglicht die Verfolgung der Allergenstabilität während des gesamten Produktlebenszyklus anhand interner Qualitätskontrollproben und visualisiert die Ergebnisse in einem Levey-Jennings-Diagramm, wodurch ein klarerer Einblick in die langfristige Leistung gewonnen wird. Um die Funktion zu öffnen, wählen Sie das Menüsymbol (oben rechts) und dann „Trendanalyse“.

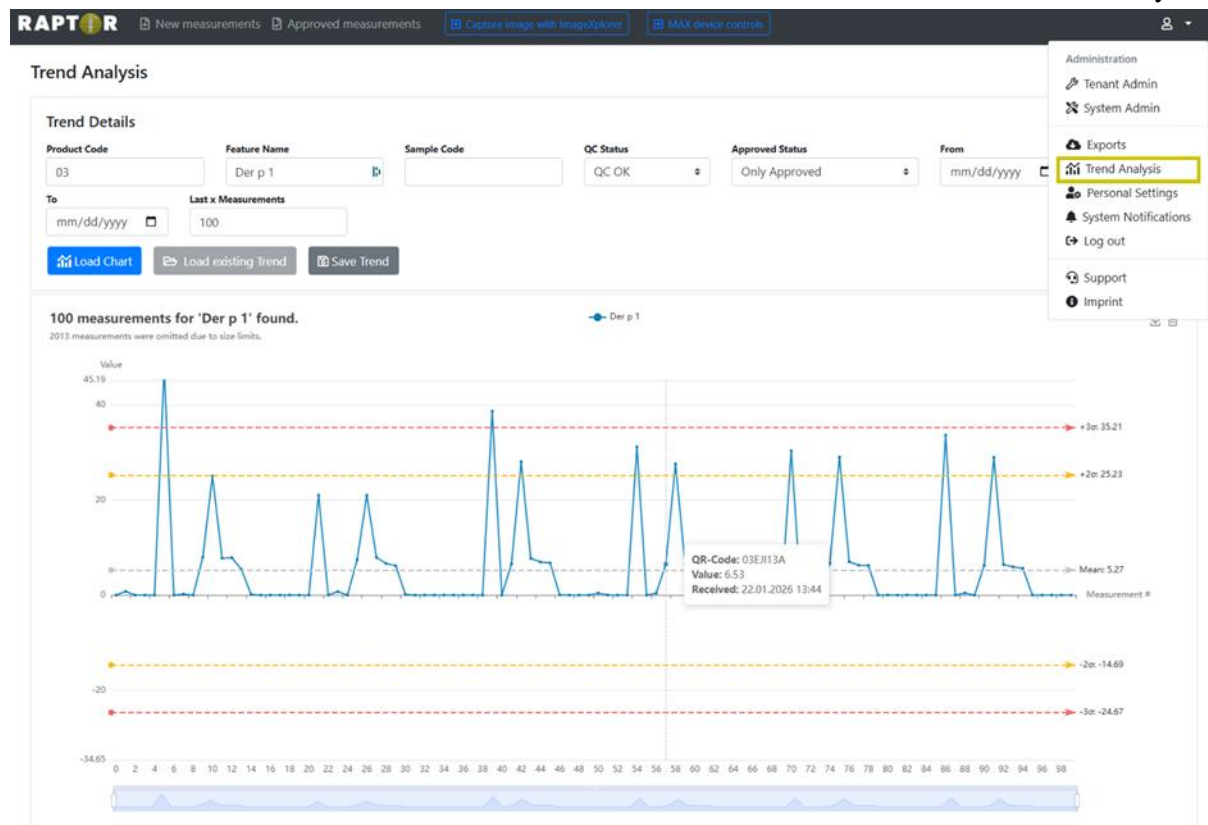


Die erforderlichen Eingaben sind „Produktcode“ und „Funktionsname“. Mit den Steuerelementen oben rechts im Diagramm können Sie das Diagramm als Bild herunterladen oder die zugrunde liegenden Daten als Tabelle anzeigen. Mit den Schiebereglern unterhalb des Diagramms können Sie den im Diagramm dargestellten Messbereich anpassen.



VII.5 LÖSCHEN VON MESSUNGEN

Nicht freigegebene Messungen können gelöscht werden, indem man die zu löschende Messung auswählt und im Dropdown-Menü "Löschen" auswählt. Bevor eine Messung endgültig gelöscht wird, erscheint eine Warnung, die genehmigt werden muss. Gelöschte Messungen werden dauerhaft gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.

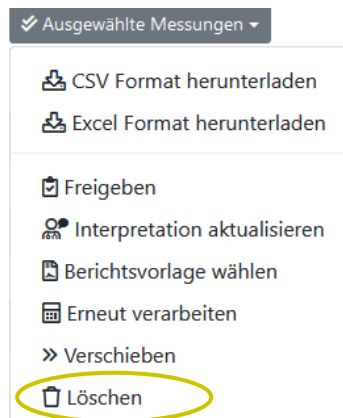

Messungen löschen

Sie sind dabei, die folgenden Messungen zu löschen. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion irreversibel ist und nicht rückgängig gemacht werden kann.

QR-Code	Analysedatum
02ARD001	06.07.2022 08:41
90AAD021	28.06.2022 13:34
90AAD01A	28.06.2022 13:34

Diese Messungen löschen

Abbrechen

Wichtig zu wissen ist auch, dass das Löschen neuer Messungen mit dem spezifischen Benutzerrecht „Edit Measurement“ verknüpft ist. Tenantadministratoren mit diesem Recht oder Systemadministratoren können neue Messungen löschen. Tenantadministratoren ohne dieses Recht haben diese Option nicht. Jeder Benutzer kann das Löschen von Messungen auf der RAPTOR SERVER-GUI anfragen (geöffnete Messung, unten rechts). Diese Anfrage kann auch zurückgezogen werden.

Plant Food Food	M	Jug r 3	0.40
Plant Food Food	M	Jug r 1	0.38

Request delete

Plant Food Food	M	Jug r 3	0.40
Plant Food Food	M	Jug r 1	0.38

Delete request scheduled now.

Cancel delete request



Systemadministratoren erhalten die Anfrage (besondere Funktion in den Systemadministratorrechten: „Measurement delete/unapproval log & requests“) und können sie annehmen oder ablehnen.

ign in. Can be

Background jobs

View details about running background jobs and manually schedule runs.

View dashboard

Measurement delete / unapproval log & requests

Show logging and pending requests for measurement delete and unapproval.

Show log & requests

Measurement unapproval / delete requests

Open requests		Log & Finished requests		
Requested UTC	Requesting User (Email)	QR-Code	Request Type	Action
11.10.2023 13:05:28	Test Test (Test@test.com)	02AYQ145	Unapprove	Accept Reject
11.10.2023 12:59:27	Test Test (Test@test.com)	02AYQ14C	Delete	Accept Reject

Um die Freigabe einer Messung rückgängig zu machen, kann, derselben Funktionalität folgend, auch eine Anfrage gestellt werden (geöffnete Messung, unten rechts). Auch hier erhalten Systemadministratoren die Anfragen und können diese annehmen oder ablehnen.

Das Löschen und/oder Rückgängig machen der Freigabe wird laut den gesetzlichen Anforderungen in der Datenbank protokolliert.

Measurement unapproval / delete requests



Open requests		Log & Finished requests				
Requested UTC	Completed UTC	Requesting User (Email)	Processing User (Email)	QR-Code	Request Type	Decision
11.10.2023 08:49:38	11.10.2023 08:49:38		Sigi Schnabl (schnabl.s@macroarraydx.com)	02AYQ145	Unapprove	
11.10.2023 08:40:31	11.10.2023 08:40:31		Sigi Schnabl (schnabl.s@macroarraydx.com)	02AYQ14C	Unapprove	
11.10.2023 08:15:49	11.10.2023 12:54:53	Siegfried Schnabl (s.schnabl@gmx.at)	Sigi Schnabl (schnabl.s@macroarraydx.com)	02AYQ146	Delete request	Accepted
10.10.2023 15:30:27	10.10.2023 15:30:27		Sigi Schnabl (schnabl.s@macroarraydx.com)	91AA013	Delete	
10.10.2023 14:58:04	11.10.2023 12:54:55	Siegfried Schnabl (s.schnabl@gmx.at)	Sigi Schnabl (schnabl.s@macroarraydx.com)	02BFE3D5	Delete request	Rejected

Der User kann um das Rückgängigmachen einer Messungsfreigabe oder auch um das Löschen einer Messung anfragen. Sobald diese Anfrage von einem Systemadministrator bestätigt oder auch abgelehnt wird, erhält der User eine Bestätigung per E-Mail.




VII.6 IMPORTIEREN VON PATIENTENINFORMATIONEN AUS EINER DATEI

Patienteninformationen, die einem bestimmten QR-Code entsprechen, können in einer Import-Template.csv oder .xls Datei hinzugefügt werden. Um diese Datei herunterzuladen, gehen Sie in den Bereich "Tenantadministrator" und klicken Sie unter "Manage Measurement Data Completion" auf "Measurement data completion". Dort können Sie zwischen den Formaten .csv und .xls wählen (xls wird empfohlen).

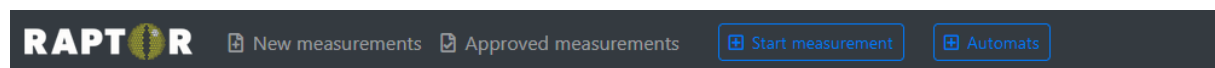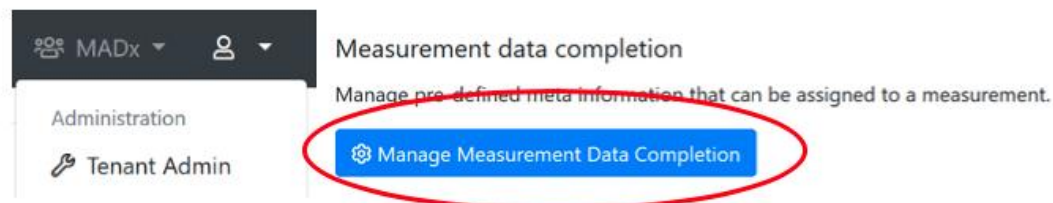

Measurement Data Completion

① No entries yet. Please import Data using the **Upload** button. You can use the **Download Template** button for an raw template.

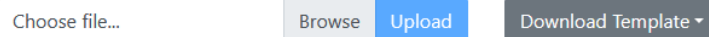

Nach dem Herunterladen der Vorlage können Sie die Patienteninformationen für den entsprechenden QR- oder Sample Code eingeben, auf Ihrem Computer speichern, das Dokument erneut hochladen und auf "Apply Changes" klicken, um die Änderungen zu speichern. Bei MAX-Messungen erfolgt die Zuordnung der Messung anhand des Sample Codes. Für ImageXplorer-Messungen muss der QR-Code in der ersten Spalte eingefügt werden. Bei Messungen mit einem MAX Gerät wird der Sample Code in die erste Spalte eingefügt jedoch kein QR-Code.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Identifier	Sample Code	Patient ID	Patient Name	Date Of Birth	Sampling Date	Assay Date	Referring Physician	Additional Info	Requisition Code
QR-Code/SampleCode	SampleCode	PatientId	PatientName	31.12.2000	01.01.2015	15.03.2015	ReferringPhysician	AdditionalInfo	RequisitionCode

Nach dem Hochladen dieser Datei werden die eingegebenen Informationen angezeigt. Diese Informationen können erneut bearbeitet und Änderungen übernommen werden.

Verify Changes

+	QR-Code	CreatedAtUtc	SampleId	PatientId	PatientName	DateOfBirth	SamplingDate	AssayDate	ReferringPhysician	AdditionalInfo
+	02AAB159	-	12	Te	Test	31.12.2000	01.01.2015	15.03.2015	Dr.A	Info

Apply Changes ← Cancel



Measurement Data Completion

Search by QR-Code or patient name.										
QR-Code	CreatedAtUtc	SampleId	PatientId	PatientName	DateOfBirth	SamplingDate	AssayDate	ReferringPhysician	AdditionalInfo	Actions
02AAB159	01.07.2022 10:44:36	12	Te	Test	31.12.2000	01.01.2015	15.03.2015	Dr.A	Info	

Wenn ein Bild aufgenommen wird und der entsprechende QR-Code mit den Informationen zuvor hochgeladen wurde, werden die Patienteninformationen automatisch in die Software importiert.

VII.7 EINEN USER ZUM ÄRZTEPORTAL HINZUFÜGEN UND EINE MESSUNG TEILEN

Messungen können mit einem Arzt oder einem anderen Benutzer geteilt werden. Dazu müssen Sie zunächst ein Benutzerkonto im Ärzteportal für den Arzt anlegen. Um ein Benutzerkonto anzulegen, gehen Sie zu "Tenant Admin → Result Sharing Portal", klicken Sie auf "Manage Users" und fügen Sie einen neuen Arzt hinzu.

Geben Sie die Benutzerinformationen ein und senden Sie eine E-Mail, um ein Passwort durch den User erstellen zu lassen. Alternativ können Sie das Passwort für den Benutzer vordefinieren. Stellen Sie sicher, dass Sie den Status des Benutzers auf "Enabled" ändern. Um eine tägliche Zusammenfassungs-E-Mail zu versenden, die den Benutzer über neue geteilte Messungen informiert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Automatically send an email summary in case new measurement(s) have been shared“.

Add new user on Result Sharing Portal

General configuration

First name:

Last name:

E-Mail address:

Status:

Enabled (user can log in) 

Username:

Password:

Send an invitation e-mail to user automatically 

☒ **Automatically send an email summary in case new measurement(s) have been shared**
This email is sent once per day as a summary, just in case a new measurement was shared.

Doctor Info Text:



This information will be printed on a patients report.

Save 

Cancel 



Nur bereits genehmigte Messungen können geteilt werden. Zu diesem Zweck gehen Sie bitte auf die Registerkarte "Freigegebene Messungen", klicken Sie auf die Detailseite einer Messung, gehen Sie auf das Menüsymbol und wählen Sie "Shares anzeigen".



Wählen Sie dann den Benutzer, mit dem Sie die Messung teilen möchten, und klicken Sie auf "Teilen". Danach können Sie einen Link per E-Mail senden, mit dem der Benutzer auf diese Messung zugreifen kann.

≡ Share

Sie möchten eine Messung mit einem Benutzer des Ärzteportals teilen. Beachten Sie, dass der Arzt Zugriff auf die von und zugehörige Daten wie Patienten- oder Probeninformationen zur Messung. Sobald Sie eine Messung freigegeben haben, können Sie sie mit einem Benutzer des Ärzteportals teilen.

QR-Code: 02AIN390

Teilen mit : Aaron Aaron (aaron@griton.net) ▼

Wenn Sie einen bestimmten Benutzer des Benutzerportals nicht finden können, gehen Sie in die [Tenant-Administration](#), um die Liste der verfügbaren Benutzer des Benutzerportals zu konfigurieren.

↪ Teilen

Abbrechen

Geteilte Messungen sind mit dem folgenden Symbol in der Liste der genehmigten



Messungen gekennzeichnet:


Geteilte Messungen können auch von einem Tenant zurückgezogen werden, durch Klicken auf „Revoke“:

User	Link	Shared
RP Bak	https://resultshare.raptor-server.com/s/07PXEPc7ZNYthM4PdRfmc4NR5pUtWq5FJcqOY7Ry6oEx08USj	7 months ago Revoke



VII.8 ABMELDEN

Um sich vom RAPTOR SERVER abzumelden, klicken Sie auf "Abmelden " und schließen Sie das Fenster.

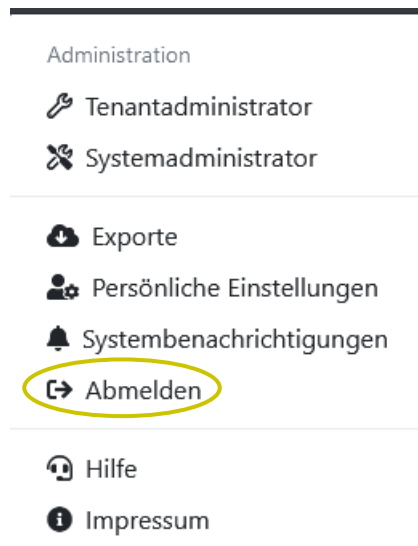

VII.9 ÄRZTEPORTAL

Das Ärzteportal kann über <https://resultshare.raptor-server.com> erreicht werden. Das Ärzteportal ist für on-prem Installationen von RAPTOR SERVER nicht verfügbar.

Nach dem Login erscheint die Seite mit allen geteilten Messungen.

Measurements

These are the measurements that are available for you. You may view the details of each measurement, or download the report PDF file.

Anamneses

#	Measurement	Product	Patient	Sample	Date
1	02COS008	ALEX ²		3100004258	7/15/2026
2	07AAI00A	ALEX Food		3100004258	7/15/2026
3	06AAJ028	ALEX Air			7/15/2026

Die Liste der geteilten Messungen kann nach QR-Code, Produkttyp, Produktname, Patientenname, Proben-ID oder Datum sortiert werden.

Durch Klicken auf den QR-Code einer Messung öffnet sich eine neue Seite. Auf dieser Seite kann die Reportsprache für jede Messung einzeln ausgewählt werden.

Nach der Auswahl der Sprache kann eine Interpretation angefordert werden, indem man auf „Neue RAVEN²-Auswertung anfordern“ klickt. Der Nutzer wird dann aufgefordert, einen Fragebogen zur Patientenanamnese auszufüllen. Der Bericht kann durch Klicken auf



„Bericht herunterladen“ heruntergeladen werden, woraufhin sich ein neues Fenster öffnet, in dem der Bericht im PDF-Format angezeigt wird.

Durch Klicken auf „Anamnesen“ in der oberen rechten Ecke des Dashboards kann der Benutzer eine neue Anamnese anlegen und alle vorhandenen Anamnesen einsehen, die zur Erstellung der textuellen Auswertung der Messung herangezogen werden.

Anamneses

You can store anamneses for your patients, to assign them later to a measurement once it is available. An anamnesis then can be used to create a textual interpretation of the measurement.

Create a new anamnesis

Date	QR-Code	Sample Code	Patient	Notes
7/15/2026	02CQS008			Start anamnesis questionnaire

Beim Anlegen einer neuen Anamnese kann der Benutzer Angaben wie die Patientendaten bearbeiten oder bei Bedarf Notizen hinzufügen.

Edit anamnesis

Edit the details of an anamnesis here. This information is especially useful to know which anamneses is for what patient.

QR-Code E.g. 02ABC123	Sample Code E.g. 123456	Patient Code E.g. 987654	Patient Name E.g. Maria Musterfrau
Language English (en) ▼	Region Temperate ▼		
Notes E.g. Questionnaire filled by patient via our tablet.			
Save Cancel			

Der Anamnese-Fragebogen kann dann durch Klicken auf „Anamnese-Fragebogen starten“ aufgerufen werden. Der Patient scannt den angezeigten QR-Code, um den Fragebogen zu starten, der entweder direkt während des Arztbesuchs oder privat zu Hause ausgefüllt werden kann. Eine über das Ärzteportal erstellte oder aktualisierte Anamnese kann nicht durch den RAPTOR SERVER überschrieben werden.

Um sich vom Ärzteportal abzumelden, klicken Sie auf "Abmelden" und schließen Sie das Fenster.

Deutsch (de) ▼
Passwort ändern
Abmelden



VII.10 TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Wenn Sie Fragen, Erfahrungen oder Schwierigkeiten bezüglich der ImageXplorer- oder RAPTOR SERVER Software haben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Distributor.

VII.11 TECHNISCHE DATEN


Der Raptor SERVER kann über einen Webbrowser erreicht werden. Die Anwendung ist für Google Chrome auf Windows 10 und Windows 11 optimiert. Folgende Rechte müssen zumindest auf dem ausgehenden Port 443 gegeben sein, um die Anwendung zu verwenden:

- <https://www.raptor-server.com/>
- <https://api.raptor-server.com>
- <https://resultshare.raptor-server.com>
- <https://www.madx.com/>

VII.12 FEHLERBEHEBUNG

Die folgenden Fehler sind die häufigsten und werden deshalb hier näher erläutert.

Server-Verbindung zu www.raptor-server.com ist fehlgeschlagen (Agent markiert Verbindung in roter Farbe):

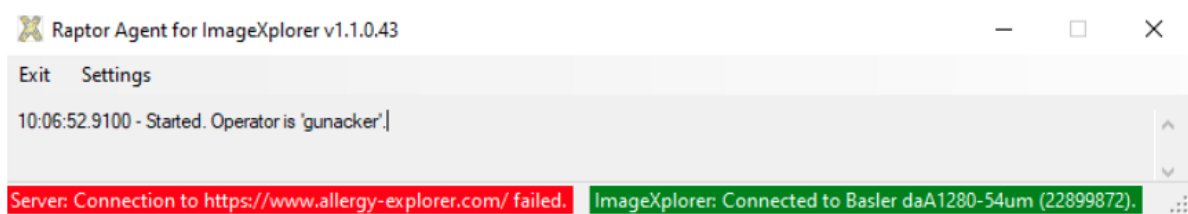

Mögliche Lösungen:

- Internetverbindung prüfen
- Klicken Sie auf Einstellungen und prüfen Sie, ob die RAPTOR SERVER URL (<https://www.raptor-server.com/>) korrekt ist
- Klicken Sie auf Einstellungen und überprüfen Sie, ob der ImageXplorer-Schlüssel korrekt ist und mit dem für den Tenant auf RAPTOR SERVER angegebenen Schlüssel übereinstimmt



Settings

Please enter the settings for your ImageXplorer. You can find your ImageXplorer key when you log in to Raptor. Please contact support if you're not sure what the proper settings are for your ImageXplorer.

Raptor URL:

ImageXplorer Key:

Continue

ImageXplorer-Verbindung fehlgeschlagen (Agent markiert Verbindung in roter Farbe):

Raptor Agent for ImageXplorer v1.1.0.43

Exit Settings Open Raptor

10:06:52.9100 - Started. Operator is 'gunacker'.
 10:11:33.9399 - Disconnecting from server ...
 10:11:35.0321 - Server confirms successful authentication to tenant MADx.]

Server: Connected to MADx. ImageXplorer: Connection failed.

Mögliche Lösungen:

- Prüfen Sie, ob ImageXplorer an den Computer angeschlossen ist
- Verbinden Sie ImageXplorer erneut mit dem Computer (entfernen Sie das USB-Kabel und stecken Sie es wieder ein)
- Klicken Sie auf Einstellungen und prüfen Sie, ob der ImageXplorer-Schlüssel korrekt und derselbe wie bei RAPTOR SERVER ist

Settings

Please enter the settings for your ImageXplorer. You can find your ImageXplorer key when you log in to Raptor. Please contact support if you're not sure what the proper settings are for your ImageXplorer.


Raptor URL:

ImageXplorer Key:

Continue



Start der Messung ist nicht möglich:

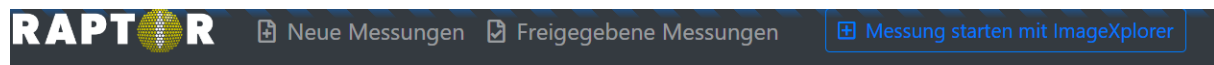

Der ImageXplorer testname kann nicht verwendet werden, da es einen ConfigXplorer-Scan benötigt.


[Gehen Sie zu den ImageXplorer-Einstellungen](#)

Mögliche Lösungen:

- Prüfen Sie, ob ImageXplorer angeschlossen ist
- Prüfen Sie, ob der letzte ConfigXplorer Scan durchgeführt wurde

Fehlgeschlagene Übertragung der aufgenommenen Messung zum RAPTOR-SERVER:

Jede Messung besteht aus 257 Einzelbildern (256 Bilder des ROI-Ausschnittes und 1 Bild des QR-Codes). Falls aufgrund einer fehlerhaften oder instabilen Übertragung weniger Bilder übertragen werden, erscheint in der Bildaufnahme im RAPTOR-SERVER die Fehlermeldung „Analysis Error: Insufficient data transfer – check connection“. In diesem Fall muss die Messung neu gestartet werden.

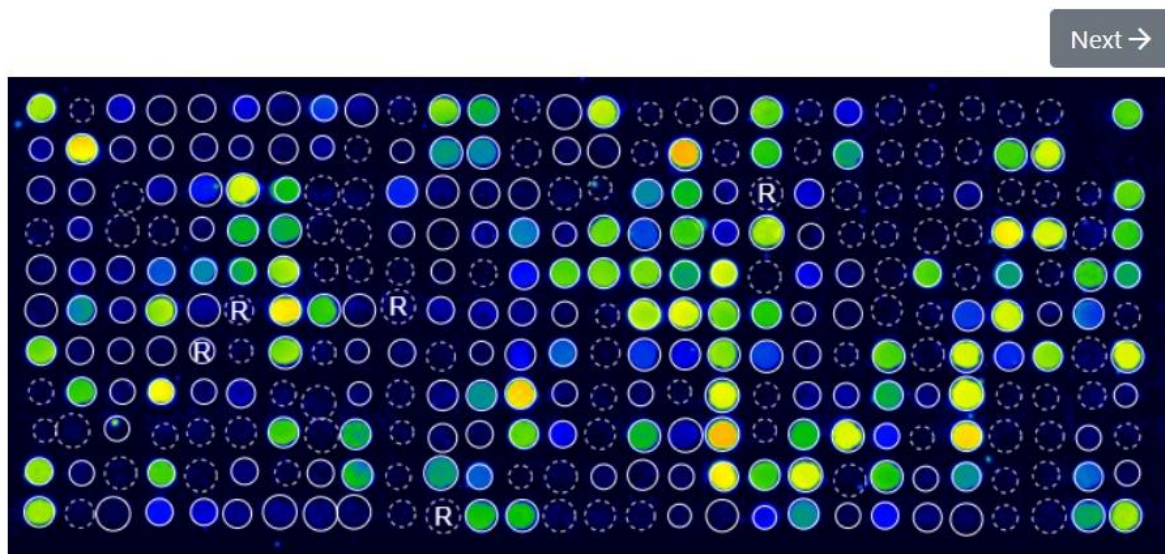

Received: 06.04.2023 13:37

Analysis: 06.04.2023 13:37

ImageXplorer: 40287249

Automatic QC: X Failed

Analysis Error: Insufficient data transfer - check connection.



Mögliche Lösungen:

- Verwenden sie nur das Original USB-Kabel.
- Verwenden sie einen anderen USB-Port am Computer, mit dem der ImageXplorer verbunden ist.
- Der ImageXplorer muss über einen USB 3.0/3.1 Port verbunden werden. Notebooks oder Laptops haben einen sogenannten „always-on“ USB-Port (in der Regel jener Port neben der Lademöglichkeit). Wenn möglich, verwenden sie diesen Anschluss.
- Verbinden Sie den ImageXplorer erneut mit dem Computer (entfernen Sie das USB-Kabel und stecken Sie es wieder ein).

Wenn Sie noch Fragen oder Probleme mit Produkten und Services von MacroArray Diagnostics haben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Distributor.

VIII. ÄNDERUNGSHISTORIE

Version	Beschreibung	Ersetzt
22.0	VII.1.3 ergänzt, dass MFA für alle neu hinzugefügten Tenants aktiviert ist. VII.1.8 MAX Run Log ist im QC-Protokoll verlinkt. VII.1.10 Möglichkeit hinzugefügt, bestimmte Messdetails nach der Freigabe zu ändern. VII.9 Arbeitsablauf des Ärzteportals und Screenshots aktualisiert.	21.0



RAPTOR SERVER Analyse Software in Kombination mit ALEX², ALEX Air, ALEX Food und ALEX³ Testkit:



RAPTOR SERVER Analysesoftware in Kombination mit anderen MADx-Testkits:



© Copyright by MacroArray Diagnostics

MacroArray Diagnostics (MADx)

Lemböckgasse 59, Top 4

1230 Wien, Austria

+43 (0)1 865 2573

www.madx.com

Versionsnummer: 22-IFU-01-DE-23

Datum der Ausgabe: 2026-08