

Guide för byte till Dexcom G7

Här följer en kort guide som förklarar hur du enkelt byter till Dexcom G7-systemet för kontinuerlig glukosmätning (CGM).

Innan du byter

● Kontrollera:

i


- att du har en Dexcom G7-sensor till hands
- att du använder den senaste versionen av appen CamAPS FX
- att din smarttelefon är kompatibel med CamAPS FX och din sensor
 - Läs mer om kompatibilitet på <https://camdiab.com/se/faq>.

Nyheter med Dexcom G7

- Sändare och sensor i ett
- Snabbare uppvärmning (cirka 30 minuter)
- 12 timmars tidsfrist för att byta sensor, så att du kan välja att byta den när det passar dig.

Bra att veta

- Du kan byta från G7-appen till CamAPS FX utan att behöva byta G7-sensorn.
- Du kan byta mellan kompatibla sensortyper när du vill, men det går bara att ha en ansluten CGM åt gången.
- Håll telefonen nära sensorn under parkopplingen.
- Om parkopplingen misslyckas kan du stänga av och slå på Bluetooth och försöka igen.

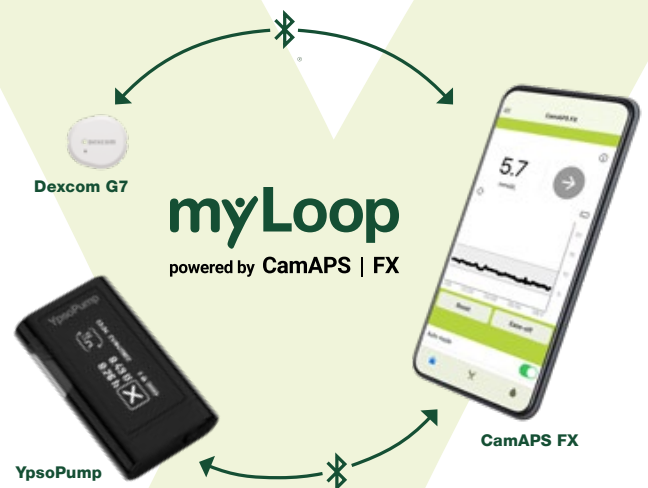

Så byter du från Dexcom G6 till Dexcom G7

i Om du redan har ett Dexcom-konto ska du hålla reda på dina inloggningsuppgifter till Dexcom eftersom du kommer att behöva dem för att ställa in G7 i CamAPS FX. Du hittar dina inloggningsuppgifter för Dexcom i Dexcom G6/G7-appen.

01 Använder du redan en Dexcom G7-sensor i G7-appen?

- Om du tidigare har använt Dexcom G7-appen ska du ta bort parkopplingen i G7-appen, stänga av appen och vänta i 15 minuter, alternativt avinstallera G7-appen för att säkerställa felfri anslutning med CamAPS FX.

Om du aldrig tidigare har parkopplat din YpsoPump med mobilen **ska du gå vidare till steg 4.**

02 Använder du en Dexcom G6-sensor i CamAPS FX?

- Om du har en pågående Dexcom G6-session i appen CamAPS FX ska du stoppa den pågående G6-sensorsessionen när du är redo för bytet.
- Ta bort Dexcom G6-sensorn från kroppen enligt instruktionerna.

03 Är Dexcom G7 synlig i CGM-menyn i CamAPS FX-appen?

Om Dexcom G7 inte är synlig på skärmen för CGM-val:

iPhone (iOS)

- Anteckna först din aktuella **totala dygnsdos (TDD)** och din **kroppsvikt**.
- Öppna Bluetooth®-inställningarna på din iPhone, välj din pump och tryck på "**Glöm den här enheten**".
- Logga ut från CamAPS FX-appen (**Meny → Konto → Logga ut**) och logga sedan in igen.
- Följ anvisningarna på skärmen för att återansluta pumpen och CGM-systemet.

Android

- Anslut din YpsoPump på nytt via **Pumpmenyn**.
Dexcom G7 ska nu vara synlig på skärmen för CGM-val.

04 Sätt in en Dexcom G7-sensor

- Applicera Dexcom G7-sensorn enligt bruksanvisningen från Dexcom.
- Kontrollera att sensorn sitter fast ordentligt.

05 Koppla Dexcom G7 i appen CamAPS FX


- Öppna CamAPS FX.
- Gå till Meny → CGM
- Välj Dexcom G7.
- Följ anvisningarna på skärmen för att parkoppla sensorn.
 - Du blir ombedd att logga in på ditt Dexcom-konto och godkänna datadelning med Dexcom.
Du behöver bara göra det här steget första gången du kopplar en Dexcom G7-sensor eller om du ominstallerar appen.
- Vänta tills Dexcom G7 har slutfört uppvärmningen (cirka 30 minuter från när du satte in sensorn).

Behöver du hjälp? Om du får problem:

- Se hjälpaavsnittet i appen CamAPS FX eller på webbplatsen för mylife Diabetes Care.
- Kontakta kundtjänsten för mylife Diabetes Care.
- Om du har frågor som gäller sensorn kan du vända dig till Dexcom-supporten.

i Den här broschyren vänder sig till dig som använder myLoop. Du ska alltid följa hälso- och sjukvårdspersonalens råd när du byter komponenter i din diabetesbehandling.

Friskrivning: Produktbilderna är enbart avsedda som illustration. // mylife och YpsoPump är registrerade varumärken som tillhör mylife Diabetes Care AG eller dess dotterbolag. // Dexcom, Dexcom G6 och Dexcom G7 är registrerade varumärken som tillhör Dexcom, Inc. i Förenta Staterna och/eller andra länder. // CamAPS är ett registrerat varumärke som tillhör CamDiab Ltd. // Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

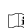 För säkerhetsinformation om nämnda produkter, se bruksanvisningen eller www.mylife-diabetescare.se/saekerhet