

Guía de cambio a Dexcom G7

Esta guía resumida explica cómo cambiar sin problemas al sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) Dexcom G7.

Antes del cambio

● Asegúrese de:

i


- tener a mano un sensor Dexcom G7
- utilizar la versión más reciente de la app CamAPS FX
- que su smartphone sea compatible con CamAPS FX y el sensor
 - Visite <https://camdiab.com/faq> para obtener información sobre la compatibilidad

¿Qué novedades incluye Dexcom G7?

- Combinación de sensor y transmisor
- Calentamiento más rápido (aprox. 30 minutos)
- Período de gracia de 12 horas que le permite cambiar el sensor cuando le resulte más práctico

A tener en cuenta

- Puede pasar de la aplicación G7 a la app CamAPS FX sin cambiar el sensor G7
- Puede cambiar entre tipos de sensor compatibles en cualquier momento, pero solo se puede conectar un MCG a la vez
- Durante el emparejamiento, mantenga el teléfono cerca del sensor
- Si el emparejamiento fallara, desactive y vuelva a activar Bluetooth y reinténtelo

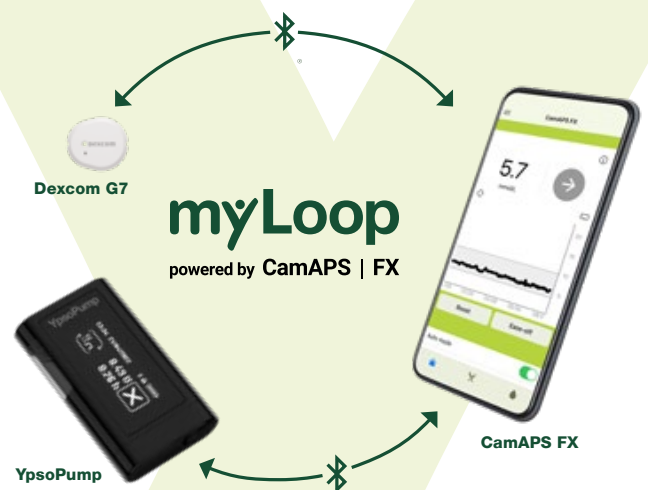

Cómo cambiar de Dexcom G6 a Dexcom G7

- i** Si ya dispone de una cuenta Dexcom, asegúrese de recordar sus datos de acceso a Dexcom, ya que los necesitará durante la configuración de G7 en CamAPS FX. Encontrará sus datos de acceso a Dexcom en la aplicación Dexcom G6/G7.

01 ¿Ya utiliza un sensor Dexcom G7 en la aplicación G7?

- Si ya utilizaba la aplicación Dexcom G7, elimine el emparejamiento en la aplicación G7, fuerce el cierre de la aplicación y espere 15 minutos, o simplemente desinstale la aplicación G7 para permitir una conectividad adecuada con CamAPS FX.

Si nunca había emparejado su YpsoPump con el teléfono, **continúe con el paso 04**

02 ¿Utiliza actualmente un sensor Dexcom G6 en CamAPS FX?

- Si está ejecutando una sesión de Dexcom G6 en la app CamAPS FX, pare la sesión actual del sensor G6 cuando esté listo.
- Quítese el sensor Dexcom G6 según las instrucciones

03 ¿Aparece Dexcom G7 en el menú CGM de la aplicación CamAPS FX?

Si Dexcom G7 no aparece en la pantalla de selección de CGM:

iPhone (iOS)

- Anote primero su **dosis diaria total (TDD)** y su **peso corporal**.
- Abra los ajustes de Bluetooth® de su iPhone, seleccione la bomba y pulse «**Olvidar este dispositivo**».
- Cierre sesión en la aplicación CamAPS FX (**Menú → Cuenta → Cerrar sesión**) y vuelva a iniciarla.
- Siga las instrucciones en pantalla para volver a conectar la bomba y el sistema CGM.

Android

- Vuelva a conectar su YpsoPump mediante el **Menú de la bomba**.
Dexcom G7 debería aparecer ahora en la pantalla de selección de CGM.

04 Insertar un sensor Dexcom G7

- Colóquese el sensor Dexcom G7 según las instrucciones de uso de Dexcom
- Asegúrese de que el sensor esté firmemente acoplado

05 Conectar Dexcom G7 en la app CamAPS FX

- Abra CamAPS FX
- Vaya al menú → MCG
- Seleccione Dexcom G7
- Siga los pasos en pantalla para emparejar el sensor
 - Se le pedirá que inicie sesión en su cuenta Dexcom y que acepte el intercambio de datos con Dexcom. Este paso solo será necesario la primera vez que vincule un sensor Dexcom G7 o si reinstala la aplicación
- Espere a que finalice el período de calentamiento de Dexcom G7 (unos 30 minutos desde la aplicación del sensor)

¿Necesita ayuda? Si tiene problemas:

- Consulte la ayuda integrada en la app CamAPS FX o el sitio web de mylife Diabetes Care
- Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de mylife Diabetes Care
- Para preguntas relacionadas con el sensor, diríjase al servicio de asistencia de Dexcom

- i** Este folleto está dirigido a los usuarios de myLoop. Siga siempre las indicaciones de su profesional sanitario cuando cambie algún componente relacionado con el tratamiento de la diabetes.

Aviso legal: Las imágenes del producto solo son para fines ilustrativos. // mylife e YpsoPump son marcas registradas de mylife Diabetes Care AG o de sus filiales. // Dexcom, Dexcom G6 and Dexcom G7 son marcas registradas de Dexcom, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. // CamAPS es una marca registrada de CamDiab Ltd. // Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Para la información de seguridad sobre los productos mencionados, ver las instrucciones de uso o www.mylife-diabetescare.es/seguridad