



**myPump®
Reservoir**

**Komfortabel &
nachhaltig**

Nutzen Sie die Nachfülloption!

Müll reduzieren

Wertvolle Ressourcen schonen






DiabetesCare

So können Sie Ihr myPump+ Reservoir nachfüllen

Schritt 1: Neues Reservoir befüllen

- Öffnen Sie ein neues Reservoir.
- Befüllen Sie das neue Reservoir gemäß der Gebrauchsanweisung, kennzeichnen Sie es mit dem Fülldatum und lagern Sie es im Kühlschrank.
- **Lassen Sie den Transferadapter auf der Insulin-Durchstechflasche stecken.**
Gehen Sie direkt zu Schritt 2.

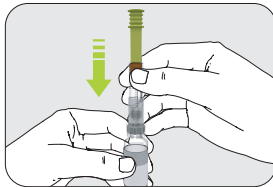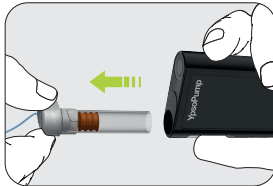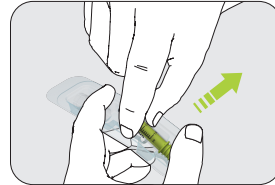

Schritt 2: Nachfüllen während des Gebrauchs

- Nehmen Sie das leere Reservoir aus Ihrer Pumpe.
- Füllen Sie es gemäß der Gebrauchsanweisung wieder nach.
- Setzen Sie das nachgefüllte Reservoir anschließend wieder in Ihre Pumpe ein.
- Entsorgen Sie den Transferadapter.

Schritt 3: Reservoir aus dem Kühlschrank tauschen

- Wenn das Reservoir in der Pumpe erneut leer ist, tauschen Sie es gegen das gefüllte Reservoir aus dem Kühlschrank.
- Entsorgen Sie das leere, bereits zweimal verwendete Reservoir.
Jedes Reservoir kann innerhalb von 7 Tagen nach der ersten Befüllung einmal nachgefüllt werden.



myPump+ Reservoir

Die nachhaltige Lösung

Das myPump+ Reservoir kann nach der ersten Verwendung innerhalb von 7 Tagen einmal nachgefüllt werden.



Nachhaltig

Reduktion des Kunststoff- und Glasverbrauchs um bis zu 50 %



Flexibel

Kompatibel mit einer großen Auswahl an schnellwirksamen Insulinen



Benutzerfreundlich

Intuitive und einfache Handhabung durch einen unkomplizierten Nachfüllvorgang



Zuverlässig und sicher

In der bewährten Qualität, die Sie von Ihrer YpsoPump kennen

Weitere Informationen zur Verwendung des myPump+ Reservoir finden Sie in der Gebrauchsanweisung oder auf unserer Website: www.mylife-diabetescare.com

Jetzt Handhabungsvideo ansehen und erfahren, wie Sie Ihr Reservoir doppelt so lange nutzen können.



Disclaimer: Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung. // mylife, myPump+ und YpsoPump sind registrierte Handelsmarken von mylife Diabetes Care AG oder ihren Tochtergesellschaften.

-  Sicherheitsinformationen zu den genannten Produkten finden Sie in der Gebrauchsanweisung oder unter www.mylife-diabetescare.de/sicherheit
-  Sicherheitsinformationen zu den genannten Produkten finden Sie in der Gebrauchsanweisung oder unter www.mylife-diabetescare.at/sicherheit
-  Sicherheitsinformationen zu den genannten Produkten finden Sie in der Gebrauchsanweisung oder unter www.mylife-diabetescare.ch/sicherheit



DiabetesCare

mylife Diabetes Care GmbH
Höchster Straße 70 • 65835 Liederbach
www.mylife-diabetescare.de

mylife Diabetes Care GmbH
Am Euro Platz 2 • 1120 Wien
www.mylife-diabetescare.at

mylife Diabetes Care AG
Markt Schweiz
Lyssachstrasse 40 • 3400 Burgdorf
www.mylife-diabetescare.ch



700100183/11006188-DE-AT-CH-de-V01