

## Gids voor overschakeling op Dexcom G7

Deze beknopte gids legt uit hoe u soepel overschakelt op het Dexcom G7-systeem voor continue glucosemeting (CGM).

### Voordat u overschakelt

● **Zorg ervoor dat:**

**i**


- U een Dexcom G7-sensor bij de hand hebt
- U gebruikmaakt van de nieuwste versie van de CamAPS FX-app
- Uw smartphone compatibel is met CamAPS FX en uw sensor
  - Kijk op <https://camdiab.com/faq> voor advies over compatibiliteit

### Wat is er nieuw aan Dexcom G7?

- Alles-in-één sensor en zender
- Snellere opwarming (ca. 30 minuten)
- Extra tijd van 12 uur biedt u de flexibiliteit om uw sensor te vervangen wanneer het u uitkomt

### Goed om te weten

- U kunt overschakelen van gebruik van de G7-app naar gebruik van de CamAPS FX-app zonder uw G7-sensor te hoeven vervangen
- U kunt op elk moment schakelen tussen compatibele sensortypen, maar er kan slechts één CGM tegelijk worden verbonden
- Houd uw telefoon tijdens het koppelen dicht bij de sensor
- Als het koppelen mislukt, schakel Bluetooth dan uit en weer in en probeer het opnieuw

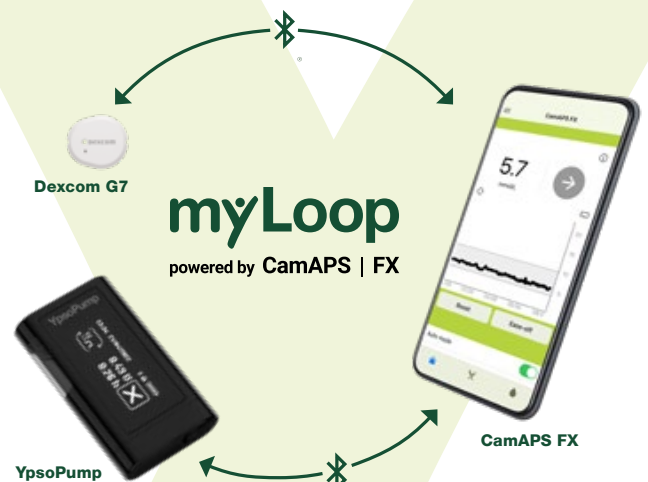

# Overschakelen van Dexcom G6 op Dexcom G7

- i** Als u al een Dexcom-account hebt, zorg er dan voor dat u uw Dexcom-inloggegevens onthoudt, omdat u deze nodig hebt tijdens het instellen van de G7 in CamAPS FX. U kunt uw Dexcom-inloggegevens vinden in de Dexcom G6/G7-app.

## 01 Gebruikt u al een Dexcom G7-sensor in de G7-app?

- Als u eerder al de Dexcom G7-app gebruikte, verwijder dan de koppeling in de G7-app, stop de app geforceerd, en wacht 15 minuten, of deïnstalleer de G7-app gewoon voor de juiste connectiviteit tijdens het gebruik van CamAPS FX.

Als u uw YpsoPump nooit met uw telefoon gekoppeld hebt, **ga dan naar stap 04**

## 02 Gebruikt u op dit moment een Dexcom G6-sensor in CamAPS FX?

- Als u een actieve Dexcom G6-sessie in de CamAPS FX-app hebt, stop dan de huidige G6-sensorsessie zodra u klaar bent.
- Verwijder de Dexcom G6-sensor van uw lichaam volgens de instructies

## 03 Is Dexcom G7 zichtbaar in het CGM-menu van de CamAPS FX-app?

Als Dexcom G7 niet zichtbaar is in het CGM-selectiescherm:

### iPhone (iOS)

- Noteer eerst uw huidige **totale dagelijkse dosis (TDD)** en uw **lichaamsgewicht**.
- Open de Bluetooth®-instellingen van uw iPhone, selecteer uw pomp en tik op "**Vergeet dit apparaat**".
- Meld u af bij de CamAPS FX-app (**Menu → Account → Afmelden**) en meld u vervolgens opnieuw aan.
- Volg de instructies op het scherm om uw pomp en CGM-systeem opnieuw te verbinden.

### Android

- Verbind uw YpsoPump opnieuw via het **Pompmenu**.  
De Dexcom G7 zou nu zichtbaar moeten zijn in het CGM-selectiescherm.

## 04 Plaats een Dexcom G7-sensor

- Breng de Dexcom G7-sensor aan volgens de gebruiksaanwijzing van Dexcom
- Zorg ervoor dat de sensor goed is bevestigd

## 05 Dexcom G7 verbinden in de CamAPS FX-app


- Open CamAPS FX
- Ga naar Menu → CGM
- Selecteer Dexcom G7
- Volg de stappen op het scherm om de sensor te koppelen
  - U wordt gevraagd om in te loggen bij uw Dexcom-account en het delen van gegevens met Dexcom te accepteren. Deze stap is alleen nodig bij de eerste keer dat u een Dexcom G7-sensor koppelt of als u de app opnieuw installeert
- Wacht tot de opwarmperiode van de Dexcom G7 is voltooid (~30 minuten vanaf het moment waarop de sensor is aangebracht)

## Hebt u hulp nodig? Als u problemen ondervindt:

- Raadpleeg de helpfunctie in de CamAPS FX-app of kijk op de website van mylife Diabetes Care
- Neem contact op met de klantenservice van mylife Diabetes Care
- Neem voor vragen met betrekking tot de sensor contact op met Dexcom Support

- i** Deze flyer is bedoeld voor myLoop gebruikers. Volg altijd het advies van uw diabetesbehandelaar op wanneer u onderdelen van uw diabetestherapie verandert.

**Vrijwaringsclausule:** De afbeeldingen van de producten dienen alleen ter illustratie. // mylife en YpsoPump zijn geregistreerde handelsmerken van mylife Diabetes Care AG of aan haar gelieerde ondernemingen. // Dexcom, Dexcom G6 en Dexcom G7 zijn geregistreerde handelsmerken van Dexcom, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. // CamAPS is een geregistreerd handelsmerk van CamDiab Ltd. // Andere productnamen en handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

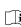 Voor het veilig gebruiken van genoemde producten verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing of [www.mylife-diabetescare.nl/veiligheid](http://www.mylife-diabetescare.nl/veiligheid)