

## Anleitung zum Wechsel auf Dexcom G7

In dieser kurzen Anleitung erfahren Sie, wie Sie problemlos auf das Dexcom G7-System zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) umsteigen können.

### Bevor Sie wechseln

● **Bitte stellen Sie sicher, dass:**

**i**

- Sie einen Dexcom G7-Sensor zur Verfügung haben
- Sie die neueste Version der CamAPS FX App verwenden
- Ihr Smartphone mit CamAPS FX und Ihrem Sensor kompatibel ist
  - Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter <https://camdiab.com/faq>


### Was ist neu beim Dexcom G7?

- Sensor und Transmitter kombiniert in einem All-in-One-System
- Schnellere Aufwärmphase (ca. 30 Minuten)
- 12-stündige Toleranzzeit, die Ihnen die Flexibilität bietet, Ihren Sensor zu einem für Sie passenden Zeitpunkt zu wechseln

### Gut zu wissen

- Sie können von der G7-App zur CamAPS FX App wechseln, ohne einen neuen G7-Sensor starten zu müssen
- Sie können jederzeit zwischen kompatiblen Sensoren (CGM) wechseln, es kann jedoch jeweils nur ein Sensor verbunden sein
- Belassen Sie Ihr Smartphone während der Kopplung in der Nähe des Sensors
- Sollte die Kopplung fehlschlagen, schalten Sie Bluetooth aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut

**i** **Dieses Informationsblatt richtet sich an myLoop-Nutzer. Befolgen Sie bei einer Änderung der Komponenten Ihrer Diabetes-Therapie stets die Anweisungen Ihres Diabetes-Teams.**

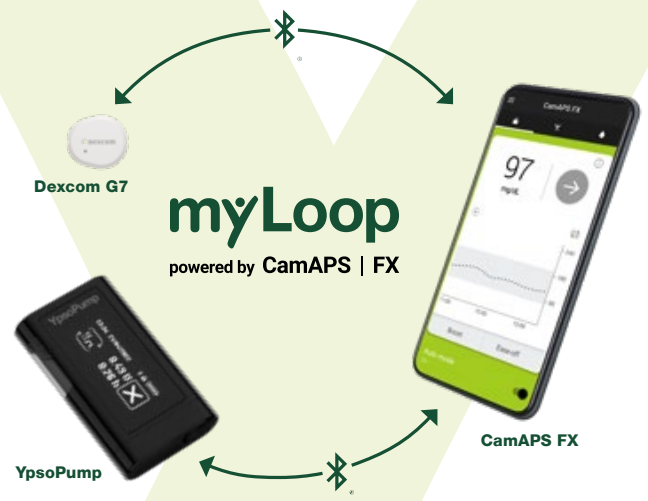

# So wechseln Sie von Dexcom G6 zu Dexcom G7

**i** Wenn Sie bereits über ein Dexcom-Konto verfügen, merken Sie sich bitte Ihre Dexcom-Zugangsdaten, da Sie diese bei der Einrichtung des Dexcom G7 in CamAPS FX benötigen. Ihre Dexcom-Zugangsdaten finden Sie in der Dexcom G6/G7-App.

## 01 Sie verwenden bereits einen Dexcom G7 Sensor in der G7-App?

- Wenn Sie bisher die Dexcom G7-App verwendet haben, entfernen Sie die Kopplung in der G7-App, beenden Sie die App mittels "App beenden erzwingen" und warten Sie 15 Minuten, oder deinstallieren Sie die G7-App einfach, um eine einwandfreie Verbindung mit CamAPS FX zu ermöglichen. Wenn Sie Ihre YpsoPump noch nie mit Ihrem Smartphone gekoppelt haben, **fahren Sie mit Schritt 04 fort.**

## 02 Sie verwenden derzeit einen Dexcom G6 Sensor in CamAPS FX?

- Wenn in Ihrer CamAPS FX App eine Dexcom G6-Sitzung läuft, beenden Sie die aktuelle G6-Sensorsitzung, sobald Sie bereit sind.
- Entfernen Sie den Dexcom G6-Sensor anweisungsgemäß von Ihrem Körper.

## 03 Erscheint der Dexcom G7 im CGM-Menü der CamAPS FX App?

Falls der Dexcom G7 nicht im CGM-Auswahlbildschirm ersichtlich ist:

### iPhone (iOS)

- Notieren Sie bitte zunächst Ihre aktuelle **Gesamttagessdosis (Total Daily Dose, TDD)** sowie Ihr **Körpergewicht**.
- Öffnen Sie die Bluetooth®-Einstellungen Ihres iPhones, wählen Sie Ihre Pumpe aus und tippen Sie auf **"Dieses Gerät ignorieren/vergessen"**.
- Melden Sie sich in der CamAPS FX App ab (Menü → Konto → Abmelden) und anschliessend wieder an.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Pumpe und Ihr CGM-System erneut zu verbinden.

### Android

- Verbinden Sie Ihre Pumpe im **Pumpenmenü** erneut. Der Dexcom G7 sollte nun im CGM-Auswahlbildschirm sichtbar sein.

## 04 Einen Dexcom G7 Sensor setzen

- Bringen Sie den Dexcom G7-Sensor gemäß der Gebrauchsanweisung von Dexcom an.
- Stellen Sie sicher, dass der Sensor fest sitzt.


## 05 Den Dexcom G7 Sensor in der CamAPS FX App verbinden

- Öffnen Sie CamAPS FX.
- Gehen Sie auf Menü → CGM.
- Wählen Sie Dexcom G7.
- Befolgen Sie die Schritte auf dem Bildschirm, um den Sensor zu koppeln.
  - Sie werden aufgefordert, sich bei Ihrem Dexcom-Konto anzumelden und der Weitergabe von Daten an Dexcom zuzustimmen. Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie erstmals einen Dexcom G7-Sensor verbinden oder wenn Sie die App neu installieren.
- Warten Sie, bis die Aufwärmphase des Dexcom G7 abgeschlossen ist (ca. 30 Minuten nach dem Anbringen des Sensors).

## Sie brauchen Hilfe? Sollten Probleme auftreten:

- Lesen Sie die Hilfe in der CamAPS FX App oder besuchen Sie die mylife Diabetes Care Website.
- Wenden Sie sich an den Kundenservice von mylife Diabetes Care.
- Bei Fragen zum Sensor wenden Sie sich bitte an den Dexcom Support.

**Disclaimer:** Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung. // mylife und YpsoPump sind registrierte Handelsmarken von mylife Diabetes Care AG oder ihren Tochtergesellschaften. // Dexcom, Dexcom G6 und Dexcom G7 sind registrierte Handelsmarken von Dexcom, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. // CamAPS ist eine eingetragene Marke von CamDiab Ltd. // Die Bluetooth®-Wortmarke und die Bluetooth®-Logos sind registrierte Handelsmarken der Bluetooth SIG, Inc. und jeder Gebrauch dieser Marken durch mylife Diabetes Care erfolgt unter Lizenz. // Andere Handelsmarken und Handelsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

 Sicherheitsinformationen zu den genannten Produkten finden Sie in der Gebrauchsanleitung oder unter [www.mylife-diabetescare.de/sicherheit](http://www.mylife-diabetescare.de/sicherheit) bzw. [www.mylife-diabetescare.at/sicherheit](http://www.mylife-diabetescare.at/sicherheit)



**DiabetesCare**

mylife Diabetes Care GmbH • Höchster Straße 70 • 65835 Liederbach • [www.mylife-diabetescare.de](http://www.mylife-diabetescare.de)  
mylife Diabetes Care GmbH • Am Euro Platz 2 • 1120 Wien • [www.mylife-diabetescare.at](http://www.mylife-diabetescare.at)