

Dexcom G7 -järjestelmään siirtymistä koskevat ohjeet

Tässä lyhyessä ohjeessa kerrotaan, miten siirryt helposti käyttämään Dexcom G7 jatkuvan glukoosinseurannan järjestelmää.

Ennen kuin aloitat

● Varmista, että:

i


- sinulla on Dexcom G7 -sensori käytettävissäsi
- käytät CamAPS FX -sovelluksen uusinta versiota
- älypuhelimesi on yhteensopiva CamAPS FX -sovelluksen ja sensorisi kanssa
 - Katso yhteensopivuutta koskevat tiedot osoitteesta <https://camdiab.com/faq>

Mitä uutta Dexcom G7 -järjestelmässä on?

- All-in-one-sensori ja -lähetin
- Nopeampi lämpeneminen (noin 30 minuuttia)
- 12 tunnin lisäajan ansiosta voit vaihtaa sensorisi sinulle parhaiten sopivana ajankohtana

Hyvä tietää

- Voit siirtyä G7-sovelluksesta käyttämään CamAPS FX -sovellusta ilman G7-sensorin vaihtamista
- Voit milloin tahansa vaihtaa yhteensopivia sensortyyppejä, mutta ainoastaan yksi jatkuvan glukoosinseurannan sensorin voi olla liitettynä kerralla
- Pidä puhelimesi sensorin lähellä laiteparin muodostamisen aikana
- Jos laiteparin muodostaminen epäonnistuu, kytke Bluetooth pois päältä ja takaisin päälle ja yritä sitten uudelleen

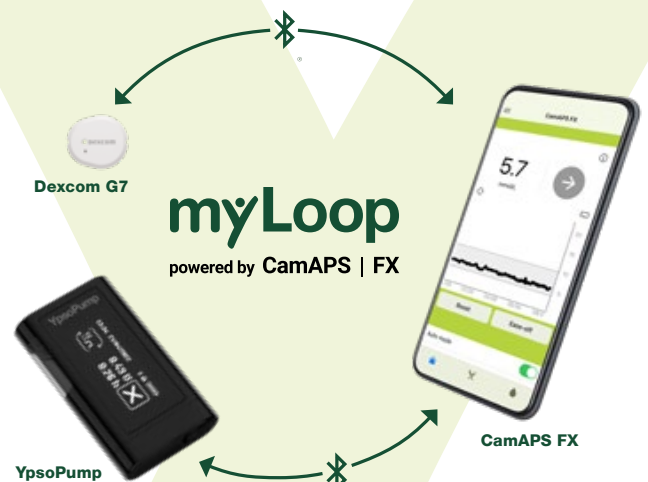

Miten Dexcom G6:sta vaihdetaan Dexcom G7:ään

- i** Jos sinulla on jo Dexcom-tili, pidä Dexcom-käyttäjätunnukseksi mielessäsi, sillä tarvitset niitä G7:n asettamiseen CamAPS FX -sovelluksessa. Löydät Dexcom-käyttäjätunnukseksi Dexcom G6/G7 -sovelluksesta.

01 Käytätkö jo Dexcom G7 -sensoria G7-sovelluksessa?

- Jos olet aiemmin käyttänyt Dexcom G7 -sovellusta, poista laitepari G7-sovelluksesta, sammuta sovellus ja odota 15 minuuttia, tai poista G7-sovelluksen asennus, jotta asianmukainen yhteys CamAPS FX -sovelluksella on mahdollinen.

Jos et ole koskaan aiemmin muodostanut laiteparia YpsoPump-insuliinipumpusta ja puhelimestasi, **siirry vaiheeseen 04.**

02 Käytätkö tällä hetkellä Dexcom G6 -sensoria CamAPS FX -sovelluksessa?

- Jos Dexcom G6 -jakso on käynnissä CamAPS FX -sovelluksessa, pysäytä sen hetkinen G6-sensorijakso, kun olet siihen valmis.
- Poista Dexcom G6 -sensori kehostasi ohjeiden mukaan.

03 Näkyykö Dexcom G7 CamAPS FX -sovelluksen CGM-valikossa?

Jos Dexcom G7 ei näy CGM-valintanäytössä:

iPhone (iOS)

- Kirjaa ensin ylös nykyinen **kokonaisvuorokausiannoksesi (TDD)** ja **painosi**.
- Avaa iPhoneen Bluetooth®-asetukset, valitse pumppusi ja napauta "**Unohda tämä laite**".
- Kirjautu ulos CamAPS FX -sovelluksesta (**Valikko → Tili → Kirjautu ulos**) ja kirjautu sitten takaisin sisään.
- Noudata näytön ohjeita pumpun ja CGM-järjestelmän yhdistämiseksi uudelleen.

Android

- Yhdistä YpsoPump uudelleen **Pumppu-valikon** kautta.
- Dexcom G7:n pitäisi nyt näkyä CGM-valintanäytössä.

04 Kiinnitä Dexcom G7 -sensori

- Kiinnitä Dexcom G7 -sensori Dexcomin käyttöohjeen mukaan.
- Varmista, että sensorin on kiinnitetty varmasti.

05 Yhdistä Dexcom G7 -sensori CamAPS FX -sovellukseen

- Avaa CamAPS FX
- Mene valikkoon → CGM
- Valitse Dexcom G7
- Muodosta sensorista laitepari noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita
 - Sinua pyydetään kirjautumaan sisään Dexcom-tilille ja hyväksymään tietojen jakaminen Dexcomin kanssa. Tämä vaihe on tarpeen ainoastaan, kun muodostat yhteyden Dexcom G7 -sensoriin ensimmäisen kerran tai asennat sovelluksen uudelleen.
- Odota, kunnes Dexcom G7 -sensorin lämpenemisjakso on valmis (noin 30 minuuttia sensorin asettamisesta).

Tarvitsetko apua? Jos kohtaat ongelmia:

- Katso lisätietoja CamAPS FX -sovelluksen sisältämästä ohjeesta tai mylife Diabetes Caren verkkosivulta.
- Ota yhteyttä mylife Diabetes Caren asiakaspalveluun.
- Sensoriin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Dexcomin tukeen.

- i** Tämä esite on myLoop-käyttäjille. Noudata aina terveydenhuollon ammattihenkilöiden ohjeita diabeteksen hoitovälineiden vaihdossa.

Vastuuvapauslauseke: Tuotekuvat on tarkoitettu ainoastaan esimerkeiksi. // mylife ja YpsoPump ovat mylife Diabetes Care AG:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. // Dexcom, Dexcom G6 ja Dexcom G7 ovat Dexcom, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. // CamAPS on CamDiab Ltd. -yrityksen rekisteröity tavaramerkki. // Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat vastaavien omistajien omaisuutta.

 Katso mainittujen tuotteiden turvallisuustiedot käyttöohjeista tai www.mylife-diabetescare.fi/turvallisuustiedot