

Vejledning i skift til Dexcom G7

Denne korte vejledning forklarer, hvordan du nemt skifter til Dexcom G7 CGM-systemet.

Før du skifter

● Kontrollér følgende:

i


- Du har en Dexcom G7-sensor ved hånden
- Du bruger den seneste version af CamAPS FX-appen
- Din smartphone er kompatibel med CamAPS FX og din sensor
 - Besøg <https://camdiab.com/faq> for at få vejledning i kompatibilitet

Nyheder i Dexcom G7?

- Alt i en-sensor og sender
- Hurtigere opvarmning (ca. 30 minutter)
- 12-timers fleksperiode, så du kan skifte sensor, når det passer dig

Godt at vide

- Du kan skifte fra G7-appen til CamAPS FX-appen uden at skifte G-sensor
- Du kan skifte til kompatible sensortyper når som helst, men du kan kun have én CGM tilknyttet ad gangen
- Hold din telefon tæt på sensoren under parring
- Hvis parringen mislykkes, kan du slå Bluetooth fra og til og prøve igen

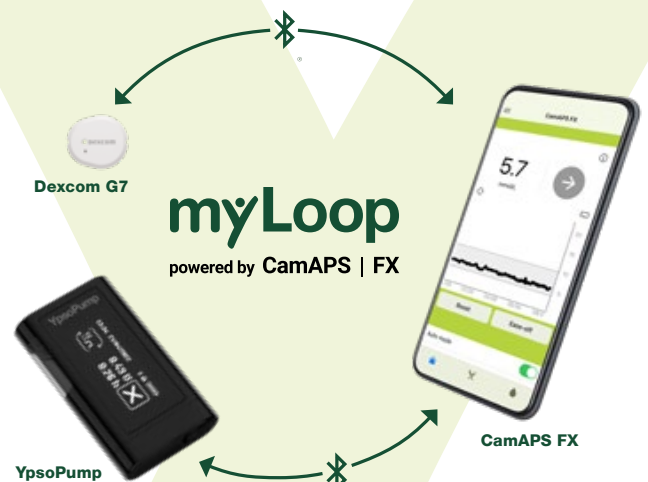

Sådan skifter du fra Dexcom G6 til Dexcom G7

- i** Hvis du allerede har en Dexcom-konto, skal du huske dine Dexcom-loginoplysninger, da du skal bruge dem til opsætningen af G7 i CamAPS FX. Du kan finde dine Dexcom-loginoplysninger i Dexcom G6/G7-appen.

01 Bruger du allerede en Dexcom G7-sensor i G7-appen?

- Hvis du tidligere har brugt Dexcom G7-appen, skal du fjerne parringen i G7-appen, tvangsstoppe appen og vente i 15 minutter, eller du kan afinstallere G7-appen, for at få den korrekte forbindelse med CamAPS FX.

Hvis du aldrig har parret din YpsoPump med din telefon, **går du videre til trin 04**

02 Bruger du en Dexcom G6 sensor i CamAPS FX nu?

- Hvis du har en kørende Dexcom G6-session i CamAPS FX-appen, skal du stoppe den nuværende G6-sensorsession, når du er klar.
- Fjern Dexcom G6-sensoren fra kroppen i henhold til instruktionerne

03 Er Dexcom G7 synlig i CGM-menuen i CamAPS FX-appen?

Hvis Dexcom G7 ikke er synlig på skærmen til valg af CGM:

iPhone (iOS)

- Notér først din aktuelle **samlede daglige dosis (TDD)** og din **kropsvægt**.
- Åbn Bluetooth®-indstillingerne på din iPhone, vælg din pumpe, og tryk på "**Glem denne enhed**".
- Log ud af CamAPS FX-appen (**Menu → Account → Log out**) og log derefter ind igen.
- Følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte pumpen og CGM-systemet igen.

Android

- Tilslut din YpsoPump igen via **Pumpemenuen**.
- Dexcom G7 bør nu være synlig på skærmen til valg af CGM.

04 Indsæt en Dexcom G7-sensor

- Indsæt Dexcom G7-sensoren som beskrevet i Dexcoms brugsanvisning
- Kontrollér, at sensoren sidder, som den skal

05 Forbind Dexcom G7 i CamAPS FX-appen


- Åbn CamAPS FX
- Gå til Menu → CGM
- Vælg Dexcom G7
- Følg trinene på skærmen for at parre sensoren
 - Du bliver bedt om at logge på din Dexcom-konto og acceptere datadeling til Dexcom. Dette trin skal kun udføres, første gang du forbinder en Dexcom G7-sensor, eller hvis du geninstallerer appen
- Vent, indtil Dexcom G7-opvarmningsperioden er slut (~30 minutter fra det tidspunkt, hvor sensoren indsættes)

Har du brug for hjælp? Hvis du oplever problemer:

- Tjek CamAPS FX i appens hjælpefunktion eller på mylife Diabetescare hjemmesiden
- Kontakt mylife Diabetes Cares kundeservice
- Kontakt Dexcoms Support, hvis du har problemer med sensoren

- i** Denne flyer er til myLoop-brugere. Følg altid din behandles råd, når du ændrer dele af din diabetesbehandling.

Ansvarsfraskrivelse: Produktbillederne er kun tænkt som illustration. // mylife og YpsoPump er registrerede varemærker tilhørende mylife Diabetes Care AG eller dets associerede selskaber. // Dexcom, Dexcom G6 og Dexcom G7 er registrerede varemærker tilhørende Dexcom, Inc. i USA og/eller andre lande. // CamAPS er et registreret varemærke tilhørende CamDiab Ltd. // Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

 Sikkerhedsoplysninger om nævnte produkter kan ses i brugsanvisningen eller på www.mylife-diabetescare.dk/sikkerhed