

Sicherheits- und garantiehinweise Recovery Suit Katze.

Produkttyp: (Medizinische) Schutzkleidung für Katzen.

Lesen Sie alle Sicherheits- und Produktinformationen sorgfältig durch, bevor Sie das Recovery Suit bei Ihrem Haustier verwenden. Das Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann Verletzungen verursachen. Suitical®-Produkte sind keine Spielzeuge oder Modeartikel. Halten Sie Ihr Haustier während der Verwendung dieses Produkts unter Aufsicht eines Erwachsenen. Falsche Anwendung kann zu Hotspots, Scheuern, Hautreizungen, Entzündungen oder Infektionen führen.

Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Verwendung. Das Recovery Suit darf nur auf Anraten/nach Rücksprache mit Ihrem Tierarzt und nur nach einem medizinischen Eingriff, bei medizinischen Beschwerden oder Hautpro- blemen verwendet werden. Im Notfall oder bei Zweifeln konsultieren Sie bitte sofort Ihren Tierarzt! Verwenden Sie das suit nicht, wenn es beschädigt ist oder lose Teile enthält. **2. Aufsicht.** Ihr Haustier muss jederzeit unter Aufsicht eines verantwortungsbewussten Erwachsenen stehen, während er das Recovery Suit trägt. Regelmäßige Kontrolle auf Hygiene, Reibung, Einklemmungen, Scheuern, Stolpergefahr oder Erstickungsgefahr ist obligatorisch. **3. Gewöhnungszeit.** Lassen Sie Ihr Haustier das suit vor einer Operation kennenlernen und lassen Sie Ihren Tierarzt das suit Ihrem Haustier während der Narkose anziehen. Haben Sie Zweifel? Konsultieren Sie immer Ihren Tierarzt für Ratschläge. Wenn Ihr Haustier viel kaut/nagt, wird dieses Produkt nicht empfohlen. Überwachen Sie Ihr Tier daher immer. **4. Ungewöhnliches Verhalten.** Entfernen Sie das suit so fort und konsultieren Sie Ihren Tierarzt, wenn Ihr Haustier ungewöhnliches Verhalten zeigt. Ungewöhnliches Verhalten kann Rückwärtsgen, Niesen, Husten oder Inkontinenz umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt. **5. Sichtbare Probleme.** Überprüfen Sie täglich die Passform und eventuelle Hautreizungen. Melden Sie Hautreizungen oder andere Probleme sofort Ihrem Tierarzt für die richtige Behandlung und Pflege. **6. Passform.** Achten Sie auf die richtige Passform, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Ein zu großes suit kann Stolper- oder Erstickungsgefahr verursachen, ein zu kleines suit kann zu Reibung oder Hautreizungen führen. Messen Sie immer Ihr Haustier laut Anleitung, die über den Link am Ende der Seite verfügbar ist. Das suit ist so konzipiert, dass es gut sitzt. Es besteht aus leichtem, atmungs- aktivem und dehnbarem Material. Es kann erforderlich sein, das suit zu dehnen, um es anzuziehen. Dies ist normal, da es sich um ein Vier-Wege-Stretchgewebe handelt. Stellen Sie immer sicher, dass um die Beine, die Brust, den Hals und den Schwanz herum Platz für 1 bis 2 Finger ist. Überprüfen Sie mindestens einmal täglich auf eventuelle Reizungen an Beinen, Brust, Hals und Schwanz und stellen Sie sicher, dass das Recovery Suit an Ort und Stelle sitzt. **7. Tragedauer.** Verwenden Sie das Recovery Suit niemals länger als acht (8) Stunden hintereinander, es sei denn, dies wurde von Ihrem Tierarzt anders verordnet. Überprüfen Sie täglich den Problem- oder Operationsbereich. Ziehen Sie das suit alle paar Tage aus, waschen Sie es und lassen Sie es an der Luft trocknen. Für einen konstanten Schutz empfehlen wir, ein zweites Recovery Suit zu erwerben. Sehen Sie sich die Waschanleitung in der anleitung an, die [über diesen Link](#) abgerufen werden kann.

Haftungsausschluss: Auch wenn wir uns bemühen, dass die Informationen in diesem Handbuch korrekt und vollständig sind, übernimmt Suitical® keine Haftung für Fehler oder eine missbräuchliche Verwendung des Handbuchs. Suitical® behält sich das Recht vor, dieses Handbuch zu ändern. **Garantie:** Unsere Produkte haben eine Garantie gegen Produktionsfehler. Wenden Sie sich bei Problemen bitte an Ihren Tierarzt oder an die Verkaufsstelle.

Manual de seguridad y garantía Recovery Suit Gato.

producto: Ropa de recuperación (médica) para gatos.

Lea atentamente toda la información de seguridad y del producto antes de utilizar la camiseta Recovery Suit en su mascota. No seguir estas instrucciones puede causar lesiones. Los pro- ductos Suitical® no son juguetes ni artículos de moda. Mantenga a su mascota bajo la supervisión de un adulto durante el uso de este producto. El uso incorrecto puede provocar puntos calientes, rozaduras, irritación de la piel, inflamación o infección.

Instrucciones importantes para la seguridad:

1. Uso. La camiseta Recovery Suit solo debe usarse bajo la recomendación/consulta de su veterinario, y solo después de una intervención médica, en caso de problemas médicos o cutáneos. ¡En caso de emergencia o duda, consulte de inmediato a su veterinario! No utilice la camiseta si está dañada o tiene piezas sueltas. **2. Supervisión.** Su mascota debe estar siempre bajo la supervisión de un adulto responsable mientras usa la Recovery Suit. Es obligatorio verificar regularmente la higiene, la fricción, el atrapamiento, el roce, el peligro de tropezar o el peligro de asfixia. **3. Periodo de adaptación.** Deje que su mascota se acostumbre a la camiseta antes de una operación, y permita que su veterinario la coloque a su mascota durante la anestesia. ¿Tiene dudas? ¡Pida siempre asesoramiento a su veterinario! Si su mascota mastica o mordisquea mucho los materiales, no se recomienda este producto. Por lo tanto, siempre supervise a su mascota. **4. Comportamiento inusual.** Si su mascota muestra un comportamiento inusual, retire inmediatamente la Recovery Suit y consulte a su veterinario. El comportamiento inusual puede incluir, entre otras cosas, caminar hacia atrás, estornudar, toser o incontinencia. **5. Problemas visibles.** Verifique diariamente el ajuste y cualquier irritación en la piel. Informe de inmediato al veterinario sobre cualquier irritación en la piel u otros problemas, para recibir el tratamiento y cuidado adecuados. **6. Ajuste.** Para evitar riesgos de seguridad, asegúrese de tener el ajuste correcto. Una camiseta demasiado grande puede causar peligro de tropiezo o asfixia; una camiseta demasiado pequeña puede causar rozaduras o irritación en la piel. Mida siempre a su mascota según se describe en el manual, que está disponible a través del enlace al final de la página. La camiseta está diseñada para ajustarse bien. Está hecha de material ligero, transpirable y elástico. Puede ser necesario estirar la camiseta para ponérsela a su mascota; esto es normal, ya que es una tela elástica en cuatro direcciones. Asegúrese siempre de que haya espacio para 1 o 2 dedos alrededor de las patas, el pecho, el cuello y la cola. Revise, al menos una vez al día, cualquier irritación alrededor de las patas, el pecho, el cuello y la cola, y asegúrese de que el Recovery Suit esté en su lugar. **7. Tiempo de uso.** No use la Recovery Suit más de ocho (8) horas consecutivas, a menos que sea indicado de otra manera por su veterinario. Verifique diariamente el área problemática o la zona quirúrgica. Quitele la camiseta a su mascota al cabo de unos días, lávela y déjala secar al aire. Para una protección constante, recomendamos adquirir una segunda Recovery Suit. Consulte [las instrucciones de lavado](#) en el manual.

Exención de responsabilidad: Aunque nos esforzamos para asegurarnos de que la información de este manual sea correcta y completa, Suitical® no se hace responsable de los errores o del uso indebido del ma- nual. Suitical® tiene el derecho de modificar este manual. **Garantía:** Nuestros productos tienen una garantía para defectos de fabricación. En caso de que encuentre un defecto en el producto, contacte con la consulta de su veterinario o con el lugar de compra.



Suitical
Recovery wear for pets




MANUAL

Recovery Suit Cat

Cat • Kat • Chat • Katze • Gato

EN	Safety and warranty manual for cat owner.
NL	Veiligheids- en garantiehandleiding voor katteneigenaar.
FR	Manuel de sécurité et de garantie pour propriétaire de chat.
DE	Sicherheits- und garantiehinweise für Katzenbesitzer.
ES	Manual de seguridad y garantía para propietarios de gatos.

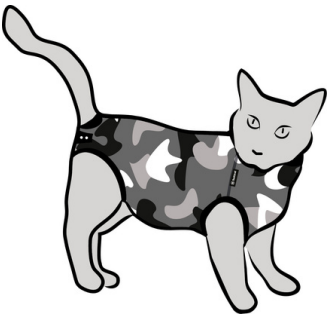

Safety and warranty manual Recovery Suit Cat.
Product type: (Medical) Recovery wear for cats.
Read all safety and product information carefully before using the Recovery Suit on your pet. Failure to follow these instructions may cause injury. Suitical® products are not toys or fashion items. Adult supervision is required during the use of this product. Improper use may lead to hotspots, chafing, skin irritation, inflammation, or infection. In case of emergency or doubt, consult your veterinarian immediately. Important safety instructions: 1. Usage. The Recovery Suit should only be used on the advice/consultation of your veterinarian and only after a medical procedure, for medical conditions, and skin problems. In case of emergency or doubt, consult your veterinarian immediately! Do not use the suit if it is damaged or if it contains loose parts. 2. Supervision. Your pet must always be under the supervision of a responsible adult while wearing the Recovery Suit. Regular checks for cleanliness, friction, constriction, chafing, tripping hazard, or choking hazard are mandatory. 3. Adjustment period. Allow your pet to get used to the suit before a surgery and have your veterinarian put the suit on your pet during anesthesia. If in doubt, always consult your veterinarian for advice. If your pet tends to chew or gnaw on materials, this product is not recommended. Therefore, always keep your pet under supervision. 4. Unusual behavior. In case of unusual behavior from your pet, which may include but is not limited to walking backward, sneezing, coughing, or incontinence, remove the Recovery Suit immediately and consult your veterinarian. 5. Visible issues. Check for proper fit and any skin irritation daily. Report skin irritation or any other problems to your veterinarian immediately for proper treatment and care. 6. Fit. Ensure the right fit to avoid safety risks. A suit that is too large can cause tripping or choking hazards; a suit that is too small can cause friction or skin irritation. Always measure your pet as described in the manual, which is available through the link at the bottom of the page. The suit is designed to have a snug fit. It is made of lightweight, breathable, and stretchable material. It may be necessary to stretch the suit to put it on; this is normal as it is a four-way stretch fabric. Make sure there is always room for 1 to 2 fingers around the legs, chest, neck, and tail. Check at least once a day for any irritation around the legs, chest, neck, and tail, and to ensure that the suit is in place. 7. Wear time. Never use the suit for more than eight (8) consecutive hours unless prescribed by your veterinarian. Check the problem area or surgical zone every day. Remove the suit every few days, wash it, and let it air dry. For constant protection, we recommend using a second Recovery Suit. See the washing instructions in the user manual, available in this link.
Disclaimer: While every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate and complete, Suitical® is not liable for errors in or incorrect use of the manual and the product. We reserve the right to modify the manual. Warranty: Our products are guaranteed against manufacturing defects. In case of a product defect, please contact your veterinarian or the place of purchase.

Veiligheids- en garantiehandleiding Recovery Suit Kat.
product: (Medische) Herstelkleding voor katten.
Lees alle veiligheids- en productinformatie zorgvuldig door voordat u het Recovery Suit op uw huisdier gebruikt. Het niet opvolgen van deze instructies kan letsel veroorzaken. Suitical®-producten zijn geen speelgoed of modeartikelen. Volwassen toezicht is vereist tijdens het gebruik van dit product. Onjuist gebruik kan leiden tot hotspots, schuren, huidirritatie, ontsteking of infectie. In geval van nood of twijfel, raadpleeg onmiddellijk uw dierenarts. Belangrijke veiligheidsinstructies: 1. Gebruik. Het suit mag alleen gebruikt worden op advies/na raadpleging van uw dierenarts en alleen na een medische ingreep, bij medische aandoeningen of huidproblemen. Bij nood of twijfel, raadpleeg direct uw dierenarts! Gebruik het suit niet als het beschadigd is of wanneer het losse onderdelen bevat. 2. Toezicht. Uw huisdier moet te allen tijde onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene tijdens het dragen van het suit. Reguleer controle op reinheid, wrijving, beknelling, schuring, struikelgevaar, of verstikkingsgevaar is verplicht. 3. Aanpassingsperiode. Laat uw huisdier wennen aan het suit vooraf aan een operatie en laat uw dierenarts het suit bij uw huisdier aantrekken tijdens de narcose. Twijfelt u? Raadpleeg altijd uw dierenarts voor advies. Als uw huisdier veel kauwt of knaagt aan materialen, wordt dit product niet aanbevolen. Houd uw huisdier daarom altijd onder toezicht. 4. Ongewoon gedrag. Verwijder het suit onmiddellijk en raadpleeg uw dierenarts als uw huisdier ongewoon gedrag vertoont. Ongewoon gedrag kan omvatten, maar is niet beperkt tot achterwaarts lopen, niezen, hoesten en incontinentie. 5. Zichtbare problemen. Controleer dagelijks de pasvorm en eventuele irritatie op de huid. Meld huidirritatie of andere problemen direct aan uw dierenarts voor de juiste behandeling en zorg. 6. Pasvorm. Zorg voor de juiste pasvorm om veiligheidsrisico's te voorkomen. Een te groot suit kan struikel- of verstikkingsgevaar veroorzaken; een te klein suit kan wrijving of huidirritatie veroorzaken. Meet altijd uw huisdier zoals beschreven in de handleiding, die beschikbaar is via de link onderaan de pagina. Het suit is ontworpen om goed aan te sluiten. Het is gemaakt van lichtgewicht, ademend en rekbaar materiaal. Het kan nodig zijn om het suit uit te rekken om het aan te trekken; dit is normaal, aangezien het een vierwegstretchstof is. Zorg ervoor dat er altijd ruimte is voor 1 tot 2 vingers rond de poten, borst, nek en staart. Controleer minstens één keer per dag op eventuele irritatie rond de poten, borst, nek en staart, en om ervoor te zorgen dat het Recovery Suit op zijn plaats zit. 7. Draagtijd. Gebruik het suit nooit langer dan acht (8) opeenvolgende uren, tenzij anders voorgeschreven door uw dierenarts. Controleer elke dag het probleemgebied of de chirurgische zone. Trek het suit om de paar dagen uit, was het suit en laat het aan de lucht drogen. Voor constante bescherming raden wij aan om een tweede Recovery Suit te gebruiken. Zie de wasinstructies in de handleiding via deze link.
Disclaimer: Hoewel wij er zorg voor dragen dat de informatie in deze handleiding accuraat en volledig is, is Suitical® niet aansprakelijk voor fouten in of onjuist gebruik van de handleiding en het product. We behouden ons het recht voor de handleiding te wijzigen. Garantie: Onze producten zijn gegarandeerd tegen productiefouten. Neem bij een productdefect contact op met uw dierenarts of de plaats van aankoop.

Manuel de sécurité et de garantie du Recovery Suit Chat.
produit : Vêtement de récupération (médicale) pour chats.
Lisez attentivement toutes les informations de sécurité et du produit avant d'utiliser le Recovery Suit sur votre animal de compagnie. Ne pas suivre ces instructions peut causer des blessures. Les produits Suitical® ne sont ni des jouets ni des articles de mode. Votre animal de compagnie doit rester sous la supervision d'un adulte pendant l'utilisation de ce produit. Une utilisation incorrecte peut entraîner des points chauds, des frottements, des irritations cutanées, une inflammation ou une infection. En cas d'urgence ou de doute, consultez immédiatement votre vétérinaire. Instructions de sécurité importantes : 1. Utilisation. Le Recovery Suit ne doit être utilisé qu'après la consultation de votre vétérinaire et seulement après une intervention médicale, en cas de problèmes médicaux ou cutanés. En cas d'urgence ou de doute, consultez immédiatement votre vétérinaire ! N'utilisez pas le suit s'il est endommagé ou s'il comporte des pièces lâches. 2. Surveillance. Votre animal doit toujours être sous la supervision d'un adulte responsable lorsqu'il porte le Recovery Suit. Un contrôle régulier de l'hygiène, des frottements, des compressions, des risques de trébuchement ou d'étouffement est obligatoire. 3. Période d'adaptation. Habituez votre animal au Recovery Suit avant une opération et laissez votre vétérinaire le mettre pendant l'anesthésie. Vous avez des doutes ? Consultez toujours votre vétérinaire si vous avez besoin de conseils. Si votre animal mâche/grignote beaucoup, ce produit n'est pas recommandé. Surveillez donc toujours votre animal. 4. Comportement inhabituel. Retirez immédiatement le Recovery Suit et consultez votre vétérinaire si votre animal présente un comportement inhabituel. Un comportement inhabituel peut inclure, mais sans s'y limiter, la marche en arrière, les éternuements, la toux ou l'incontinence. 5. Problèmes visibles. Vérifiez quotidiennement l'ajustement et l'absence de toute irritation cutanée. Signalez immédiatement toute irritation cutanée ou tout autre problème à votre vétérinaire pour garantir un traitement et des soins appropriés. 6. Ajustement. Assurez-vous d'avoir la bonne taille pour éviter les risques de sécurité. Un Recovery Suit trop grand peut causer des risques de trébuchement ou d'étouffement ; un Recovery Suit trop petit peut causer des frottements ou des irritations cutanées. Mesurez toujours votre animal de compagnie comme indiqué dans le manuel, disponible via le lien en bas de la page. Le Recovery Suit est conçu pour bien s'adapter. Il est fabriqué en matériau léger, respirant et extensible. Il peut être nécessaire d'étirer le suit pour l'enfiler ; c'est normal, car il s'agit d'un tissu extensible dans quatre directions. Assurez-vous toujours qu'il y a de l'espace pour 1 à 2 doigts autour des pattes, du poitrail, du cou et de la queue. Vérifiez au moins une fois par jour s'il y a des irritations autour des pat-tes, du poitrail, du cou et de la queue, et assurez-vous que le Recovery Suit est bien en place. 7. Durée de port. N'utilisez jamais le Recovery Suit pendant plus de huit (8) heures consécutives, sauf indication contraire de votre vétérinaire. Vérifiez chaque jour la zone du problème ou la zone chirurgicale. Retirez le Recovery Suit tous les quelques jours, lavez-le et laissez-le sécher à l'air. Pour une protection constante, nous vous recommandons d'acheter un deuxième Recovery Suit. Consultez les instructions de lavage dans le mode d'emploi, à consulter via le lien.
Disclaimer : Bien que nous nous efforcions de fournir des informations complètes, Suitical® ne garantit pas l'exactitude, l'actualité ou la précision des informations contenues dans ce manuel et concernant le produit. Suitical® se réserve le droit de modifier les informations de ce manuel à tout moment. Garantie : Nos produits sont garantis contre les défauts de fabrication. En cas de problème, veuillez contacter votre vétérinaire ou le point de vente.