

Sicherheits- und garantiehinweise MPS-Protective Head Cover Hund.

Produkttyp: (Medizinischer) Kopf- und Ohrenschutz für Hunde.

Lesen Sie alle Sicherheits- und Produktinformationen sorgfältig durch, bevor Sie das MPS- Protective Head Cover bei Ihrem Haustier verwenden. Das Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann Verletzungen verursachen. MPS-Produkte sind keine Spielzeuge oder Modeartikel. Halten Sie Ihr Haustier während der Verwendung dieses Produkts unter Aufsicht eines Erwachsenen. Falsche Anwendung kann zu Hotspots, Scheuern, Hautreizungen, Entzündungen oder Infektionen führen.

Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Verwendung. Das MPS-Head Cover darf nur auf Anraten/nach Rücksprache mit Ihrem Tierarzt und nur nach einem medizinischen Eingriff, bei medizinischen Beschwerden oder Hautproblemen verwendet werden. Im Notfall oder bei Zweifeln konsultieren Sie bitte sofort Ihren Tierarzt! Verwenden Sie das Head Cover nicht, wenn es beschädigt ist oder lose Teile enthält. **2. Aufsicht.** Ihr Haustier muss jederzeit unter Aufsicht eines verantwortungsbewussten Erwachsenen stehen, während er das MPS-Head Cover trägt. Regelmäßige Kontrolle auf Hygiene, Reibung, Einklemmungen, Scheuern, Stolpergefahr oder Erstickungsgefahr ist obligatorisch. **3. Gewöhnungszeit.** Überwachen Sie Ihr Haustier und Lassen Sie Ihr Haustier das Head Cover vor einer Operation kennenlernen. Haben Sie Zweifel? Konsultieren Sie immer Ihren Tierarzt für Ratschläge. **4. Ungewöhnliches Verhalten.** Entfernen Sie das Head Cover so fort und konsultieren Sie Ihren Tierarzt, wenn Ihr Haustier ungewöhnliches Verhalten zeigt. Ungewöhnliches Verhalten kann Rückwärtsgen, Niesen, Husten oder Übermäßiges Kopfschütteln umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt. **5. Sichtbare Probleme.** Überprüfen Sie täglich die Passform und eventuelle Hautreizungen. Melden Sie Hautreizungen oder andere Probleme sofort Ihrem Tierarzt für die richtige Behandlung und Pflege. **6. Passform.** Achten Sie auf die richtige Passform, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Ein zu großes Head Cover kann Erstickungsgefahr verursachen, ein zu kleines Head Cover kann zu Reibung oder Hautreizungen führen. Messen Sie immer Ihr Haustier laut Anleitung, die über den Link am Ende der Seite verfügbar ist. Es gibt drei verstellbare Verschlussbänder, nämlich das Band unter dem Kinn, das Band um den Hals herum und den Klettverschluss im Nacken. Verwenden Sie am Hals und Kinn mindestens zwei Druckknopfzungen, um sicherzustellen, dass das Head Cover an Ort und Stelle bleibt. Vergewissern Sie sich, dass der MPS-Head Cover nicht zu fest angezogen ist, um Atmungs- und Durchblutungsstörungen zu vermeiden. Überprüfen Sie mindestens einmal täglich auf mögliche Reizungen um den Kopf, den Hals, das Kinn und die Ohren. **7. Tragedauer.** Verwenden Sie das Head Cover niemals länger als acht (8) Stunden hintereinander, es sei denn, dies wurde von Ihrem Tierarzt anders verordnet. Überprüfen Sie täglich den Problem- oder Operationsbereich. Ziehen Sie das Head Cover alle paar Tage aus, waschen Sie es und lassen Sie es an der Luft trocknen. Für einen konstanten Schutz empfehlen wir, ein zweites MPS-Head Cover zu erwerben. Sehen Sie sich die Waschanleitung in der Anleitung an, die über den untenstehenden Link abgerufen werden kann.

Haftungsausschluss: Auch wenn wir uns bemühen, dass die Informationen in diesem Handbuch korrekt und vollständig sind, übernimmt Medical Pet Shirts keine Haftung für Fehler oder eine missbräuchliche Verwendung des Handbuchs. Medical Pet Shirts behält sich das Recht vor, dieses Handbuch zu ändern. **Garantie:** Unsere Produkte haben eine Garantie gegen Produktionsfehler. Wenden Sie sich bei Problemen bitte an Ihren Tierarzt oder an die Verkaufsstelle.

Mehr Informationen über dieses Produkt?
Besuchen Sie: links.medicalpetshirts.com/pdp-headcover-dog

Scannen Sie den QR-Code für detaillierte Informationen zur Verwendung, Größen und mehr.



Manual de seguridad y garantía MPS-Protective Head Cover Perro.

Tipo de producto: Protección (médica) para la cabeza y las orejas de los perros.

Lea atentamente toda la información de seguridad y del producto antes de utilizar la MPS-Protective Head Cover en su mascota. No seguir estas instrucciones puede causar lesiones. Los productos MPS no son juguetes ni artículos de moda. Mantenga a su mascota bajo la supervisión de un adulto durante el uso de este producto. El uso incorrecto puede provocar puntos calientes, rozaduras, irritación de la piel, inflamación o infección.

Instrucciones importantes para la seguridad:

1. Uso. La MPS-Head Cover solo debe usarse bajo la recomendación/consulta de su veterinario, y solo después de una intervención médica, en caso de problemas médicos o cutáneos. ¡En caso de emergencia o duda, consulte de inmediato a su veterinario! No utilice la Head Cover si está dañada o tiene piezas sueltas. **2. Supervisión.** Su mascota debe estar siempre bajo la supervisión de un adulto responsable mientras usa la MPS-Head Cover. Es obligatorio verificar regularmente la higiene, la fricción, el atrapamiento, el roce, el peligro de tropezar o el peligro de asfixia. **3. Período de adaptación.** Siempre supervise a su mascota y deje que su mascota se acostumbre a la Head Cover antes de una operación. ¿Tiene dudas? ¡Pida siempre asesoramiento a su veterinario! **4. Comportamiento inusual.** Si su mascota muestra un comportamiento inusual, retire inmediatamente la Head Cover y consulte a su veterinario. El comportamiento inusual puede incluir, entre otras cosas, caminar hacia atrás, estornudar, toser o sacudidas de cabeza excesivas. **5. Problemas visibles.** Verifique diariamente el ajuste y cualquier irritación en la piel. Informe de inmediato al veterinario sobre cualquier irritación en la piel u otros problemas, para recibir el tratamiento y cuidado adecuados. **6. Ajuste.** Para evitar riesgos de seguridad, asegúrese de tener el ajuste correcto. Una Head Cover demasiado grande puede causar peligro de asfixia; una Head Cover demasiado pequeña puede causar rozaduras o irritación en la piel. Mida siempre a su mascota según se describe en el manual, que está disponible a través del enlace al final de la página. Hay tres bandas de cierre ajustables, a saber, la banda de cierre debajo del mentón, la banda de cierre alrededor del cuello y el velcro en la garganta. Utilice al menos dos filas de broches en la zona del cuello y del mentón para asegurarse de que la Head Cover permanezca en su lugar. Asegúrese de que la Head Cover no esté demasiado apretada para evitar problemas de respiración y circulación sanguínea. Revise, al menos una vez al día, cualquier irritación alrededor de la cabeza, el cuello, el mentón y las orejas. **7. Tiempo de uso.** No use la Head Cover más de ocho (8) horas consecutivas, a menos que sea indicado de otra manera por su veterinario. Verifique diariamente el área problemática o la zona quirúrgica. Quitele la Head Cover a su mascota al cabo de unos días, lávela y déjela secar al aire. Para una protección constante, recomendamos adquirir una segunda MPS-Head Cover. Consulte las instrucciones de lavado en el manual, que se pueden consultar a través del enlace a continuación.

Exención de responsabilidad: Aunque nos esforzamos para asegurarnos de que la información de este manual sea correcta y completa, Medical Pet Shirts no se hace responsable de los errores o del uso indebido del manual. Medical Pet Shirts tiene el derecho de modificar este manual. **Garantía:** Nuestros productos tienen una garantía para defectos de fabricación. En caso de que encuentre un defecto en el producto, contacte con la consulta de su veterinario o con el lugar de compra.

¿Quieres saber más sobre este producto? Visita: links.medicalpetshirts.com/pdp-headcover-dog

Escanee el código QR para obtener información detallada sobre el uso, tallas, etc.




Medical Pet Shirts
The best recovery wear a pet can get.



MANUAL

MPS-Protective Head Cover Dog
+ 1 earpad | Dog • Hond • Chien • Hund • Perro

EN	Safety and warranty manual for dog owner.
NL	Veiligheids- en garantiehandleiding voor hondeneigenaar.
FR	Manuel de sécurité et de garantie pour propriétaire de chien.
DE	Sicherheits- und Garantiehinweise für Hundebesitzer.
ES	Manual de seguridad y garantía para propietarios de perros.

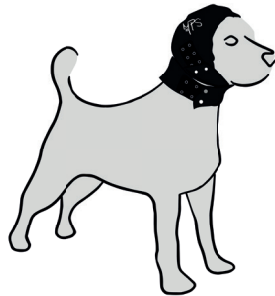

Incl. one (1)
EarPad
For extra soft
padding.

English	
Safety and warranty manual MPS- Protective Head Cover Dog.	
Product type: (Medical) head and ear cover for dogs.	
Read all safety and product information carefully before using the MPS-Protective Head Cover on your pet. Failure to follow these instructions may cause injury. MPS products are not toys or fashion items. Adult supervision is required during the use of this product. Improper use may lead to hotspots, chafing, skin irritation, inflammation, or infection. In case of emergency or doubt, consult your veterinarian immediately. Important safety instructions: 1. Usage. The MPS-Head Cover should only be used on the advice/consultation of your veterinarian and only after a medical procedure, for medical conditions, and skin problems. In case of emergency or doubt, consult your veterinarian immediately! Do not use the MPS-Head Cover if it is damaged or if it contains loose parts. 2. Supervision. Your pet must always be under the supervision of a responsible adult while wearing the MPS-Head Cover. Regular checks for cleanliness, friction, constriction, chafing, tripping hazard, or choking hazard are mandatory. 3. Adjustment period. Always keep your pet under supervision and allow him to get used to the Head Cover. If in doubt, always consult your veterinarian for advice. 4. Unusual behavior. In case of unusual behavior from your pet, which may include but is not limited to walking backward, sneezing, coughing, or excessive head shaking, remove the MPS-Head Cover immediately and consult your veterinarian. 5. Visible issues. Check for proper fit and any skin irritation daily. Report skin irritation or any other problems to your veterinarian immediately for proper treatment and care. 6. Fit. Ensure the right fit to avoid safety risks. A Head Cover that is too large can cause entanglement injuries; a Head Cover that is too small can cause friction or skin irritation. Always measure your pet as described in the manual, which is available through the link at the bottom of the page. There are three adjustable fastenings to create a snug fit: the adjustable strap under the chin, the adjustable strap around the neck and the Velcro® strap on the back of the neck. To secure the Head Cover properly, it is important to use at least two rows of snaps with the two fastening straps. Do not secure the Head Cover too tightly as this can result in breathing and blood circulation problems. Check at least once a day for any irritation around the head, neck, chin, and ears. 7. Wear time. Never use the Head Cover for more than eight (8) consecutive hours unless prescribed by your veterinarian. Check the problem area or surgical zone every day. Remove the Head Cover every few days, wash it, and let it air dry. For constant protection, we recommend using a second MPS-Head Cover. See the washing instructions in the user manual, available in the link below.	
Disclaimer: While every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate and complete, Medical Pet Shirts is not liable for errors in or incorrect use of the manual and the product. We reserve the right to modify the manual. Warranty: Our products are guaranteed against manufacturing defects. In case of a product defect, please contact your veterinarian or the place of purchase.	Want to know more about this product? Visit: links.medicalpetshirts.com/pdp-headcover-dog Scan the QR code for detailed information about usage, sizes and more. 

Nederlands	
Veiligheids- en garantiehandleiding MPS-Protective Head Cover Hond.	
Type product: (Medische) kop- en oorbescherming voor honden.	
Lees alle veiligheids- en productinformatie zorgvuldig door voordat u de MPS-Protective Head Cover op uw huisdier gebruikt. Het niet opvolgen van deze instructies kan letsel veroorzaken. MPS-producten zijn geen speelgoed of modeartikelen. Volwassen toezicht is vereist tijdens het gebruik van dit product. Onjuist gebruik kan leiden tot hotspots, schuren, huidirritatie, ontsteking of infectie. In geval van nood of twijfel, raadpleeg onmiddellijk uw dierenarts. Belangrijke veiligheidsinstructies: 1. Gebruik. De Head Cover mag alleen gebruikt worden op advies/na raadpleging van uw dierenarts en alleen na een medische ingreep, bij medische aandoeningen of huidproblemen. Bij nood of twijfel, raadpleeg direct uw dierenarts! Gebruik de Head Cover niet als het beschadigd is of wanneer het losse onderdelen bevat. 2. Toezicht. Uw huisdier moet te allen tijde onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene tijdens het dragen van de Head Cover. Reguleer controle op reinheid, vrijving, beknelling, schuring, struikelgevaar, of verstikkingsgevaar is verplicht. 3. Aanpassingsperiode. Houd uw huisdier altijd onder toezicht en laat hem wennen aan de MPS-Head Cover. Twijfelt u? Raadpleeg altijd uw dierenarts voor advies. 4. Ongewoon gedrag. Verwijder de Head Cover onmiddellijk en raadpleeg uw dierenarts als uw huisdier ongewoon gedrag vertoont. Ongewoon gedrag kan omvatten, maar is niet beperkt tot achterwaarts lopen, niezen, hoes-ten en overmatig kopschudden. 5. Zichtbare problemen. Controleer dagelijks de pasvorm en eventuele irritatie op de huid. Meld huidirritatie of andere problemen direct aan uw dierenarts voor de juiste behandeling en zorg. 6. Pasvorm. Zorg voor de juiste pasvorm om veiligheidsrisico's te voorkomen. Een te grote Head Cover kan verstikkingsgevaar veroorzaken; een te kleine Head Cover kan wrijving of huidirritatie veroorzaken. Meet altijd uw huisdier zoals beschreven in de handleiding, die beschikbaar is via de link onderaan de pagina. Er zijn drie verstelbare sluitingsbanden, namelijk de sluitingsband onder de kin, de sluitingsband rondom de nek en het klittenband in de hals. Gebruik bij de nek en kin minimaal twee rijen drukknopen om te zorgen dat de Head Cover op zijn plaats blijft. Let erop dat de Head Cover niet te strak zit om ademhalings- en bloedcirculatieproblemen te voorkomen. Controleer minstens één keer per dag op eventuele irritatie rond de kop, nek, kin en oren. 7. Draagtijd. Gebruik de MPS-Head Cover nooit langer dan acht (8) opeenvolgende uren, tenzij anders voorgeschreven door uw dierenarts. Controleer elke dag het probleemgebied of de chirurgische zone. Trek de Head Cover om de paar dagen uit, was het en laat het aan de lucht drogen. Voor constante bescherming raden wij aan om een tweede MPS-Head Cover te gebruiken. Zie de wasinstructies in de handleiding, beschikbaar via onderstaande link.	
Disclaimer: Hoewel wij er zorg voor dragen dat de informatie in deze handleiding accuraat en volledig is, is Medical Pet Shirts niet aansprakelijk voor fouten in of onjuist gebruik van de handleiding en het product. We behouden ons het recht voor de handleiding te wijzigen. Garantie: Onze producten zijn gegarandeerd tegen productiefouten. Neem bij een productdefect contact op met uw dierenarts of de plaats van aankoop.	Meer informatie over dit product? Ga dan naar: links.medicalpetshirts.com/pdp-headcover-dog Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie over het gebruik, maten en meer. 

Français	
Manuel de sécurité et de garantie du MPS-Protective Head Cover pour chien.	
Type de produit : Protection (médicale) pour la tête et les oreilles de chiens.	
Lisez attentivement toutes les informations de sécurité et du produit avant d'utiliser le MPS-Protective Head Cover sur votre animal de compagnie. Ne pas suivre ces instructions peut causer des blessures. Les produits MPS ne sont ni des jouets ni des articles de mode. Votre animal de compagnie doit rester sous la supervision d'un adulte pendant l'utilisation de ce produit. Une utilisation incorrecte peut entraîner des points chauds, des frottements, des irritations cutanées, une inflammation ou une infection. En cas d'urgence ou de doute, consultez immédiatement votre vétérinaire. Instructions de sécurité importantes : 1. Utilisation. Le MPS-Head Cover ne doit être utilisé qu'après la consultation de votre vétérinaire et seulement après une intervention médicale, en cas de problèmes médicaux ou cutanés. En cas d'urgence ou de doute, consultez immédiatement votre vétérinaire ! N'utilisez pas le MPS-Head Cover s'il est endommagé ou s'il comporte des pièces lâches. 2. Surveillance. Votre animal doit toujours être sous la supervision d'un adulte responsable lorsqu'il porte le MPS-Head Cover. Un contrôle régulier de l'hygiène, des frottements, des compressions, des risques de trébuchement ou d'étouffement est obligatoire. 3. Période d'adaptation. Surveillez toujours votre animal et habituez votre animal au MPS-Head Cover. Vous avez des doutes ? Consultez toujours votre vétérinaire si vous avez besoin de conseils. 4. Comportement inhabituel. Retirez immédiatement le MPS-Head Cover et consultez votre vétérinaire si votre animal présente un comportement inhabituel. Un comportement inhabituel peut inclure, mais sans s'y limiter, la marche en arrière, les éternuements, la toux ou secouer la tête. 5. Problèmes visibles. Vérifiez quotidiennement l'ajustement et l'absence de toute irritation cutanée. Signalez immédiatement toute irritation cutanée ou tout autre problème à votre vétérinaire pour garantir un traitement et des soins appropriés. 6. Ajustement. Assurez-vous d'avoir la bonne taille pour éviter les risques de sécurité. Un Head Cover trop grand peut causer des risques d'étouffement ; un Head Cover trop petit peut causer des frottements ou des irritations cutanées. Mesurez toujours votre animal de compagnie comme indiqué dans le manuel, disponible via le lien en bas de la page. Il y a trois sangles de fermeture réglables, à savoir la sangle de fermeture sous le menton, la sangle de fermeture autour du cou et le Velcro autour du cou. Fermez au moins deux rangées de boutons poussoirs pour une bonne fixation. Ne serrez pas trop le Head Cover, cela peut provoquer des problèmes de respiration et de circulation sanguine. Vérifiez au moins une fois par jour s'il y a des irritations autour de la tête, du cou, du menton et des oreilles. 7. Durée de port. N'utilisez jamais le Head Cover pendant plus de huit (8) heures consécutives, sauf indication contraire de votre vétérinaire. Vérifiez chaque jour la zone du problème ou la zone chirurgicale. Retirez le Head Cover tous les quelques jours, lavez-le et laissez-le sécher à l'air. Pour une protection constante, nous vous recommandons d'acheter un deuxième MPS-Head Cover. Consultez les instructions de lavage dans le mode d'emploi, à consulter via le lien ci-dessous.	
Disclaimer : Bien que nous prenions soin de partager de l'information complète, Medical Pet Shirts ne garantit pas l'exactitude, l'actualité ou la précision des informations du manuel et du produit. Medical Pet Shirts réserve le droit de modifier l'information dans ce manuel. Garantie : Nos produits sont garantis contre les défauts de fabrication. Si un problème se produit, contactez votre vétérinaire ou le lieu de vente.	Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit ? Rendez-vous sur: links.medicalpetshirts.com/pdp-headcover-dog Scannez le code QR pour des informations détaillées sur l'utilisation, les tailles et plus encore. 