

Sicherheits- und Garantiehinweise MPS-Protective Pet Shirt Kaninchen.

Produkttyp: (Medizinische) Schutzkleidung für Kaninchen.

Lesen Sie alle Sicherheits- und Produktinformationen sorgfältig durch, bevor Sie das MPS-Protective Pet Shirt bei Ihrem Haustier verwenden. Das Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann Verletzungen verursachen. MPS®-Produkte sind keine Spielzeuge oder Modeartikel. Halten Sie Ihr Haustier während der Verwendung dieses Produkts unter Aufsicht eines Erwachsenen. Falsche Anwendung kann zu Hotspots, Scheuern, Hautreizungen, Entzündungen oder Infektionen führen.

Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Verwendung. Das MPS-Protective Pet Shirt darf nur auf Anraten/nach Rücksprache mit Ihrem Tierarzt und nur nach einem medizinischen Eingriff, bei medizinischen Beschwerden oder Hautproblemen verwendet werden. Im Notfall oder bei Zweifeln konsultieren Sie bitte sofort Ihren Tierarzt! Verwenden Sie das Shirt nicht, wenn es beschädigt ist oder lose Teile enthält. **2. Aufsicht.** Ihr Haustier muss jederzeit unter Aufsicht eines verantwortungsbewussten Erwachsenen stehen, während er das MPS-Protective Pet Shirt trägt. Regelmäßige Kontrolle auf Hygiene, Reibung, Einklemmungen, Scheuern, Stolpergefahr oder Erstickungsgefahr ist obligatorisch. **3. Gewöhnungszeit.** Lassen Sie Ihr Haustier das Shirt vor einer Operation kennenlernen und lassen Sie Ihren Tierarzt das Shirt Ihrem Haustier während der Narkose anziehen. Haben Sie Zweifel? Konsultieren Sie immer Ihren Tierarzt für Ratschläge. Wenn Ihr Haustier viel kaut/nagt, wird dieses Produkt nicht empfohlen. Überwachen Sie Ihr Tier daher immer. **4. Ungewöhnliches Verhalten.** Entfernen Sie das Shirt so fort und konsultieren Sie Ihren Tierarzt, wenn Ihr Haustier ungewöhnliches Verhalten zeigt. Ungewöhnliches Verhalten kann Rückwärtsgehen, Niesen, Husten oder Inkontinenz umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt. **5. Sichtbare Probleme.** Überprüfen Sie täglich die Passform und eventuelle Hautreizungen. Melden Sie Hautreizungen oder andere Probleme sofort Ihrem Tierarzt für die richtige Behandlung und Pflege. **6. Passform.** Achten Sie auf die richtige Passform, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Ein zu großes Shirt kann Stolper- oder Erstickungsgefahr verursachen, ein zu kleines Shirt kann zu Reibung oder Hautreizungen führen. Messen Sie immer Ihr Haustier laut Anleitung, die über den Link am Ende der Seite verfügbar ist. Das Shirt ist so konzipiert, dass es gut sitzt. Es besteht aus leichtem, atmungsaktivem und dehnbarem Material. Es kann erforderlich sein, das Shirt zu dehnen, um es anzuziehen. Dies ist normal, da es sich um ein Vier-Wege-Stretchgewebe handelt. Stellen Sie immer sicher, dass um die Beine, die Brust, den Hals und den Schwanz herum Platz für 1 bis 2 Finger ist. Überprüfen Sie mindestens einmal täglich auf eventuelle Reizungen an Beinen, Brust, Hals und Schwanz und stellen Sie sicher, dass das MPS-Protective Pet Shirt an Ort und Stelle sitzt. **7. Tragedauer.** Verwenden Sie das Protective Pet Shirt niemals länger als acht (8) Stunden hintereinander, es sei denn, dies wurde von Ihrem Tierarzt anders verordnet. Überprüfen Sie täglich den Problem- oder Operationsbereich. Ziehen Sie das Shirt alle paar Tage aus, waschen Sie es und lassen Sie es an der Luft trocknen. Für einen konstanten Schutz empfehlen wir, ein zweites MPS-Protective Pet Shirt zu erwerben. Sehen Sie sich die Waschanleitung in der Anleitung an, die über den untenstehenden Link abgerufen werden kann.

Haftungsausschluss: Auch wenn wir uns bemühen, dass die Informationen in diesem Handbuch korrekt und vollständig sind, übernimmt Medical Pet Shirts keine Haftung für Fehler oder eine missbräuchliche Verwendung des Handbuchs. Medical Pet Shirts behält das Recht vor, dieses Handbuch zu ändern. **Garantie:** Unsere Produkte haben eine Garantie gegen Produktionsfehler. Wenden Sie sich bei Problemen bitte an Ihren Tierarzt oder an die Verkaufsstelle.

Mehr Informationen über dieses Produkt? Besuchen Sie: links.medicalpetshirts.com/pdp-protective-pet-shirt-rabbit

Scannen Sie den QR-Code für detaillierte Informationen zur Verwendung, Größen und mehr.



Manual de seguridad y garantía MPS-Protective Pet Shirt Conejo.

Tipo de producto: Ropa de recuperación (médica) para conejos.

Lea atentamente toda la información de seguridad y del producto antes de utilizar la camiseta MPS-Protective Pet Shirt en su mascota. No seguir estas instrucciones puede causar lesiones. Los productos MPS no son juguetes ni artículos de moda. Mantenga a su mascota bajo la supervisión de un adulto durante el uso de este producto. El uso incorrecto puede provocar puntos calientes, rozaduras, irritación de la piel, inflamación o infección.

Instrucciones importantes para la seguridad:

1. Uso. La camiseta MPS-Protective Pet Shirt solo debe usarse bajo la recomendación/consulta de su veterinario, y solo después de una intervención médica, en caso de problemas médicos o cutáneos. ¡En caso de emergencia o duda, consulte de inmediato a su veterinario! No utilice la camiseta si está dañada o tiene piezas sueltas. **2. Supervisión.** Su mascota debe estar siempre bajo la supervisión de un adulto responsable mientras usa la MPS-Protective Pet Shirt. Es obligatorio verificar regularmente la higiene, la fricción, el atrapamiento, el roce, el peligro de tropezar o el peligro de asfixia. **3. Período de adaptación.** Deje que su mascota se acostumbre a la camiseta antes de una operación, y permita que su veterinario la coloque a su mascota durante la anestesia. ¿Tiene dudas? ¡Pida siempre asesoramiento a su veterinario! Si su mascota mastica o mordisquea mucho los materiales, no se recomienda este producto. Por lo tanto, siempre supervise a su mascota. **4. Comportamiento inusual.** Si su mascota muestra un comportamiento inusual, retire inmediatamente la Protective Pet Shirt y consulte a su veterinario. El comportamiento inusual puede incluir, entre otras cosas, caminar hacia atrás, estornudar, toser o incontinencia. **5. Problemas visibles.** Verifique diariamente el ajuste y cualquier irritación en la piel. Informe de inmediato al veterinario sobre cualquier irritación en la piel u otros problemas, para recibir el tratamiento y cuidado adecuados. **6. Ajuste.** Para evitar riesgos de seguridad, asegúrese de tener el ajuste correcto. Una camiseta demasiado grande puede causar peligro de tropiezo o asfixia; una camiseta demasiado pequeña puede causar rozaduras o irritación en la piel. Mida siempre a su mascota según se describe en el manual, que está disponible a través del enlace al final de la página. La camiseta está diseñada para ajustarse bien. Está hecha de material ligero, transpirable y elástico. Puede ser necesario estirar la camiseta para ponerla a su mascota; esto es normal, ya que es una tela elástica en cuatro direcciones. Asegúrese siempre de que haya espacio para 1 o 2 dedos alrededor de las patas, el pecho, el cuello y la cola. Revise, al menos una vez al día, cualquier irritación alrededor de las patas, el pecho, el cuello y la cola, y asegúrese de que el MPS-Protective Pet Shirt® esté en su lugar. **7. Tiempo de uso.** No use la Protective Pet Shirt más de ocho (8) horas consecutivas, a menos que sea indicado de otra manera por su veterinario. Verifique diariamente el área problemática o la zona quirúrgica. Quitele la camiseta a su mascota al cabo de unos días, lávela y déjela secar al aire. Para una protección constante, recomendamos adquirir una segunda MPS-Protective Pet Shirt. Consulte las instrucciones de lavado en el manual, que se pueden consultar a través del enlace a continuación.

Exención de responsabilidad: Aunque nos esforzamos para asegurarnos de que la información de este manual sea correcta y completa, Medical Pet Shirts no se hace responsable de los errores o del uso indebido del manual. Medical Pet Shirts tiene el derecho de modificar este manual. **Garantía:** Nuestros productos tienen una garantía para defectos de fabricación. En caso de que encuentre un defecto en el producto, contacte con la consulta de su veterinario o con el lugar de compra.

¿Quieres saber más sobre este producto? Visita: links.medicalpetshirts.com/pdp-protective-pet-shirt-rabbit

Escanee el código QR para obtener información detallada sobre el uso, tallas, etc.




MANUAL

Medical Pet Shirts

The best recovery wear a pet can get.

MPS-Protective Pet Shirt Rabbit
Rabbit • Konijn • Lapin • Kaninchen • Conejo

EN	Safety and warranty manual for rabbit owner.
NL	Veiligheids- en garantiehandleiding voor konijneneigenaar.
FR	Manuel de sécurité et de garantie pour propriétaire de lapin.
DE	Sicherheits- und Garantiehinweise für Kaninchenbesitzer.
ES	Manual de seguridad y garantía para propietarios de conejos.

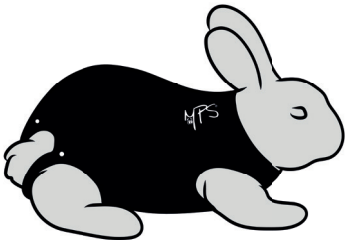

Safety and warranty manual MPS-Protective Pet Shirt Rabbit.	
Product type: (Medical) Recovery wear for rabbits.	
Read all safety and product information carefully before using the MPS-Protective Pet Shirt on your pet. Failure to follow these instructions may cause injury. MPS products are not toys or fashion items. Adult supervision is required during the use of this product. Improper use may lead to hotspots, chafing, skin irritation, inflammation, or infection. In case of emergency or doubt, consult your veterinarian immediately.	
Important safety instructions: 1. Usage. The MPS-Protective Pet Shirt should only be used on the advice/consultation of your veterinarian and only after a medical procedure, for medical conditions, and skin problems. In case of emergency or doubt, consult your veterinarian immediately! Do not use the shirt if it is damaged or if it contains loose parts. 2. Supervision. Your pet must always be under the supervision of a responsible adult while wearing the MPS-Protective Pet Shirt. Regular checks for cleanliness, friction, constriction, chafing, tripping hazard, or choking hazard are mandatory. 3. Adjustment period. Allow your pet to get used to the shirt before a surgery and have your veterinarian put the shirt on your pet during anesthesia. If in doubt, always consult your veterinarian for advice. If your pet tends to chew or gnaw on materials, this product is not recommended. Therefore, always keep your pet under supervision. 4. Unusual behavior. In case of unusual behavior from your pet, which may include but is not limited to walking backward, sneezing, coughing, or incontinence, remove the MPS-Protective Pet Shirt immediately and consult your veterinarian. 5. Visible issues. Check for proper fit and any skin irritation daily. Report skin irritation or any other problems to your veterinarian immediately for proper treatment and care. 6. Fit. Ensure the right fit to avoid safety risks. A shirt that is too large can cause tripping or choking hazards; a shirt that is too small can cause friction or skin irritation. Always measure your pet as described in the manual, which is available through the link at the bottom of the page. The shirt is designed to have a snug fit. It is made of lightweight, breathable, and stretchable material. It may be necessary to stretch the shirt to put it on; this is normal as it is a four-way stretch fabric. Make sure there is always room for 1 to 2 fingers around the legs, chest, neck, and tail. Check at least once a day for any irritation around the legs, chest, neck, and tail, and to ensure that the shirt is in place. 7. Wear time. Never use the shirt for more than eight (8) consecutive hours unless prescribed by your veterinarian. Check the problem area or surgical zone every day. Remove the shirt every few days, wash it, and let it air dry. For constant protection, we recommend using a second MPS-Protective Pet Shirt. See the washing instructions in the user manual, available in the link below.	
Disclaimer: While every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate and complete, Medical Pet Shirts is not liable for errors in or incorrect use of the manual and the product. We reserve the right to modify the manual. Warranty: Our products are guaranteed against manufacturing defects. In case of a product defect, please contact your veterinarian or the place of purchase.	Want to know more about this product? Visit: links.medicalpetshirts.com/pdp-protective-pet-shirt-rabbit Scan the QR code for detailed information about usage, sizes and more. 

Veiligheids- en garantiehandleiding MPS-Protective Pet Shirt Konijn.	
Type product: (Medische) Herstelkleding voor konijnen.	
Lees alle veiligheids- en productinformatie zorgvuldig door voordat u het MPS-Protective Pet Shirt op uw huisdier gebruikt. Het niet opvolgen van deze instructies kan letsel veroorzaken. MPS-producten zijn geen speelgoed of modeartikelen. Volwassen toezicht is vereist tijdens het gebruik van dit product. Onjuist gebruik kan leiden tot hotspots, schuren, huidirritatie, ontsteking of infectie. In geval van nood of twijfel, raadpleeg onmiddellijk uw dierenarts.	
Belangrijke veiligheidsinstructies: 1. Gebruik. Het shirt mag alleen gebruikt worden op advies/na raadpleging van uw dierenarts en alleen na een medische ingreep, bij medische aandoeningen of huidproblemen. Bij nood of twijfel, raadpleeg direct uw dierenarts! Gebruik het shirt niet als het beschadigd is of wanneer het losse onderdelen bevat. 2. Toezicht. Uw huisdier moet te allen tijde onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene tijdens het dragen van het shirt. Reguleer controle op reinheid, wrijving, beknelling, schuring, struikelgevaar, of verstikkingsgevaar is verplicht. 3. Aanpassingsperiode. Laat uw huisdier wennen aan het shirt vooraf aan een operatie en laat uw dierenarts het shirt bij uw huisdier aantrekken tijdens de narcose. Twijfelt u? Raadpleeg altijd uw dierenarts voor advies. Als uw huisdier veel kauwt of knaagt aan materialen, wordt dit product niet aanbevolen. Houd uw huisdier daarom altijd onder toezicht. 4. Ongewoon gedrag. Verwijder het shirt onmiddellijk en raadpleeg uw dierenarts als uw huisdier ongewoon gedrag vertoont. Ongewoon gedrag kan omvatten, maar is niet beperkt tot achterwaarts lopen, niezen, hoesten en incontinentie. 5. Zichtbare problemen. Controleer dagelijks de pasvorm en eventuele irritatie op de huid. Meld huidirritatie of andere problemen direct aan uw dierenarts voor de juiste behandeling en zorg. 6. Pasvorm. Zorg voor de juiste pasvorm om veiligheidsrisico's te voorkomen. Een te groot shirt kan struikel- of verstikkingsgevaar veroorzaken; een te klein shirt kan wrijving of huidirritatie veroorzaken. Meet altijd uw huisdier zoals beschreven in de handleiding, die beschikbaar is via de link onderaan de pagina. Het shirt is ontworpen om goed aan te sluiten. Het is gemaakt van lichtgewicht, ademend en rekbaar materiaal. Het kan nodig zijn om het shirt uit te rekken om het aan te trekken; dit is normaal, aangezien het een vierwegstretchstof is. Zorg ervoor dat er altijd ruimte is voor 1 tot 2 vingers rond de poten, borst, nek en staart. Controleer minstens één keer per dag op eventuele irritatie rond de poten, borst, nek en staart, en om ervoor te zorgen dat het MPS-Protective Pet Shirt op zijn plaats zit. 7. Draagtijd. Gebruik het shirt nooit langer dan acht (8) opeenvolgende uren, tenzij anders voorgeschreven door uw dierenarts. Controleer elke dag het probleemgebied of de chirurgische zone. Trek het shirt om de paar dagen uit, was het shirt en laat het aan de lucht drogen. Voor constante bescherming raden wij aan om een tweede MPS-Protective Pet Shirt te gebruiken. Zie de wasinstructies in de handleiding, beschikbaar via onderstaande link.	
Disclaimer: Hoewel wij er zorg voor dragen dat de informatie in deze handleiding accuraat en volledig is, is Medical Pet Shirts niet aansprakelijk voor fouten in of onjuist gebruik van de handleiding en het product. We behouden ons het recht voor de handleiding te wijzigen. Garantie: Onze producten zijn gegarandeerd tegen productiefouten. Neem bij een productdefect contact op met uw dierenarts of de plaats van aankoop.	Meer informatie over dit product? Ga dan naar: links.medicalpetshirts.com/pdp-protective-pet-shirt-rabbit Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie over het gebruik, maten en meer. 

Manuel de sécurité et de garantie du MPS-Protective Pet Shirt Lapin.	
Type de produit : Vêtement de récupération (médicale) pour lapins.	
Lisez attentivement toutes les informations de sécurité et du produit avant d'utiliser le MPS-Protective Pet Shirt sur votre animal de compagnie. Ne pas suivre ces instructions peut causer des blessures. Les produits MPS ne sont ni des jouets ni des articles de mode. Votre animal de compagnie doit rester sous la supervision d'un adulte pendant l'utilisation de ce produit. Une utilisation incorrecte peut entraîner des points chauds, des frottements, des irritations cutanées, une inflammation ou une infection. En cas d'urgence ou de doute, consultez immédiatement votre vétérinaire.	
Instructions de sécurité importantes : 1. Utilisation. Le MPS-Protective Pet Shirt ne doit être utilisé qu'après la consultation de votre vétérinaire et seulement après une intervention médicale, en cas de problèmes médicaux ou cutanés. En cas d'urgence ou de doute, consultez immédiatement votre vétérinaire ! N'utilisez pas le Shirt s'il est endommagé ou s'il comporte des pièces lâches. 2. Surveillance. Votre animal doit toujours être sous la supervision d'un adulte responsable lorsqu'il porte le MPS-Protective Pet Shirt. Un contrôle régulier de l'hygiène, des frottements, des compressions, des risques de trébuchement ou d'étouffement est obligatoire. 3. Période d'adaptation. Habituez votre animal au Protective Pet Shirt avant une opération et laissez votre vétérinaire le mettre pendant l'anesthésie. Vous avez des doutes ? Consultez toujours votre vétérinaire si vous avez besoin de conseils. Si votre animal mâche/grignote beaucoup, ce produit n'est pas recommandé. Surveillez donc toujours votre animal. 4. Comportement inhabituel. Retirez immédiatement le Protective Pet Shirt et consultez votre vétérinaire si votre animal présente un comportement inhabituel. Un comportement inhabituel peut inclure, mais sans s'y limiter, la marche en arrière, les éternuements, la toux ou l'incontinence. 5. Problèmes visibles. Vérifiez quotidiennement l'ajustement et l'absence de toute irritation cutanée. Signalez immédiatement toute irritation cutanée ou tout autre problème à votre vétérinaire pour garantir un traitement et des soins appropriés. 6. Ajustement. Assurez-vous d'avoir la bonne taille pour éviter les risques de sécurité. Un Medical Pet Shirt trop grand peut causer des risques de trébuchement ou d'étouffement ; un Protective Pet Shirt trop petit peut causer des frottements ou des irritations cutanées. Mesurez toujours votre animal de compagnie comme indiqué dans le manuel, disponible via le lien en bas de la page. Le MPS-Medical Pet Shirt est conçu pour bien s'adapter. Il est fabriqué en matériau léger, respirant et extensible. Il peut être nécessaire d'étirer le Shirt pour l'enfiler ; c'est normal, car il s'agit d'un tissu extensible dans quatre directions. Assurez-vous toujours qu'il y a de l'espace pour 1 à 2 doigts autour des pattes, du poitrail, du cou et de la queue. Vérifiez au moins une fois par jour s'il y a des irritations autour des pattes, du poitrail, du cou et de la queue, et assurez-vous que le MPS-Protective Pet Shirt est bien en place. 7. Durée de port. N'utilisez jamais le Protective Pet Shirt pendant plus de huit (8) heures consécutives, sauf indication contraire de votre vétérinaire. Vérifiez chaque jour la zone du problème ou la zone chirurgicale. Retirez le Medical Pet Shirt tous les quelques jours, lavez-le et laissez-le sécher à l'air. Pour une protection constante, nous vous recommandons d'acheter un deuxième MPS-Protective Pet Shirt. Consultez les instructions de lavage dans le mode d'emploi, à consulter via le lien ci-dessous.	
Disclaimer : Bien que nous prenions soin de partager de l'information complète, Medical Pet Shirts ne garantit pas l'exactitude, l'actualité ou la précision des informations du manuel et du produit. Medical Pet Shirts réserve le droit de modifier l'information dans ce manuel. Garantie : Nos produits sont garantis contre les défauts de fabrication. Si un problème se produit, contactez votre vétérinaire ou le lieu de vente.	Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit ? Rendez-vous sur : links.medicalpetshirts.com/pdp-protective-pet-shirt-rabbit Scannez le code QR pour des informations détaillées sur l'utilisation, les tailles et plus encore. 