



**Joline**<sup>®</sup>


**Achim Schulz-Lauterbach**

Vertrieb medizinischer Produkte GmbH


*Experts in Care.*

# Knipsa

Endomyokard Biopsiezange

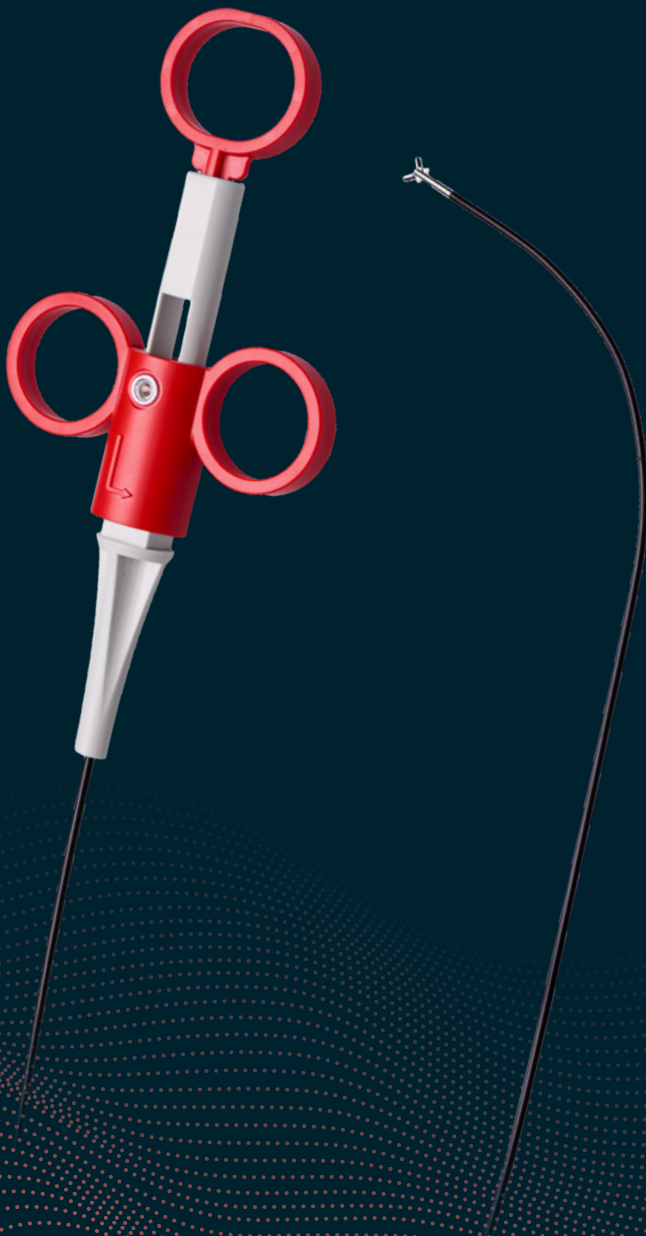


Kardiologie

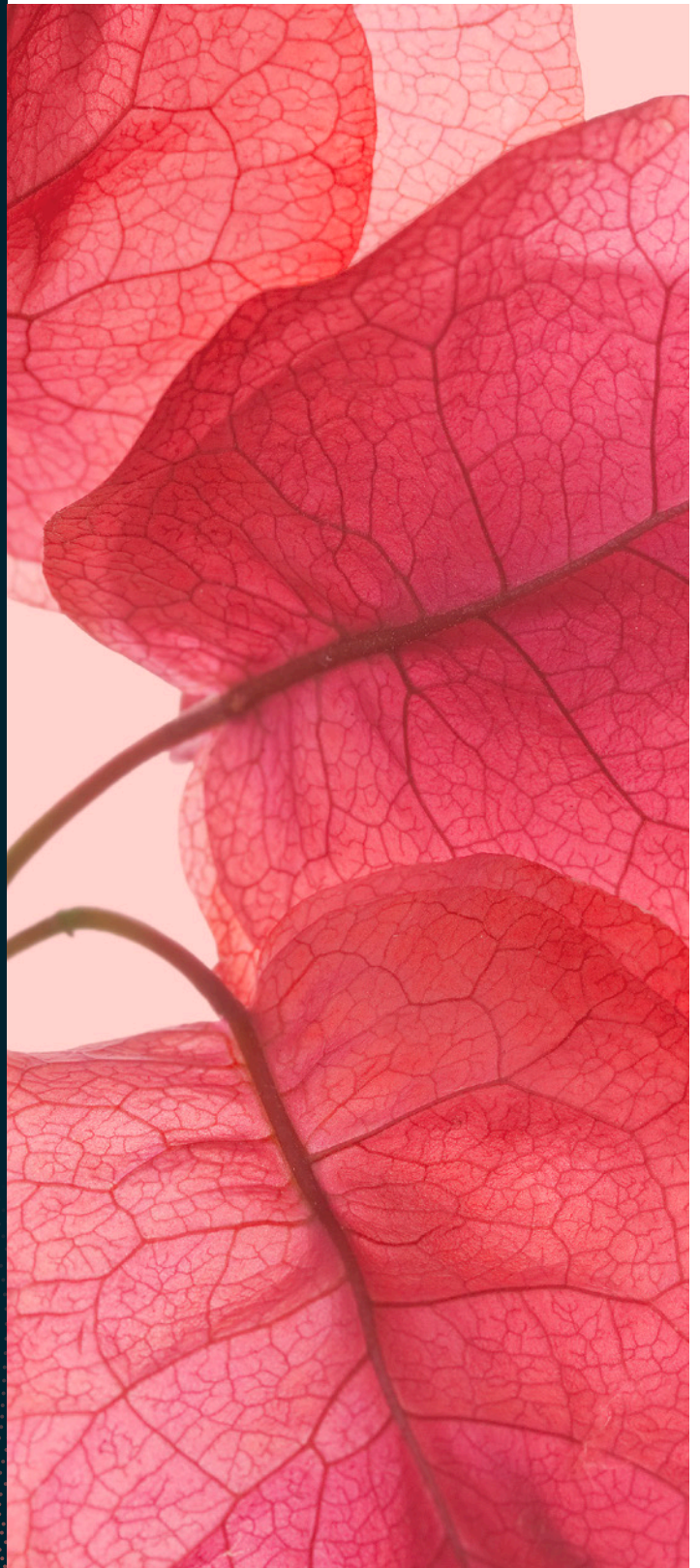

# Knipsa

Endomyokard Biopsiezange

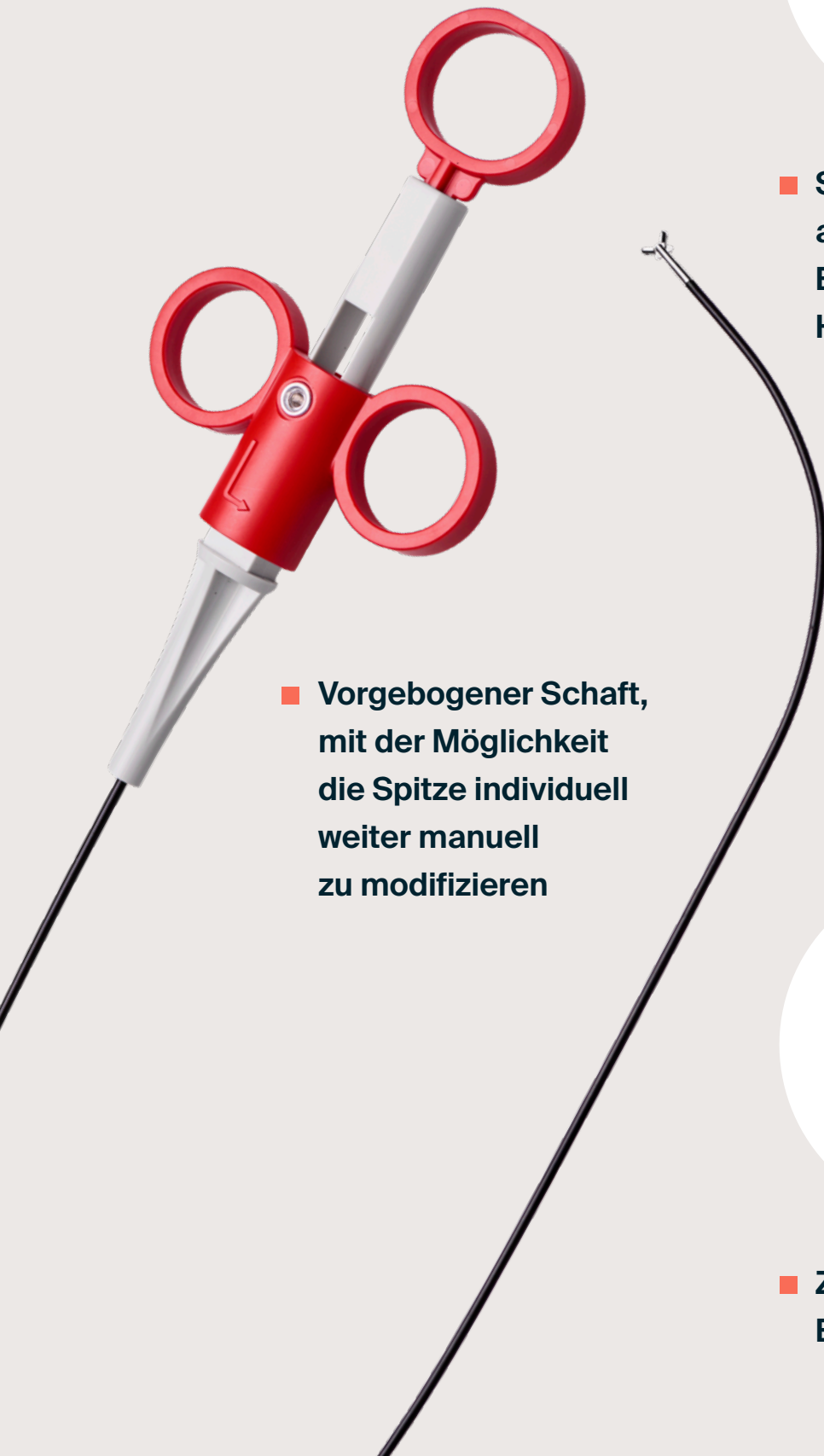

- Vorgebogener Schaft, mit der Möglichkeit die Spitze individuell weiter manuell zu modifizieren



- Scharfe Schneidbacken aus Edelstahl zur Entnahme von Herzmuskelgewebe



- Zwei symmetrische Edelstahl-Schneidbacken



## Griffeigenschaften



Griff mit Daumenring und Fingergriffen - rotierbar um 360°.




Der Biegungsindikator auf dem Griff ermöglicht dem Anwender eine einfachere Navigation des bereits vorgebogenen Schafts.



Leicht zu bewegendem Bowdenzug zum Öffnen und Schließen der Schneidbacken.

## Die Endomyokard Biopsiezange ist in zwei Standardgrößen erhältlich.

Verschiedene Längen für unterschiedliche Zugangspunkte: Die **KNIPSA500** ist dabei vorzugsweise für den Zugang über die rechte Vena jugularis interna. Die **KNIPSA1100** für den Zugang über eine der Venae femorales.

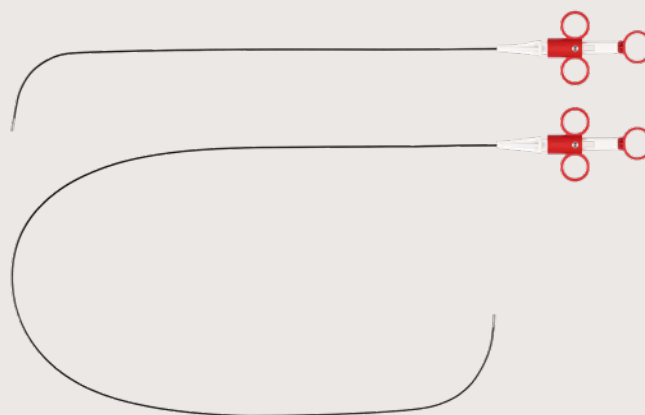

## Bestellinformation

Katalognummer	Konfiguration	Einführlänge	Außendurchmesser Schaft	Volumen der Schneidbacken	Erforderlicher Innendurchmesser der Einführschleuse	Verpackung
KNIPSA500	vorgebogen	50 cm	1,90 mm	2,42 mm <sup>3</sup>	≥ 6 Fr (2,00 mm)	steril, einzeln verpackt
KNIPSA1100	vorgebogen	109 cm	1,90 mm	2,42 mm <sup>3</sup>	≥ 6 Fr (2,00 mm)	steril, einzeln verpackt

Die Biopsiezange Knipsa ist zur einmaligen Anwendung vorgesehen.



Nach höchsten Qualitätsansprüchen  
in unserer modernen Fertigung in  
Deutschland hergestellt.



Zertifiziert gemäß den Anforderungen der  
europäischen Medical Device Regulation  
(EU) 2017/745 und gefertigt unter Einhaltung  
der EN ISO 13485 Vorgaben.



**Joline**<sup>®</sup>

**Achim Schulz-Lauterbach**

Vertrieb medizinischer Produkte GmbH

*Experts in Care.*

Vertrieb durch:



**Achim Schulz-Lauterbach**

Vertrieb medizinischer Produkte GmbH

Langer Brauck 15  
D-58640 Iserlohn

Phone: +49 2371 9763 0  
Fax: +49 2371 9763 26  
E-mail: [info@akut-dialyse.de](mailto:info@akut-dialyse.de)  
[www.akut-dialyse.de](http://www.akut-dialyse.de)



Joline GmbH & Co. KG, Neue Rottenburger Str. 50, 72379 Hechingen  
Qualität geht vor: Joline ist nach EN ISO 13485 zertifiziert.  
Alle Joline-Produkte sind CE-gekennzeichnet.  
Änderungen vorbehalten: 53619/26/04\_R01

CE0124