

#whdentalwerk



wh.com/na



Appareils d'entretien W&H


L'efficacité au cœur de votre processus

Nos unités de maintenance assurent un entretien optimal des instruments dentaires en effectuant les cycles de lubrification nécessaires pour garantir leur bon fonctionnement et leur longévité.



assistina^{ONE}

assistina^{TWIN}

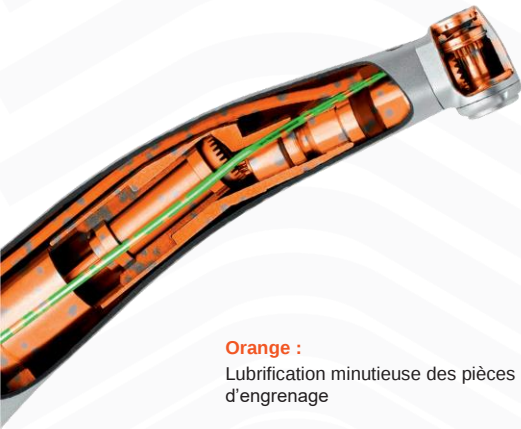

Orange :

Lubrification minutieuse des pièces d'engrenage

Vert :

Nettoyage adéquat des canaux de vaporisation et séchage des parties internes

Appareil d'entretien Assistina

permet d'utiliser jusqu'à 20 vaporisateurs d'huile*



*400 ml par vaporisateur d'huile

Principaux avantages

- ✓ **Lubrifie soigneusement** toutes les pièces d'engrenage, **nettoie** les **canaux** de vaporisation et sèche les pièces internes à l'air comprimé.
- ✓ **Nébulisation de l'huile** : une technologie révolutionnaire qui élimine le besoin de lubrification par rotation de la pièce à main, ce qui réduit le temps de cycle.
- ✓ **Filtre HEPA** : protège le personnel des aérosols nocifs et prévient les odeurs désagréables dans le cabinet.
- ✓ **Moins de gaspillage et réduction des coûts** : l'appareil d'entretien ne se remplace qu'après le traitement de 2 800 instruments, ce qui équivaut à 20 vaporisateurs d'huile de 400 ml chacun.
- ✓ **Raccord rapide de W&H** : passez facilement d'une pièce à main à l'autre grâce à une large gamme d'adaptateurs pour répondre à tous les besoins de la pratique dentaire.
- ✓ **Plus sûr** : aucune exposition à des aérosols dangereux et aucun résidu sur les mains.




Balayez pour une vue
d'ensemble des coupleurs
spécifiques à une marque

Adaptateur


Quick RM

pour les pièces à main à turbine.

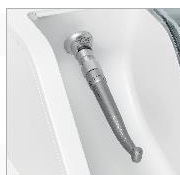

Adaptateur Quick ISO

pour les pièces à main droites et contre-angles.

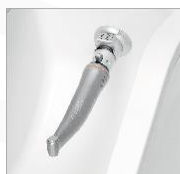

Assistina One

un système à port unique qui
remplace le modèle Assistina 301.
Le design compact est parfait pour
atteindre les plus petites zones de
stérilisation.

Assistina Twin

un système multiport pour un travail
ininterrompu et un gain d'espace grâce
à une porte coulissante.

	assistina ^{ONE}	assistina ^{TWIN}
Comparaison des principales caractéristiques		
Temps de cycle (nettoyage et lubrification)	18 secondes	10 secondes
Alimentation électrique	Non requise	100 à 240 V CA 50 à 60 Hz
Pression de fonctionnement	5 à 10 bar / 72,5 à 145 lb/po ² (régulé par un contrôleur de pression automatique intégré)	
Dimensions (L x P x H)	6,5 po x 15,1 po x 9,6 po 166 x 383 x 243 mm	11,7 po x 17,1 po x 7,5 po 297 x 435 x 190 mm
Garantie	24 mois	
Numéros de référence	30398003	30310003
Numéros de référence des appareils d'entretien	08064970	07484000
Pour obtenir des renseignements détaillés sur le produit		

W&H Impex Inc.
6490 Hawthorne Drive Windsor,
Ontario, N8T 1J9

Tél. 1 800 265 6277 aux États-Unis
et au Canada

Tél. 1.519.944.6739 à l'extérieur
des États-Unis et du Canada

Télec. 1.519.974.6121

wh.com/na