


La solution
pour le processus
de vos implants

Ostéotomie
5,5 Ncm quelle que soit la qualité
osseuse et 90 ml/min de liquide
de refroidissement pour éviter les
nécroses.

Taraudage
Intégration sans contrainte qui
permet d'éviter d'exercer une
contrainte excessive sur l'os.

Pose d'implant
Insertion contrôlée de tous les
types d'implants avec un couple
allant jusqu'à 70 Ncm.

Accessoires
W&H

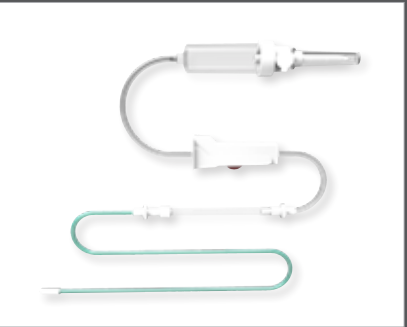

Tuyau du liquide de refroidissement
› Précision au centimètre près
› Utilisation flexible pour tous les
appareils chirurgicaux W&H



Cart
› Vos boîtiers de commande W&H
réunis en un seul endroit
› Peu encombrant
› Mobile



Valise de transport
› Emballage pour un transport
en toute sécurité
› Espace suffisant pour un
Implantmed, une commande
au pied, des pièces à main et
contre-angles

Caractéristiques techniques

CE
0297

Type :	Implantmed SI-923	Implantmed SI-915
Tension secteur :	230 V	120 V
Variation de tension autorisée :	220 à 240 V	110 à 130 V
Courant nominal :	0,3 à 0,8 A	0,3 à 1,6 A
Fréquence :	50 à 60 Hz	
Fusible secteur (2 pcs) :	250 V – T 1,6 AH	
Consommation maxi :	160 VA	
Puissance de sortie maxi :	80 W	
Couple moteur maxi :	5,5 Ncm	
Plage de vitesse de rotation du moteur dans la plage de tension nominale :	300 à 40 000 tr/min	
Débit de liquide de refroidissement à 100 % :	90 ml/min minimum	
Dimensions en mm (hauteur x largeur x profondeur) :	100 x 235 x 240	
Poids en kg :	2,7 kg	
Commande au pied :	S-N2	
Pièces à main et contre-angles :	WI-75 E/KM / S-9 L G / S-11 L G / WS-56 L G / WS-75 L G / WS-91 L G / WS-92 L G	
Garantie :	12 mois	



Fabricant :

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribution :

W&H France
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim, **France**
t. +33 388 773600
f. +33 388 773601
commercial.fr@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

#whdentalwerk
f @in y t
video.wh.com

Plus d'info
sur
wh.com



Ergonomique,
simple, puissant.

Tient ses promesses.
Aujourd'hui et demain.



implantmed CLASSIC

Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les
accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison standard.

20482 AFR Rev. 000 / 15.07.2019
Sous réserve de modifications


Coup d'œil sur l'essentiel

Implantmed impressionne par son utilisation intuitive et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel : vos patients.



Moteur puissant

Avec un couple moteur de 5,5 Ncm et une plage de vitesse de rotation de 300 à 40 000 tr/min, Implantmed montre toute sa puissance.

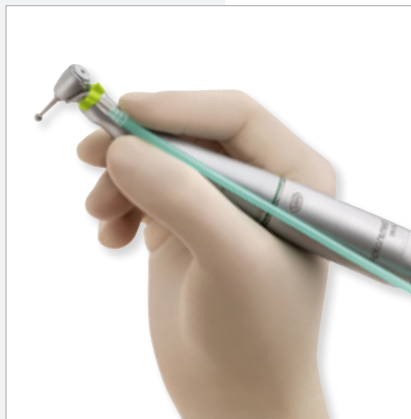


Travail sans effort

Combinés, le moteur rapide et le contre-angle ergonomique sont parfaitement équilibrés. Vous pouvez ainsi travailler plus longtemps, sans fatigue ni crampes au niveau des mains.



Utilisation aisée

Grâce à son nouvel écran avec rétroéclairage automatique, Implantmed est extrêmement facile à utiliser.

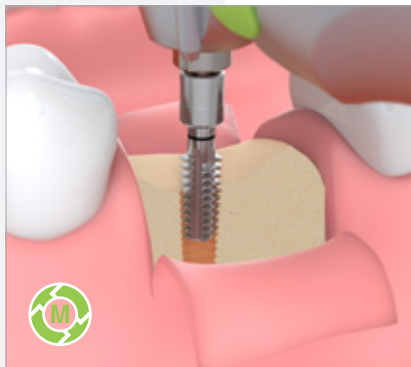

Intégration sans contrainte

La fonction taraudage automatique vous aide lors de la pose d'implant dans des os durs, ce qui permet d'éviter d'exercer une contrainte excessive sur l'os.

Robert Schwagierek, docteur en médecine dentaire

Spécialiste en chirurgie orale

« Grâce à sa facilité d'utilisation, Implantmed garantit aux patients une sécurité maximale et un traitement d'excellente qualité. Pour le cabinet, il est d'une efficacité optimale au quotidien. »

Implantmed
avec nouveau
moteur
électrique
EM-19



Les pièces à main et contre-angles de chirurgie avec mini LED+ et générateur

WS-75 L G | 20:1

Développé spécialement pour la préparation du site implantaire et de la pose d'implant.

S-9 L G | 1:1 S-11 L G | 1:1

Développé pour les résections apicales, les ostéotomies, les séquestrectomies, les modelages et les régularisations osseuses ainsi que pour l'extraction des dents de sagesse.

WS-91 L G | 1:2,7

Développé spécialement pour permettre un meilleur accès aux prémolaires et aux molaires ainsi que pour l'extraction des dents de sagesse.

WS-56 L G | 1:1 WS-92 L G | 1:2,7

Développé pour les ostéotomies, les séquestrectomies, les germectomies et les hémisections.

